


Долговременный катетер EQUISTREAM®

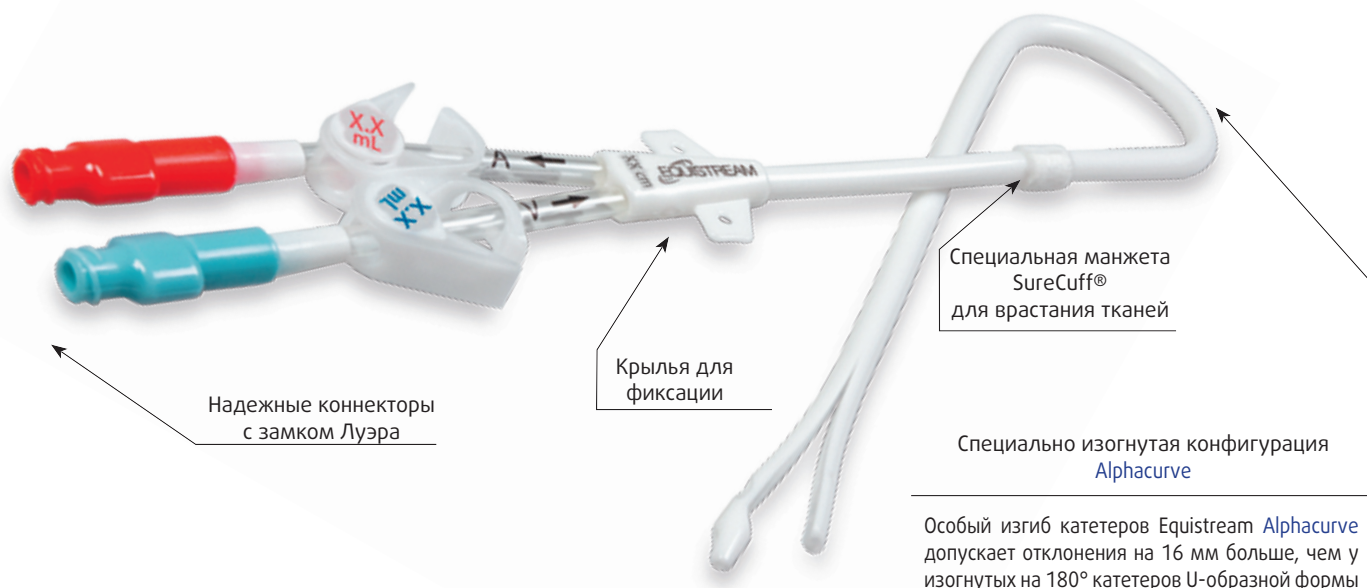


Различные варианты для соответствия индивидуальным потребностям

- ▶ Диаметр 14,5 Fr и 16 Fr
- ▶ Прямая или изогнутая конфигурации для соответствия индивидуальным предпочтениям
- ▶ Безопасная простая установка при использовании набора с микроинтродьюсером

Оптимизация характеристик потока за счет технологии расщепленного кончика

- ▶ Благодаря вложению одного конца в другой во время установки катетера, облегчается введение обоих кончиков в правое предсердие
- ▶ Благодаря наличию боковых отверстий по всей окружности 360, обеспечиваются альтернативные направления потока

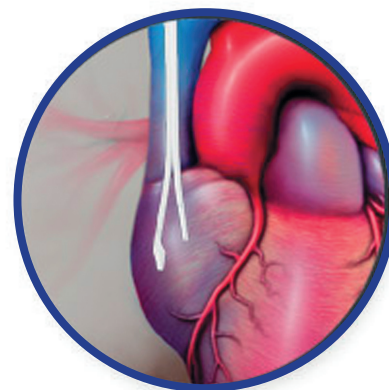

Закругленный кончик со скошенным профилем для легкого введения по проводнику

Вложенный полый стилет

Легкость установки

- ▶ Более легкая установка по проводнику с вложенным стилетом.
- ▶ Снижение риска воздушной эмболии и кровопотери благодаря интродьюсеру AirGuard с клапаном.



- ▶ Высокая пропускная способность катетеров **EQUISTREAM** в среднем 500 мл/мин.
- ▶ Рециркуляция в среднем менее 2% в прямом и реверсивном направлении.
- ▶ Установка в правом предсердии позволяет добиться оптимальных характеристик потока в соответствии с рекомендациями KDOQI.

№ по каталогу	Диаметр (Fr)	Конфигурация	Имплантируемая длина (см)	Стилет	Набор
6903150	14.5	прямой	15	Вложенный стилет	Стандартный
6903190	14.5	прямой	19	Вложенный стилет	Стандартный
6903230	14.5	прямой	23	Вложенный стилет	Стандартный
6903270	14.5	прямой	27	Вложенный стилет	Стандартный
6903310	14.5	прямой	31	Вложенный стилет	Стандартный
6903350	14.5	прямой	35	Вложенный стилет	Стандартный
6903420	14.5	прямой	42	Вложенный стилет	Стандартный
6905190	14.5	изогнутый	19	Без стилета	Стандартный
6905240	14.5	изогнутый	24	Без стилета	Стандартный
6905280	14.5	изогнутый	28	Без стилета	Стандартный
6905310	14.5	изогнутый	31	Без стилета	Стандартный



Катетеры **EQUISTREAM XK (16 Fr)** имеют те же преимущества, что и катетеры **EQUISTREAM**, плюс:


- ▶ Обеспечивают пропускную способность в среднем 500 мл/мин даже при 15% окклюзии, за счет большего внутреннего просвета.
- ▶ Обеспечивают пропускную способность 500 мл/мин при давлении ниже на 29%, чем для катетеров диаметром 14,5 Fr.

№ по каталогу	Диаметр (Fr)	Конфигурация	Имплантируемая длина (см)	Стилет	Набор
6913190	16	прямой	19	Вложенный стилет	Стандартный
6913230	16	прямой	23	Вложенный стилет	Стандартный
6913270	16	прямой	27	Вложенный стилет	Стандартный
6913310	16	прямой	31	Вложенный стилет	Стандартный
6913350	16	прямой	35	Вложенный стилет	Стандартный
6913420	16	прямой	42	Вложенный стилет	Стандартный
6915190	16	изогнутый	19	Без стилета	Стандартный
6915240	16	изогнутый	24	Без стилета	Стандартный
6915280	16	изогнутый	28	Без стилета	Стандартный
6915310	16	изогнутый	31	Без стилета	Стандартный

Долговременный катетер HemoSplit®

HemoSplit™
LONG-TERM HEMODIALYSIS CATHETER

Долговременные катетеры для гемодиализа в наборе, двухпросветные с клапанным интродьюсером AirGuard и антибактериальным покрытием BioBlock, на который Вы можете положиться, благодаря его улучшенным характеристикам при проведении долговременного гемодиализа и улучшенной защите от кровопотери и эмболии воздуха.

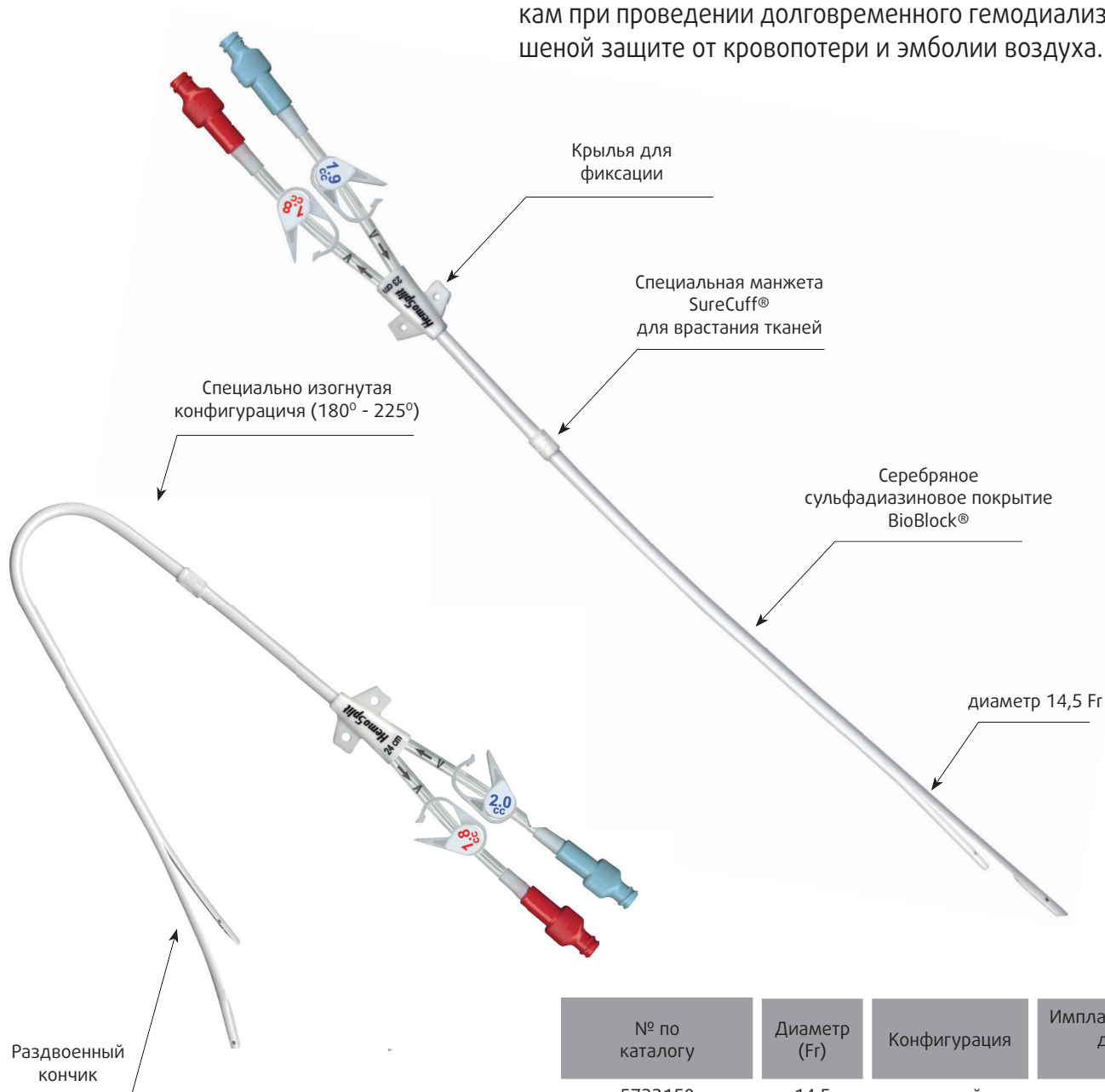

№ по каталогу	Диаметр (Fr)	Конфигурация	Имплантируемая длина (см)
5733150	14.5	прямой	15
5733690	14.5	прямой	19
5733730	14.5	прямой	23
5733270	14.5	прямой	27
5733350	14.5	прямой	35
5734420	14.5	прямой	42
5704150	14.5	изогнутый	19
5704190	14.5	изогнутый	24
5704230	14.5	изогнутый	28
5704270	14.5	изогнутый	31

Исключительные возможности

Долговременный, двухпросветный катетер для гемодиализа. Изготовлен из материала Carbothane* (рентгенконтрастный полиуретан). Серебряное сульфадиазиновое покрытие BioBlock® обеспечивает 99,9% защиты в течение 3-х недель. Раздвоенный кончик катетера со специальными отверстиями по всей окружности (360°) облегчает кровоток и позволяет находиться катетеру в просвете сосуда, не прикасаясь к его стенкам. Манжета для врастания мягких тканей и крылья для фиксации катетера. Интродьюсер против эмболии и потери крови Air Guard™.

- Carbothane* - материал из которого изготовлен катетер - рентгенконтрастный полиуретан, прочный и надежный, а также мягкий и удобный для пациента, что позволяет использовать катетер в течение длительного времени.
- Отверстия по всей окружности кончика катетера (360°) - снижение риска закрытия катетера стенками сосуда, что позволяет избежать артериальной недостаточности.
- Большой просвет и дизайн кончика - скорость кровотока более 500 мл/мин.



Простота введения

- Исключительная устойчивость к перегибанию - облегчает введение, упрощает размещение катетера в сосуде.
- Мягкий туннелер, интродьюсер из ПТФЭ и жесткий проводник - облегчают введение катетера.

Интродьюсер с клапаном AirGuard™

- AirGuard™ - исключительная защита от воздушной эмболии и кровопотери.
- Пропускание воздуха 0,15 cc/сек. - самый эффективный интродьюсер с клапаном для предотвращения воздушной эмболии.
- Снижение кровопотери - более безопасная процедура по сравнению с бесклапанным интродьюсером.


BioBlock® серебряное сульфадиазиновое покрытие

Теперь врачи могут быть уверены в том, что степень бактериального заражения стала гораздо ниже, если они используют катетеры HemoSplit® с покрытием BioBlock®. Покрытие BioBlock® это инновационная технология с применением серебра и сульфадиазина, которые давно и успешно применяются в медицинской практике.

Трехнедельная защита:

Покрытие, которое снижает степень бактериального инфицирования катетеров на 99,9 % в течении 21 дня. Благодаря тому, что серебро с сульфадиазином не является антибиотиком, бактерии не вырабатывают сопротивляемость к нему.

Кратковременный катетер Niagara и Niagara Slim-Cath

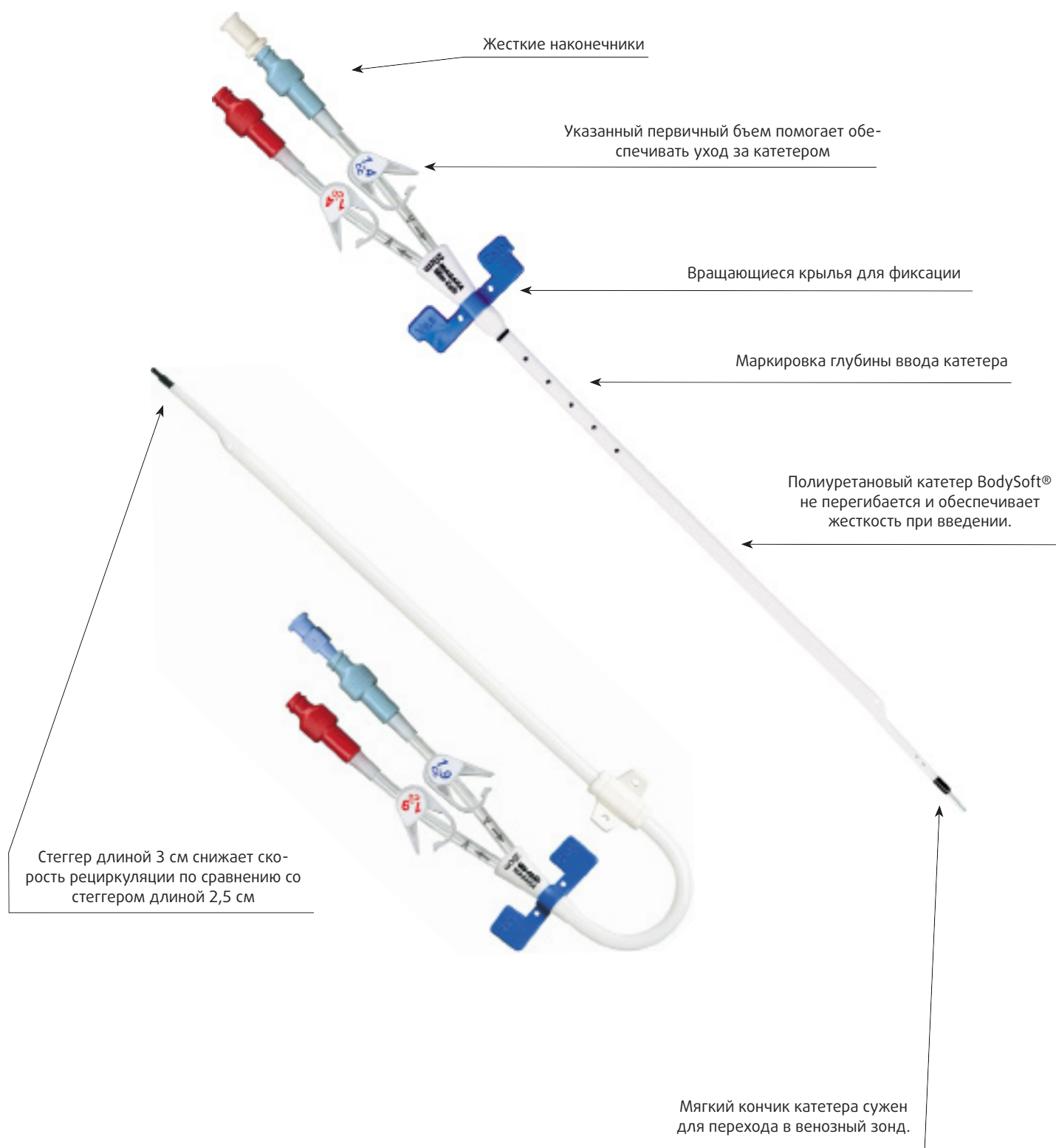

Максимальная производительность

- BodySoft* - материал из которого изготовлен катетер - гигроскопичный термочувствительный полиуретан, не перегибается и обеспечивает жесткость при введении.
- Кратковременные катетеры Niagara® и Niagara® Slim-Cath® - позволяют кровотоку двигаться со скоростью 400 мл/мин. при венозном давлении менее 250 мм рт. ст.
- Овальная форма снижает вероятность перегиба катетера.
- Маркировка глубины ввода катетера позволяет контролировать его положение в организме пациента.
- Вращающиеся крылья надежно фиксируют катетер на месте.
- Подвижный и мягкий кончик катетера, длиной 3 см, снижает рециркуляцию крови и облегчает расположение катетера в венозном русле.


Niagara™

№ по каталогу	Диаметр (Fr)	Конфигурация	Имплантируемая длина (см)
5593150	13,5	прямой	15,0
5593200	13,5	прямой	20,0
5593240	13,5	прямой	24,0
5594120	13,5	изогнутый	12,5
5594150	13,5	изогнутый	15,0
5594200	13,5	изогнутый	20,0

Niagara™
Slim-Cath™


№ по каталогу	Диаметр (Fr)	Конфигурация	Имплантируемая длина (см)
5554120	12	изогнутый	12,5
5554150	12	изогнутый	15
5554200	12	изогнутый	20
5553150	12	прямой	15
5553200	12	прямой	20
5553240	12	прямой	24

Кратковременный катетер Power-Trialysis®

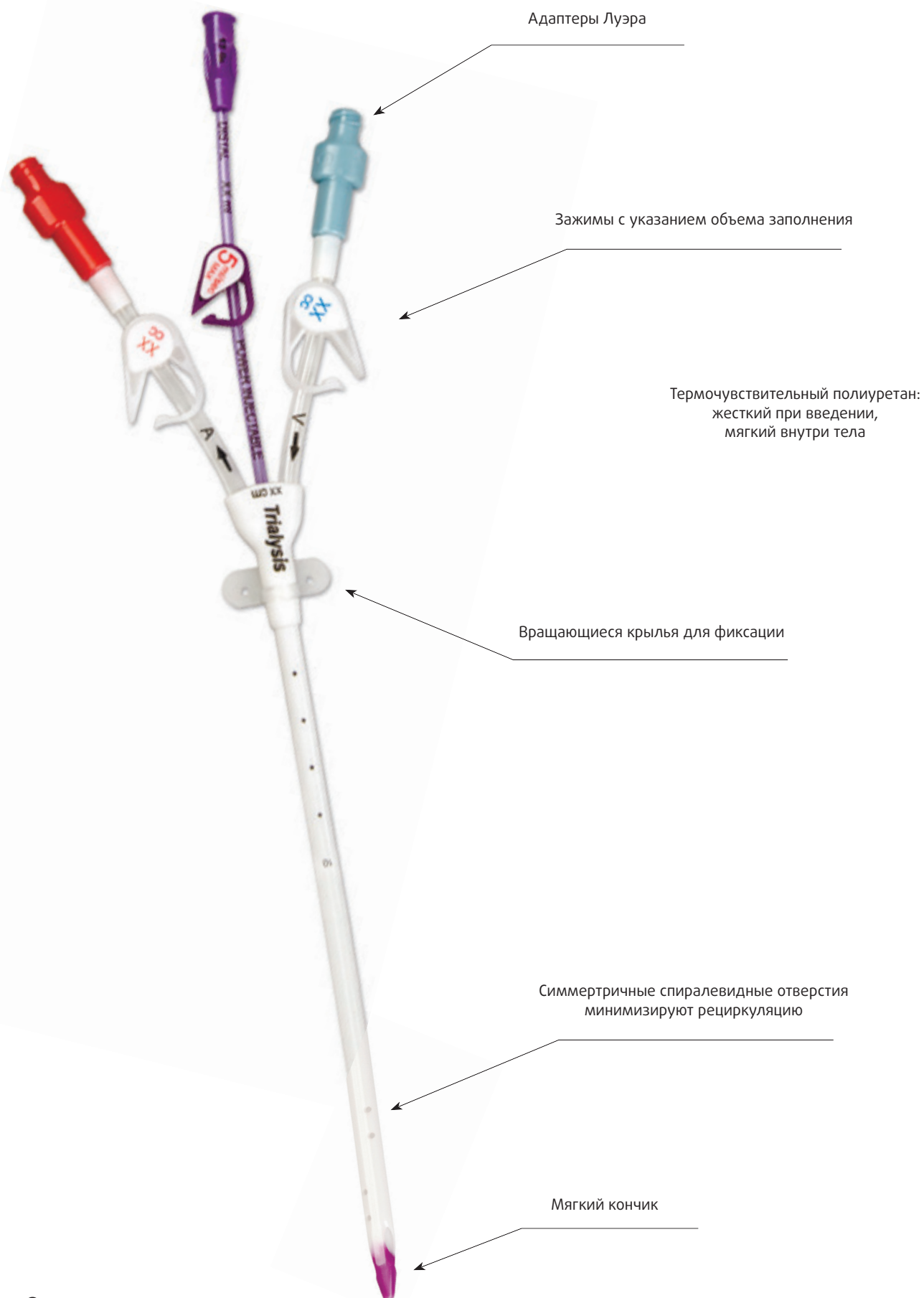

Преимущества

- ▶ Кровоток 400 мл/мин при давлении менее 250 мм рт.ст.
- ▶ Овальная форма стержня катетера снижает вероятность перегиба
- ▶ Рециркуляция менее 1%

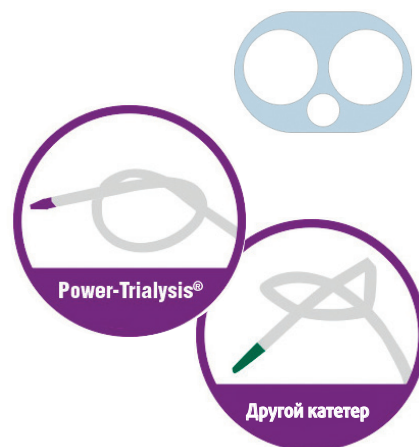

- ▶ Третий просвет диаметром 17G
 - ярко фиолетовый для отличия от диализных просветов
 - для инфузий до 5 мл/сек
 - для комфорта пациентов уменьшение уколов иглой
- ▶ Катетер длиной 30 см для феморального доступа
- ▶ Прямая и изогнутая конфигурации

Power-Trialsys
SHORT-TERM DIALYSIS CATHETER

№ по каталогу	Диаметр (Fr)	Конфигурация	Имплантируемая длина (см)
5608150	13	прямой	15
5608200	13	прямой	20
5608240	13	прямой	24
5608300	13	прямой	30
5618120	13	изогнутый	12.5
5618150	13	изогнутый	15
5618200	13	изогнутый	20
5618240	13	изогнутый	24