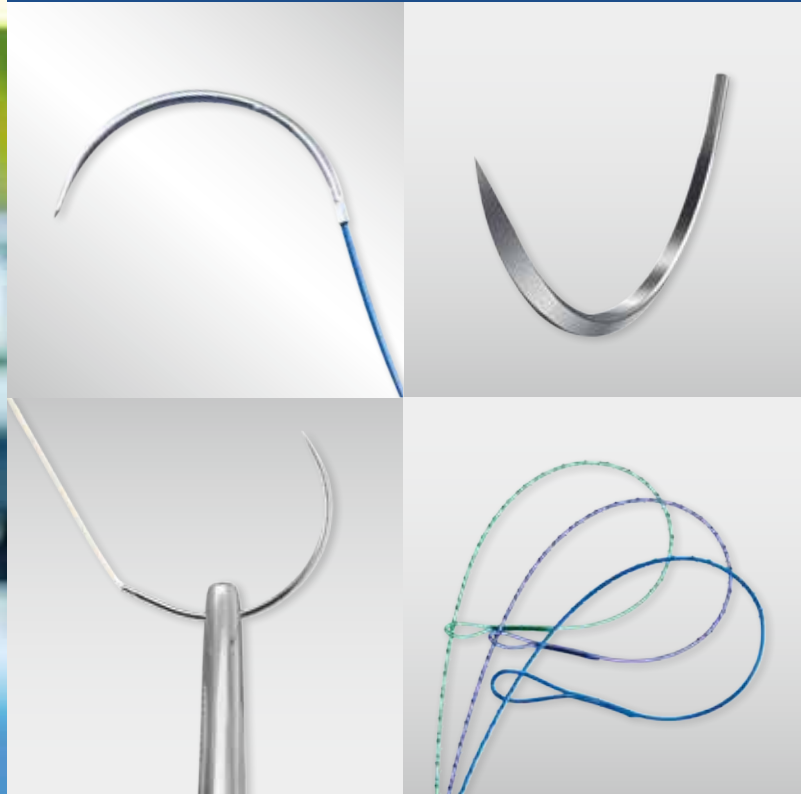




РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОПЕРАЦИОННОЙ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ
ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ

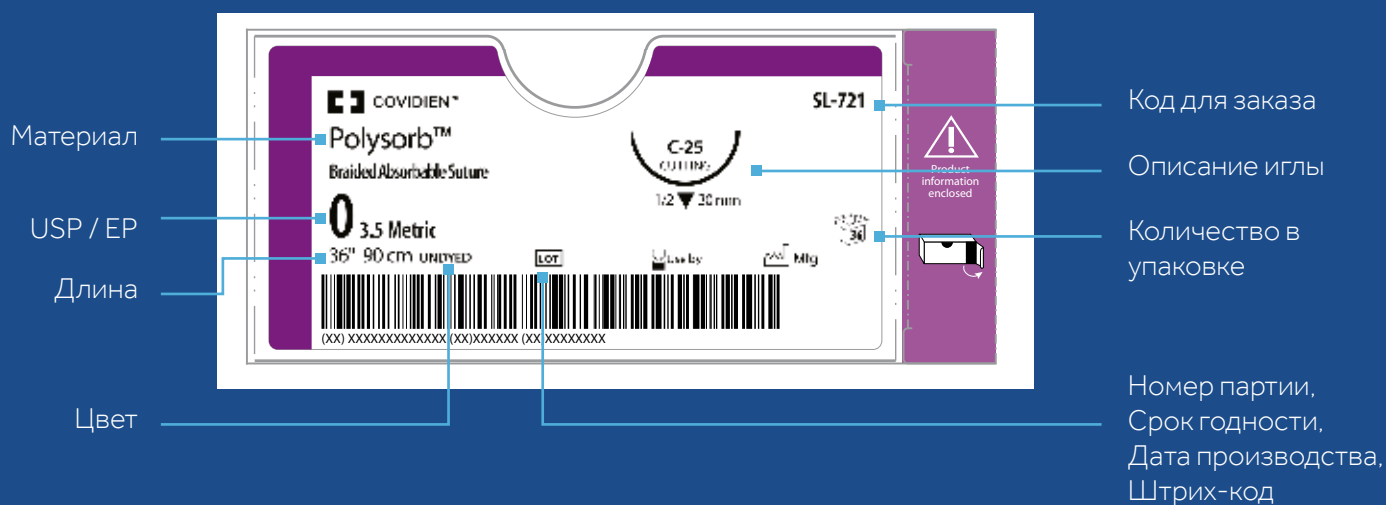
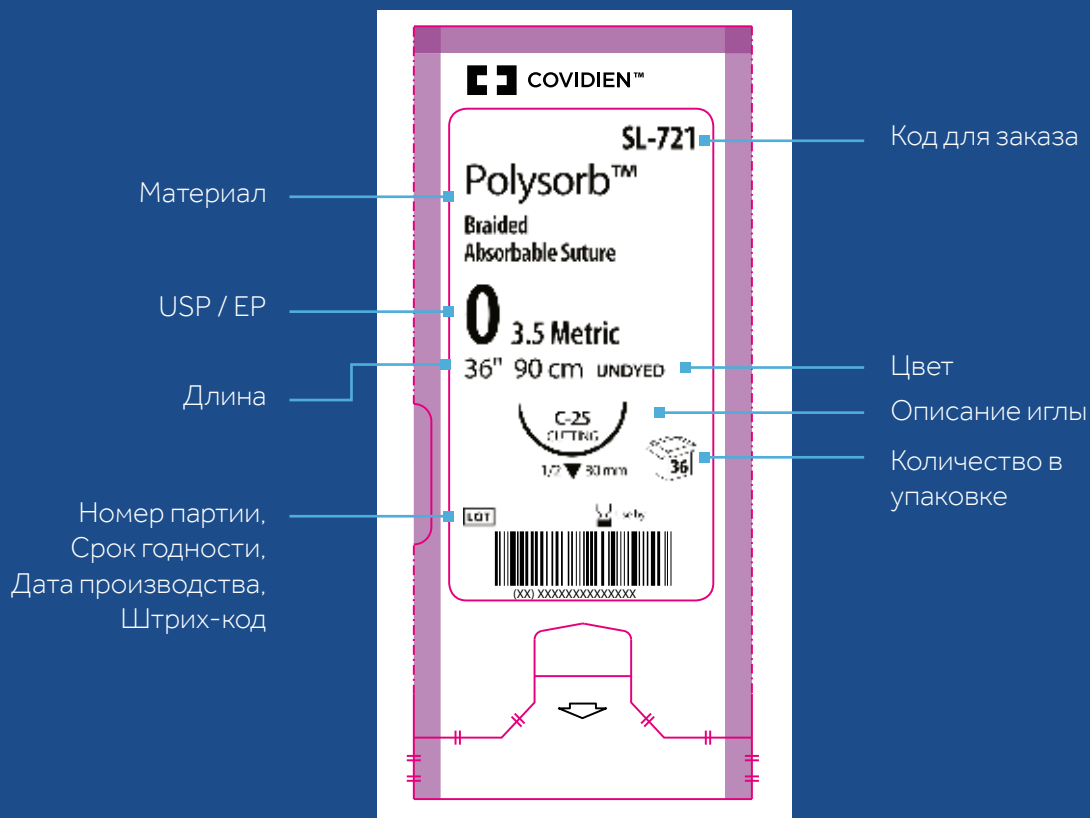


ШОВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ


















Каталог продукции 2018/2019

Medtronic
Further. Together

МАРКИРОВКА И ЦВЕТ УПАКОВКИ



СОДЕРЖАНИЕ

	Velosorb™ Fast	4
	Polysorb™	12
	Caprosyn™	28
	Biosyn™	34
	Maxon™	42
	Surgipro™ и Surgipro™ II.....	52
	Ti-Cron™ и Surgidac™	64
	Vascufil™	78
	Flexon™	82
	Steel™	86
	Monosof™ /Dermalon™	90
	Novafil™	98
	Surgilon™	104
	Sofsilk™	110
	V-Loc™ 90	116
	V-Loc™ 180.....	120
	V-Loc™ PBT	124

VELOSORB™ FAST

Плетёный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал

Поддерживает, когда это вам необходимо.

Рассасывается, когда больше вам не нужен.



Шовный материал Velosorb™ Fast предназначен для соединения мягких тканей: кожи, слизистых оболочек и конъюнктивы, когда срок поддержки достаточен в течение 7-10 дней.

Описание материала	Рассасывающийся плетёный шовный материал Velosorb™ Fast изготовлен из композиции рассасывающихся полиэфиров: гликолида и лактида (полученных из гликолевой и молочной кислот). Шовный материал Velosorb™ Fast покрыт смесью сополимеров гликолида, лактида и стеарата кальция.
Показания	Шовный материал Velosorb™ Fast предназначен для соединения мягких тканей: кожи, слизистых оболочек и конъюнктивы, когда срок поддержки достаточен в течение 7-10 дней. Он не может быть использован для лигирования сердечно-сосудистой и нервной хирургической ткани.
Применение	Рассасывающийся шовный материал Velosorb™ Fast вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, которая обусловлена поэтапной инкапсуляцией материала соединительной и фиброзной тканью. Прогрессивная потеря прочности и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза, когда сополимер гликолида и лактида распадается на гликолевую и молочные кислоты, которые метаболизируются в организме.
Срок поддержки раны	Исследования показывают, что через 5 дней после имплантации остаточная прочность составляет не менее 45% от изначальной. Полная потеря прочности наступает на 14 день.
Стерилизация	Гамма излучение.
Рассасывание	Рассасывание начинается как потеря прочности без потери массы. Полное рассасывание шовного материала Velosorb™ Fast завершается между 40 и 50 днем после имплантации.
Упаковка	Шовный материал Velosorb™ Fast выпускается размерами от от 1 USP (4 EP) до 6-0 USP (0.7 EP), в неокрашенном виде с перманентно соединенными иглами, а также в лигатурах.

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

Быстрорассасывающийся шовный материал предназначен для соединения мягких тканей: кожи и слизистых оболочек, когда срок поддержки достаточен в течение 7-10 дней.

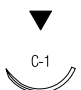

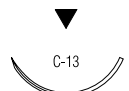
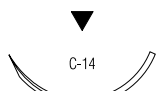
ЛИГАТУРЫ / PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	4-0	1.5	6x45	Неокрашенный	36		CV-8977
	3-0	2	6x45	Неокрашенный	36		CV-8978
	3-0	2	3x45	Неокрашенный	36		CV-8644
	2-0	3	6x45	Неокрашенный	36		CV-8979
	0	3.5	6x45	Неокрашенный	36		CV-8980

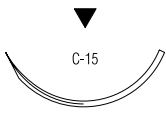
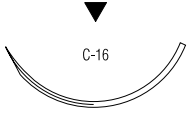
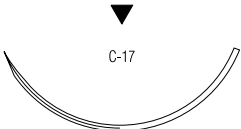
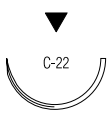
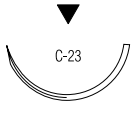
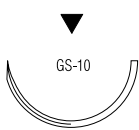
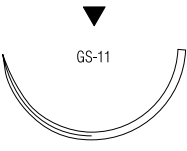
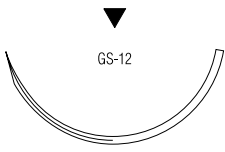
ОТРЕЗКИ СТАНДАРТНОЙ ДЛИНЫ / STANDART LENGTH

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	2-0	3	150	Неокрашенный	12		CV-9007G







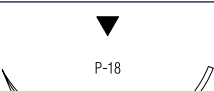
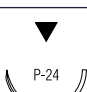
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 12 мм 	5-0	1	75	Неокрашенный	36		SV-2289
3/8 круга 16 мм 	5-0	1	75	Неокрашенный	36		SV-2296
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SV-2294
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SV-2297
	3-0	2	45	Неокрашенный	36		SV-2930
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SV-2298
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		SV-2299
3/8 круга 24 мм 	3-0	2	45	Неокрашенный	36		SV-4431
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SV-2252
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		SV-2253



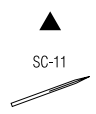
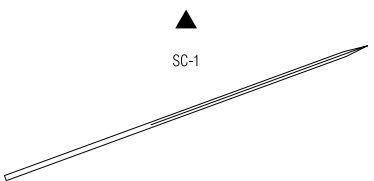
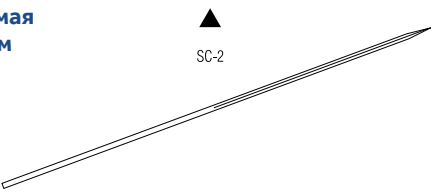
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 26 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	12	SV-9940G
	2-0	3	75	Неокрашенный	12	SV-9941G
3/8 круга 30 мм 	2-0	3	90	Неокрашенный	36	SV-2286
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	SV-2287
3/8 круга 39 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	12	SV-9961G
1/2 круга 18 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SV-4550
1/2 круга 24 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SV-9926
	3-0	2	45	Неокрашенный	36	SV-9927
	2-0	3	45	Неокрашенный	36	SV-9928
1/2 круга 26 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	12	CV-9936G
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	135	Неокрашенный	12	CV-931G
	2-0	3	90	Неокрашенный	36	CV-4721
	2-0	3	135	Неокрашенный	12	CV-932G
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CV-4731
1/2 круга 40 мм 	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CV-485
	1	4	90	Неокрашенный	36	CV-486

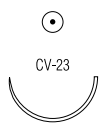
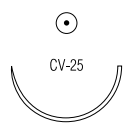
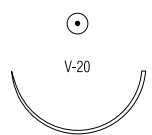
ПРЕМИУМ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / PREMIUM REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 11 мм		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36		SV-9913
		6-0	0.7	75	Неокрашенный	36		SV-4893
		5-0	1	45	Неокрашенный	36		SV-9915
3/8 круга 13 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	36		SV-493
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36		SV-494
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SVP-494
3/8 круга 16 мм		5-0	1	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SVP-2296
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SVP-2294
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SVP-2295
3/8 круга 19 мм		3-0	2	75	Неокрашенный	36		SV-425
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12		SV-496G
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SV-426
		3-0	2	45	Неокрашенный	12		SV-497G
		2-0	3	75	Неокрашенный	36		SV-424
3/8 круга 24 мм		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SVP-2251
		3-0	2	45	Неокрашенный	36		SV-6830
		3-0	2	75	Неокрашенный	36		SV-935
		2-0	3	45	Неокрашенный	36		SV-6840
		2-0	3	75	Неокрашенный	36		SV-439
3/8 круга 30 мм		3-0	2	90	Неокрашенный	36		SVP-2285
3/8 круга 39 мм		3-0	2	75	Неокрашенный	12		SV-9937G
		2-0	3	75	Неокрашенный	12		SV-9938G
1/2 круга 16 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	12		SV-9910G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12		SV-9911G

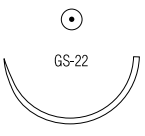
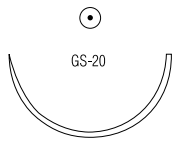
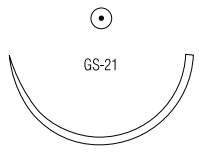
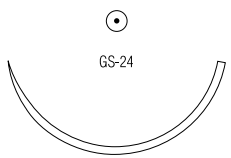
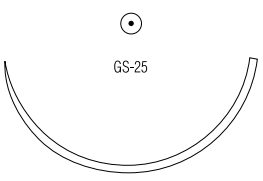
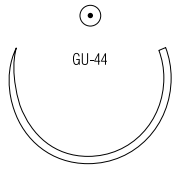
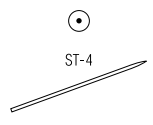
РЕЖУЩАЯ / CONVENTIONAL CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 16 мм		5-0	1	75	Неокрашенный	12	SV-834G
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	12	SV-835G
3/8 круга 16 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	12	SV-844G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SV-845G
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	12	SV-488G
		3-0	2	75	Неокрашенный	12	SV-487G
Прямая 11 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SV-9909G
Прямая 51 мм		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SV-2238
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	SV-2239
		2-0	3	75	Неокрашенный	36	SV-2240
Прямая 60 мм		3-0	2	75	Неокрашенный	36	SV-9943
		2-0	3	75	Неокрашенный	12	SV-9944G


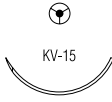
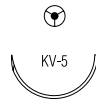
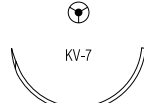


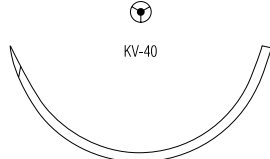
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 17 мм		5-0	1	75	Неокрашенный	36	CV-1213
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	CV-1214
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	CV-1215
1/2 круга 22 мм		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Optivis™ CV-3100
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Optivis™ CV-3110
		2-0	3	75	Неокрашенный	36	CV-3120
1/2 круга 26 мм		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	CV-415
		3-0	2	75	Неокрашенный	12	CV-416G
		2-0	3	75	Неокрашенный	12	CV-417G
		0	3.5	75	Неокрашенный	36	CV-418


КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 27 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CV-55
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CV-56
	1	4	75	Неокрашенный	36		CV-57
1/2 круга 34 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	12		CV-9975G
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36		CV-322
	3-0	2	90	Неокрашенный	36		CV-944
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CV-323
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CV-945
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CV-1324
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CV-946
	1	4	90	Неокрашенный	36		CV-947
1/2 круга 40 мм 	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CV-9592
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CV-9591
	1	4	90	Неокрашенный	36		CV-9590
1/2 круга 48 мм 	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CV-606
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CV-604
	1	4	90	Неокрашенный	36		CV-605
5/8 круга 40 мм 	1	4	90	Неокрашенный	36		UV-1382
Прямая 19 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		CV-1673

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 13 мм 	5-0	1	75	Неокрашенный	36	CV-2293
3/8 круга 17 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	CV-2275G
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	CV-2279
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	CV-2280
1/2 круга 17 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	12	CV-1674G
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	12	CV-2003G
	2-0	3	90	Неокрашенный	36	CV-1002
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	90	Неокрашенный	36	CV-916
	2-0	3	90	Неокрашенный	36	CV-917
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CV-919
	1	4	90	Неокрашенный	36	CV-918
1/2 круга 40 мм 	2-0	3	90	Неокрашенный	36	CV-2218
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CV-2217
	1	4	90	Неокрашенный	36	CV-2216
1/2 круга 40 мм - KV-37 3/8 круга 24 мм - C-14	2-0	3	1x75	Неокрашенный	24	1 нить C-14 в наборе 2 нити KV-37 в наборе
	0	3.5	2x90			
1/2 круга 48 мм 	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CV-7191
	1	4	90	Неокрашенный	36	CV-7190

ШПАТЕЛЬ/ SPATULA

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 6.3 мм 	8-0	0.4	30	Фиолетовый	12	CV-501G
	7-0	0.5	30	Фиолетовый	12	CV-500G

POLYSORB™

Плетёный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал

Максимальная поддержка во время критического периода заживления раны.



Прочность материала Polysorb™, обусловленная большим количеством более тонких моноволокон в составе нити, обеспечивает надежную поддержку раны на протяжении всего критического периода заживления раны.

Описание материала	Покрытый, плетеный синтетический рассасывающийся шовный материал Polysorb™ состоит из Lactomer™ 9-1 кополимера гликолид/лактида, который представляет собой синтетический полиэфир, состоящий из гликолида и лактида, полученного из гликолиевой и молочной кислоты. Шовный материал Polysorb™ при изготовлении покрывается составом из кополимера капролактона, гликолида и стеаройл лактилата кальция.
Показания	Шовный материал Polysorb™ предназначен для сшивания или для лигирования тканей в общей, торакальной хирургии, урологии и гинекологии, офтальмохирургии. Однако применение в сердечно-сосудистой хирургии и на нервных тканях ограничено.
Применение	Синтетический рассасывающийся шовный материал Polysorb™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Polysorb™ происходит путем гидролиза, когда Lactomer™9-1 распадается на гликолиевую и молочную кислоту, которые впоследствии метаболизируются в организме и выводятся почками.
Срок поддержки раны	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Polysorb™ определили, что его первоначальная прочность в узле оценивается как 140% стандарта USP и EP. Около 80% прочности сохраняется в первые 2 недели и более 30% сохраняется по истечению 3 недель после имплантации шовного материала.
Стерилизация	Окись этилена.
Рассасывание	Процесс рассасывания начинается как потеря прочности без потери массы и заканчивается между 56 и 70 днями.
Упаковка	Шовный материал Polysorb™ производится в бесцветном варианте или окрашенном в фиолетовый цвет. Возможные варианты размеров от 2 USP (5 EP) до 8-0 USP (0.4 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, как перманентно зафиксированных, так и отсоединяемых. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

Polysorb™ - шовный материал, которому вы доверяете более 20 лет, имеющий свою историю усовершенствования качества.

ЛИГАТУРЫ / PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	4-0	1.5	12x45	Фиолетовый	24		L-11
	3-0	2	12x45	Фиолетовый	24		L-12
	3-0	2	6x75	Фиолетовый	24		L-38
	2-0	3	12x45	Неокрашенный	24		L-3
	2-0	3	12x45	Фиолетовый	24		L-13
	2-0	3	3x45	Фиолетовый	36		L-73
	2-0	3	6x45	Фиолетовый	24		L-23
	2-0	3	12x60	Фиолетовый	24		L-33
	2-0	3	3x75	Фиолетовый	24		L-403
	2-0	3	6x75	Фиолетовый	24		L-39
	0	3.5	12x45	Фиолетовый	24		L-27
	0	3.5	6x45	Фиолетовый	24		L-14
	0	3.5	3x75	Фиолетовый	24		L-404
	0	3.5	6x75	Фиолетовый	24		L-40
	1	4	6x45	Фиолетовый	24		L-15
	1	4	12x60	Фиолетовый	24		L-36
	1	4	3x75	Фиолетовый	24		L-405
	1	4	6x75	Фиолетовый	24		L-41
	2	5	12x45	Неокрашенный	24		L-26
	2	5	12x45	Фиолетовый	24		L-28
	2	5	3x45	Фиолетовый	36		L-76
	2	5	6x75	Фиолетовый	24		L-42

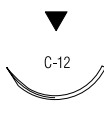
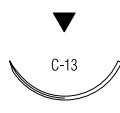
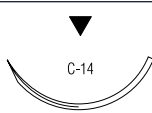
ОТРЕЗКИ СТАНДАРТНОЙ ДЛИНЫ / STANDARD LENGTH

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
Отрезки стандартной длины	4-0	1.5	150	Фиолетовый	36		L-111
	3-0	2	150	Фиолетовый	36		L-112
	2-0	3	150	Фиолетовый	36		L-113
	0	3.5	150	Фиолетовый	36		L-114
	1	4	150	Фиолетовый	36		L-115
	2	5	150	Фиолетовый	36		L-116

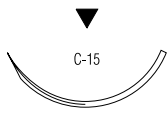
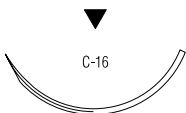
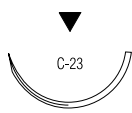
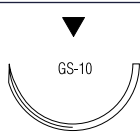
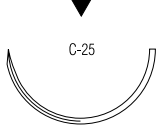
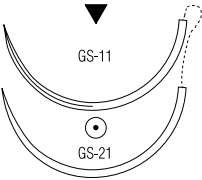

КАТУШКИ / REEL

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
Катушки	4-0	1.5	150	Неокрашенный	24		LL-101
	4-0	1.5	250	Фиолетовый	24		LL-221
	3-0	2	150	Фиолетовый	24		LL-112
	3-0	2	250	Неокрашенный	24		LL-322
	3-0	2	250	Фиолетовый	24		LL-222
	2-0	3	150	Фиолетовый	24		LL-113
	2-0	3	250	Фиолетовый	24		LL-223
	0	3.5	150	Фиолетовый	24		LL-114
	0	3.5	250	Фиолетовый	24		LL-224
	1	4	150	Фиолетовый	24		LL-115
	1	4	250	Фиолетовый	24		LL-225
	2	5	150	Фиолетовый	24		LL-116
	2	5	250	Фиолетовый	24		LL-226

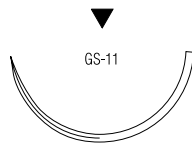
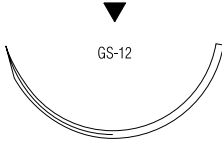
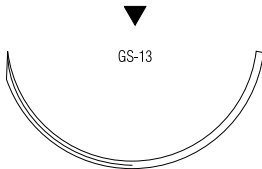
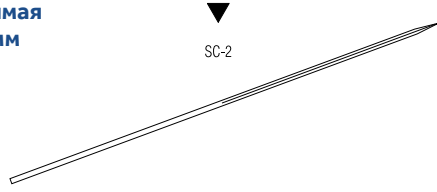
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 16 мм 	5-0	1	75	Фиолетовый	36		SL-630
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		SL-607
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		SL-608
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	75	Неокрашенный	36		SL-690
	5-0	1	75	Фиолетовый	36		SL-634
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SL-691
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		SL-635
	3-0	2	45	Неокрашенный	36		SL-637
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SL-822
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		SL-636
3/8 круга 24 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SL-692
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SL-693
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		SL-694
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		SL-823
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-823





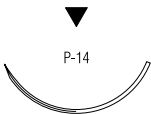
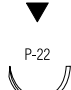
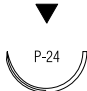
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 26 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SL-586
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	SL-587
3/8 круга 30 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SL-696
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SL-611
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	SL-712
1/2 круга 24 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SL-613
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SL-632
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SL-612
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	CL-868
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	CL-869
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-769
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	CL-870
	1	4	75	Неокрашенный	36	CL-867
1/2 круга 30 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	SL-622
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	SL-721
	1	4	90	Фиолетовый	36	SL-722
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	150	Фиолетовый	36	CL-992
1/2 круга 37 мм 	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-528

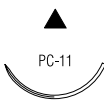
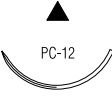
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
	USP	Метрик						
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-815	
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CL-543	
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-816	
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		CL-916	
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CL-544	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-817	
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CL-534	
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-917	
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-818	
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-918	
	2	5	90	Неокрашенный	36		CL-533	
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-919	
	1/2 круга 40 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-833
		0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-804
0		3.5	90	Фиолетовый	36		CL-933	
1		4	75	Фиолетовый	36		CL-805	
1		4	90	Фиолетовый	36		CL-936	
2		5	90	Фиолетовый	36		CL-937	
1/2 круга 48 мм 		0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-568
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-927	
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-569	
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-928	
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-929	
	Прямая 60 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SL-643
3-0		2	75	Фиолетовый	36		SL-653	
2-0		3	75	Неокрашенный	36		SL-642	



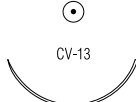
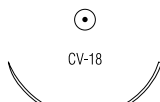
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 11 мм		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-1625
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-1689
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5688
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5687
		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SL-5687G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5690
3/8 круга 16 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5626
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5686
3/8 круга 19 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5636
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5627
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5637
		3-0	2	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5628
		3-0	2	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SL-5628G
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5638
3/8 круга 24 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5641
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5678
		3-0	2	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5640
		3-0	2	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SL-5640G
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5679
		2-0	3	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5680
1/2 круга 13 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-1615
1/2 круга 16 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5633



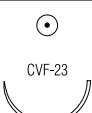
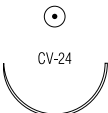
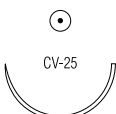
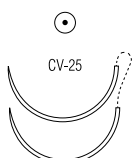

КОСМЕТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ / COSMETIC CONVENTIONAL CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 16 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36		SL-1657
3/8 круга 19 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36		SL-1653

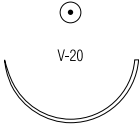
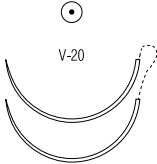
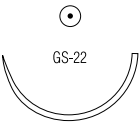

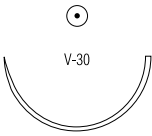
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	75	Фиолетовый	36		GL-889
		5-0	1	75	Фиолетовый	36		GL-890
3/8 круга 17 мм		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		GL-881
3/8 круга 22 мм		3-0	2	75	Фиолетовый	36		GL-303
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		GL-302
3/8 круга 26 мм		2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-457
3/8 круга 32 мм		3-0	2	75	Фиолетовый	36		GL-522
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		GL-523
		0	3.5	75	Фиолетовый	36		GL-524

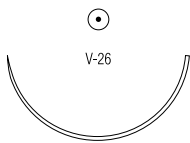
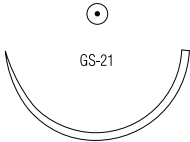

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 12 мм		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UL-101
		6-0	0.7	45	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UL-102
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-432
1/2 круга 13 мм		5-0	1	75	Неокрашенный	36		GL-885
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		GL-884
1/2 круга 17 мм		6-0	0.7	75	Фиолетовый	36		UL-201
		5-0	1	75	Фиолетовый	36		UL-202
		3-0	2	75	Неокрашенный	36		UL-215
		3-0	2	75	Фиолетовый	36		UL-204
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		UL-205
1/2 круга 17 мм		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UL-214
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UL-203
1/2 круга 20 мм		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		CL-460
		3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-461
1/2 круга 22 мм		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		GL-191
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		GL-181
		3-0	2	75	Неокрашенный	36		GL-192
		3-0	2	75	Фиолетовый	36		GL-182
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		GL-183
1/2 круга 22 мм		3-0	2	90	Фиолетовый	36		GL-282
1/2 круга 22 мм		3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-892
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-893
		0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-894

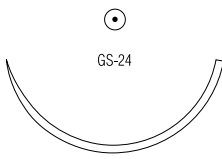


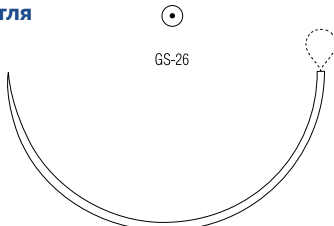
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 26 мм 	5-0	1	75	Фиолетовый	36		GL-120
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		GL-321
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GLS-121
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		GL-121
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		GL-322
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GLS-122
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		GL-122
	3-0	2	90	Фиолетовый	36		GL-226
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GLS-323
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		GL-323
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GLS-123
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		GL-123
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		GL-125
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		GL-124
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	90	Фиолетовый	36		GL-332
1/2 круга 27 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-882
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	CL-883
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-330
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-885
	2	5	75	Фиолетовый	36		CL-232
1/2 круга 27 мм 	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-871
1/2 круга 30 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		GL-222
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		GL-223
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		GL-224
	1	4	75	Фиолетовый	36		GL-225

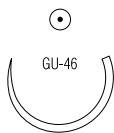
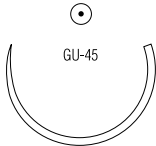
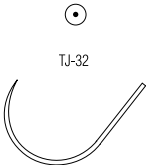
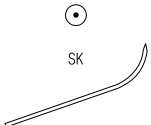
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		GL-126
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		GL-127
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		GL-128
	1	4	75	Фиолетовый	36		GL-129
1/2 круга 37 мм 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		CL-809
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		CL-842
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-810
	3-0	2	90	Фиолетовый	36		CL-922
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-811
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CL-953
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		CL-923
	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-10-MG
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CL-844
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-812
	0	3.5	5x75	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-5-M
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CL-954
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-924
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-11-MG
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-813
	1	4	5x75	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-6-M
	1	4	90	Неокрашенный	36		CL-955
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-925
	2	5	75	Фиолетовый	36		CL-814
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-926
1/2 круга 37 мм 	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-931
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-971
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-201-M
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-932
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-239

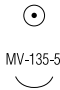
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 40 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-801
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		CL-913
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-802
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CL-964
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-914
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-21-MG
	1	4	75	Неокрашенный	36		CL-855
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-803
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-915
	2	5	5x60	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-622-M
	2	5	75	Фиолетовый	36		CL-779
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-911
	1/2 круга 48 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	
2-0		3	75	Фиолетовый	36		CL-863
2-0		3	90	Фиолетовый	36		CL-903
0		3.5	75	Фиолетовый	36		CL-864
0		3.5	90	Неокрашенный	36		CL-974
0		3.5	90	Фиолетовый	36		CL-904
1		4	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-31-MG
1		4	75	Фиолетовый	36		CL-865
1		4	5x75	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-64-M
1		4	90	Фиолетовый	36		CL-905
2		5	5x45	Фиолетовый	6	D-Tach™	CL-633-M
2		5	75	Фиолетовый	36		CL-866
2		5	5x75	Фиолетовый	6	D-Tach™	CL-665-M
2		5	90	Фиолетовый	36		CL-906
1/2 круга 65 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	24		CL-63
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-968
	1	4	150	Фиолетовый	24		CL-824
	2	5	150	Фиолетовый	24		CL-825
1/2 круга, петля 65 мм 	1	4	120	Фиолетовый	24	Петля	CL-824-L
	2	5	240	Фиолетовый	24	Петля	CL-835-L


КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
5/8 круга 27 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	UL-879
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	UL-878
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	UL-877
	1	4	75	Фиолетовый	36	UL-876
5/8 круга 37 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	UL-245
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	UL-246
J-Игла 32 мм 	1	4	75	Фиолетовый	12	CL-673-G
Лыжа 23 мм 	3-0	2	18	Фиолетовый	36	Эндоскопия EL-415
	3-0	2	120	Фиолетовый	24	Эндоскопия EL-450

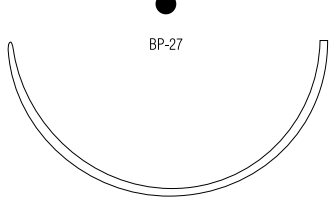
МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОЛЮЩАЯ / MICROSURGERY TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 6 мм 	8-0	0.4	13	Фиолетовый	12	Surgalloy™ L-2800

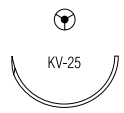
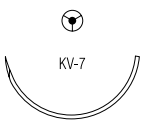
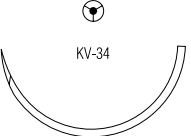
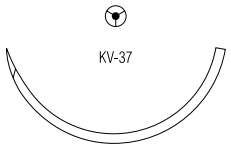
ТУПОКОНЕЧНАЯ КОЛЮЩАЯ / BLUNT TAPER

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	5x45	Неокрашенный	12	Protect-Point™ - D-Tach™	GLT-69-MG
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	90	Неокрашенный	36	Protect-Point™	CLT-952
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	Protect-Point™	CLT-259
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	Protect-Point™	CLT-954
1/2 круга 37 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-957
1/2 круга 40 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-950
	1	4	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-951
1/2 круга 48 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-948
	1	4	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-949
1/2 круга 65 мм 	2	5	2x90	Фиолетовый	24	Protect-Point™	2-CL-852

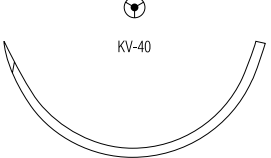
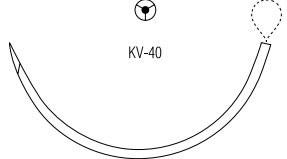
ТУПОКОНЕЧНАЯ / BLUNT POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 64 мм 	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-271
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-270



КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 22 мм 	1	4	75	Неокрашенный	36	CL-513
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™ CL-510
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™ CL-511
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	90	Фиолетовый	36	CL-942
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-837
	2-0	3	90	Неокрашенный	36	CL-946
	2-0	3	90	Фиолетовый	36	CL-943
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-838
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-944
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-839
	1	4	90	Неокрашенный	36	CL-516
	1	4	90	Фиолетовый	36	CL-945
	2	5	90	Фиолетовый	36	CL-517
	1/2 круга 40 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36
0		3.5	75	Фиолетовый	36	CL-602



КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 48 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-739
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-840
	2	5	75	Фиолетовый	36	CL-841
	2	5	90	Фиолетовый	36	CL-941
1/2 круга, петля 48 мм 	1	4	150	Фиолетовый	24	Петля CL-740-L
	2	5	150	Фиолетовый	24	Петля CL-741-L

ШПАТЕЛЬ / SPATULA

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
1/4 круга 8 мм  Кривизна 90°	6-0	0.7	30	Фиолетовый	12	Surgalloy™	L-1742K
	6-0	0.7	30	Неокрашенный	12	Surgalloy™	L-1745K
	6-0	0.7	45	Неокрашенный	24	Surgalloy™	L-2752K
	5-0	1	30	Фиолетовый	12	Surgalloy™	L-1785K
1/4 круга 8,6 мм  Кривизна 115°	5-0	1	45	Неокрашенный	12		L-1669-K
	5-0	1	45	Фиолетовый	12		L-1792-K

ПРЕМИУМ ШПАТЕЛЬ / PREMIUM SPATULA

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
3/8 круга 6 мм  Кривизна 140°	8-0	0.4	30	Фиолетовый	12	Surgalloy™	L-2748-K
1/2 круга 5,5 мм  Кривизна 160°	7-0	0.5	45	Фиолетовый	12	Surgalloy™	L-1787-K

МНОГОЦЕЛЕВАЯ / MULTIPURPOSE

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
1/2 круга 30 мм  4.31	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-030
	1/2 круга 40 мм  4.41	0	3.5	75	Фиолетовый	36	
1/2 круга 50 мм  4.50		1	4	75	Фиолетовый	36	
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-055

CAPROSYN™

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал

Поддерживает, когда это вам необходимо.
Рассасывается, когда больше вам не нужен.



Быстрое рассасывание, что
уменьшает возможные осложнения
раны.

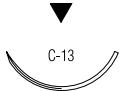

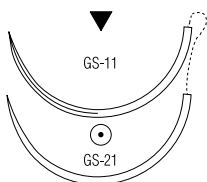
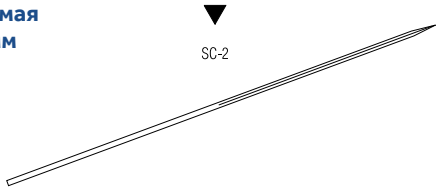
Описание материала	Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ изготавливается из синтетического полиэфира POLYGLYTONE™ 6211, который состоит из гликолида, капролактона, триметилен карбоната и лактида.
Показания	Синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования в общей, пластической и косметической хирургии, урологии и гинекологии. Применение в сердечно-сосудистой хирургии и на нейрохирургии, микрохирургии и офтальмологии не рекомендуется.
Применение	Синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ вызывает минимальную острую воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Caprosyn™ происходит путем гидролиза.
Срок поддержки раны	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Caprosyn™ определили, что минимум 50 - 60% прочности узла по USP и EP сохраняется в первые 5 дней и около 20 - 30% сохраняется по истечении 10 дней после имплантации шовного материала. Полная потеря прочности происходит к 21 дню после имплантации.
Стерилизация	Окись этилена.
Рассасывание	Процесс рассасывания начинается, как потеря прочности без потери массы и заканчивается к 56 дню.
Упаковка	Шовный материал CAPROSYN™ производится в бесцветном варианте или окрашенными в фиолетовый D&C цвет № 2. Возможные варианты размеров от 1 USP (4 UP) до 6-0 (0.7 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт. Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

Caprosyn™ - шовный материал, которому вы доверяете более 10 лет, имеющий доказанную временем эффективность.




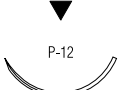

КАТУШКИ / REEL

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	0	3.5	150	Неокрашенный	36		C-214


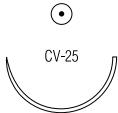
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SC-690G
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SC-691
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SC-692
3/8 круга 26 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SC-587
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SC-586
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36	CC-543
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	150	Неокрашенный	36	CC-983
Прямая 60 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SC-644
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SC-643

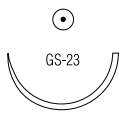
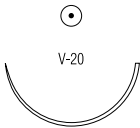
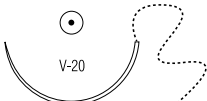
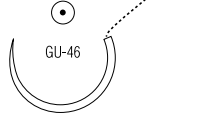
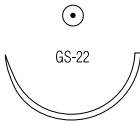
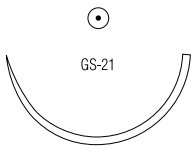
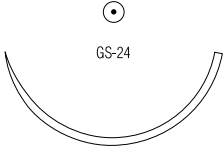
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 11 мм		6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-3625G
		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-3626G
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5688G
		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5689G
		5-0	1	45	Фиолетовый	12	Surgalloy™	SC-5587G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5690G
		4-0	1.5	45	Фиолетовый	12	Surgalloy™	SC-5590G
3/8 круга 16 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5626G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5686G
3/8 круга 19 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5616G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5617G
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5637G
		3-0	2	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5618G
		3-0	2	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5638G
3/8 круга 24 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SC-5679
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SC-5779
		3-0	2	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5780G

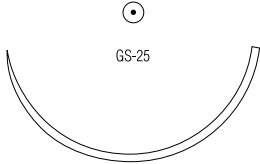
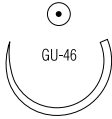
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 17 мм		5-0	1	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-202
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-203
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-204
1/2 круга 22 мм		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-403
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-404

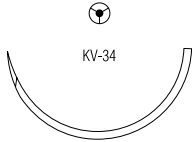
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 22 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		UC-863
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GC-121
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GC-321
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GC-122
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GC-322
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GC-123
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GC-323
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		GC-124
1/2 круга 26 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CC-658
5/8 круга 27 мм 							
1/2 круга 27 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CC-883
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CC-830
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CC-884
	1	4	75	Неокрашенный	36		CC-885
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36		CC-810
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CC-811
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CC-923
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CC-812
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CC-844
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CC-924
	1	4	75	Неокрашенный	36		CC-813
	1	4	75	Фиолетовый	36		CC-845
	1	4	90	Неокрашенный	36		CC-925
1/2 круга 40 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CC-801
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CC-915
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CC-802
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CC-913
	1	4	75	Неокрашенный	36		CC-803
	1	4	90	Неокрашенный	36		CC-914




КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 48 мм 	0	3.5	90	Неокрашенный	36	СС-904
	1	4	90	Неокрашенный	36	СС-905
5/8 круга 27 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36	UC-978

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPER CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	90	Неокрашенный	12	СС-1945G

КОСМЕТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ / COSMETIC CONVENTIONAL CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 13 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	XC-834
3/8 круга 16 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	XC-844
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	XC-845
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	XC-823

BIOSYN™

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал

Прочность, мягкость и надёжность.



Прочность, мягкость и надёжность монофиламента, как у плетёного шовного материала.

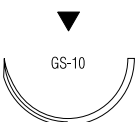
Описание материала	Синтетический рассасывающийся шовный материал Biosyn™ изготавливается из синтетического полиэфира, состоящего из гликолида, диоксанона и триметилен карбоната Glycomer™ 631. Шовный материал Biosyn™ производится в бесцветном варианте или окрашенным в Фиолетовый цвет.
Показания	Синтетический рассасывающийся шовный материал Biosyn™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования в общей, торакальной хирургии, урологии и гинекологии, офтальмохирургии. Не рекомендуется применение в сердечно-сосудистой и нейрохирургии.
Применение	Синтетический рассасывающийся шовный материал Biosyn™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Biosyn™ происходит путем гидролиза. Шовный материал распадается на гликолиевую кислоту, диаксаноновую кислоту, пропандиол и углекислый газ, которые в последствии метаболизируются в организме.
Срок поддержки раны	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Biosyn™ определили, что примерно 75% прочности узла по USP и EP сохраняется в первые 2 недели и около 40% сохраняется по истечению 3 недель после имплантации шовного материала.
Стерилизация	Окись этилена.
Рассасывание	Процесс рассасывания начинается как потеря прочности без потери массы и заканчивается между 90 и 110 днём.
Упаковка	Шовный материал BIOSYN™ производится в бесцветном варианте или окрашенным в Фиолетовый цвет. Возможные варианты размеров от 1 USP (4 EP) до 6-0 (0.7 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, в катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт. Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

Biosyn™ - шовный материал, которому вы доверяете более 15 лет, имеющий доказанную временем эффективность.

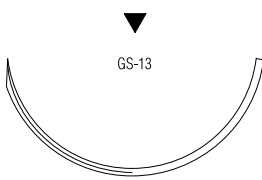
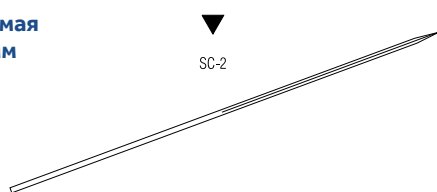
ЛИГАТУРЫ / PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	0	3.5	3x45	Фиолетовый	36		M-74
	1	4	3x45	Фиолетовый	36		M-75

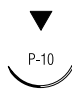
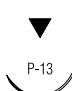
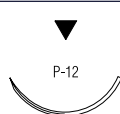

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 19 мм  C-13	5-0	1	75	Неокрашенный	36	SM-690
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SM-691
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SM-822
3/8 круга 24 мм  C-14	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SM-693
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SM-823
1/2 круга 24 мм  C-23	4-0	2	75	Фиолетовый	36	SM-633
	3-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SM-632
1/2 круга 26 мм  GS-10	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CM-879
1/2 круга 37 мм  GS-11	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CM-816
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	CM-544
1/2 круга 37 мм  HOS-11	1	4	75	Фиолетовый	36	CM-528



ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 48 мм 	1	4	90	Фиолетовый	36		CM-222
Прямая 60 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SM-643


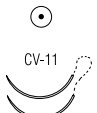
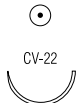
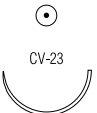
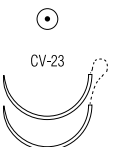
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 11 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-3625
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5688
	5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5687
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5690
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5624
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5627
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5637
	3-0	2	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5628
	3-0	2	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5638
3/8 круга 24 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	24	Surgalloy™	SM-5679
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SM-5678
	3-0	2	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5679G

КОСМЕТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ / COSMETIC CONVENTIONAL CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 16 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Dermax™	XM-845
3/8 круга 19 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Dermax™	XM-822
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Dermax™	XM-823

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 12 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SM-432
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SM-431
3/8 круга 13 мм		5-0	1	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	CM-126
1/2 круга 13 мм		6-0	0.7	x75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UM-886
		6-0	0.7	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UM-986
		5-0	1	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-875
1/2 круга 17 мм		6-0	0.7	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UM-201
		5-0	1	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UM-213
		5-0	1	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UM-202
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UM-214
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UM-203
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UM-215
		3-0	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UM-204
1/2 круга 17 мм		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UM-403
		3-0	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	CM-208

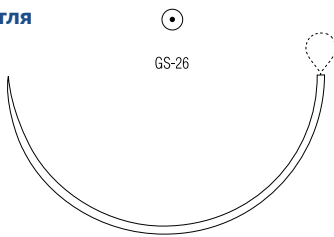
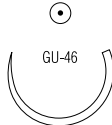
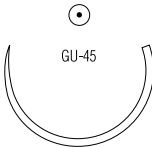
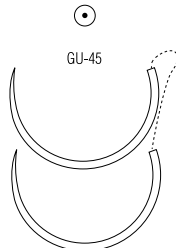
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
1/2 круга 22 мм 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-181
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-324
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-183
1/2 круга 22 мм 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-281
	4-0	1.5	90	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-291
	3-0	2	90	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-282
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-121
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GM-322
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-122
	3-0	2	5 × 75	Фиолетовый	12	D-Tach™	GM-67-M
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		GM-323
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		GM-123
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		GM-125
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-421
	4-0	1.5	90	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-432
	3-0	2	90	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-332
1/2 круга 27 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		CM-882
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CM-883
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CM-831
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CM-884
	1	4	75	Фиолетовый	36		CM-832
1/2 круга 30 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		GM-222
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		GM-223
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		GM-326
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		GM-327

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		CM-810
	3-0	2	90	Фиолетовый	36		CM-922
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CM-811
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CM-953
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		CM-923
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CM-844
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CM-812
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CM-954
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CM-924
	1	4	75	Неокрашенный	36		CM-845
	1	4	75	Фиолетовый	36		CM-813
	1	4	90	Фиолетовый	36		CM-925
	1/2 круга 40 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	
1		4	90	Фиолетовый	36		CM-966
1/2 круга, петля 40 мм 	1	4	150	Фиолетовый	12	Петля	CM-767L
1/2 круга 48 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CM-904
	1	4	90	Фиолетовый	36		CM-905
1/2 круга, петля 48 мм 	0	3.5	150	Фиолетовый	12	Петля	CM-790L
	1	4	150	Фиолетовый	12	Петля	CM-776L

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга, петля 65 мм 	1	4	240	Фиолетовый	12	Петля	CM-780L
5/8 круга 27 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		UM-879
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		UM-978
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		UM-878
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		UM-977
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		UM-877
5/8 круга 37 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		UM-345
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		UM-245
5/8 круга 37 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		UM-243

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPPERCUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга, петля 48 мм 	1	4	150	Фиолетовый	12	Нить 150 см, Петля 75 см	CM-740L

MAXON™

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал

Вся сила удержания узла.



Вся сила удержания узла,
позволяющая доверять шовному
материалу.

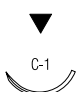
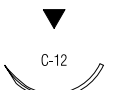

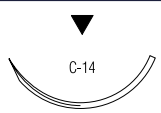
Описание материала	Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV производится из полигликоната (кополимера гликолиевой кислоты и триметилен карбоната).
Показания	Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, включая использование в детской сердечно-сосудистой хирургии и в периферической сосудистой хирургии. Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV не применяется во взрослой сердечно-сосудистой хирургии, офтальмохирургии, микрохирургии и на нервных тканях.
Применение	Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Maxon™ и Maxon™ CV происходит путем гидролиза.
Срок поддержки раны	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Maxon™ и Maxon™ CV определили, что примерно 80% прочности сохраняется после первой недели имплантации шовного материала. Приблизительно 75% прочности сохраняется в первые 2 недели, 65% прочности - в течение 3 недель, 50% прочности сохраняется по истечению 4 недель, 25% прочности остается на 6-ю неделю после имплантации шовного материала.
Стерилизация	Окись этилена.
Рассасывание	Процесс рассасывания заканчивается на 180 день.
Упаковка	<p>Стерильный шовный материал MAXON™ и MAXON™ CV производится различной длины, диаметра и с разным количеством в индивидуальной упаковке с иглами и без игл. Возможные варианты размеров от 1 USP (4 EP) до 7-0 USP (0.5 EP). Шовный материал MAXON™ и MAXON™ CV выпускается окрашенным в Зеленый D&C цвет № 6. Шовный материал MAXON™ возможен в неокрашенном виде.</p> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>

Maxon™ - шовный материал, которому вы доверяете более 25 лет, улучшенный и эффективный.

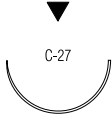
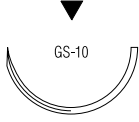
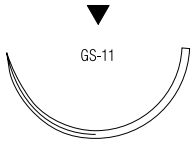
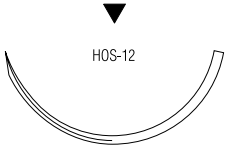
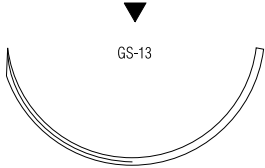
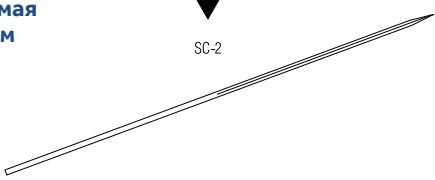
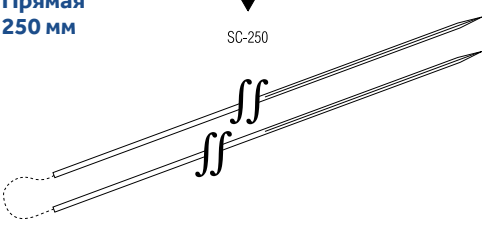
ЛИГАТУРЫ / PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	3-0	2	3x45	Зелёный	36		8886600741
	2-0	3	3x45	Зелёный	36		8886600751
	0	3.5	3x45	Зелёный	12		8886601563

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 12 мм 	5-0	1	45	Зелёный	36		8886660521
	4-0	1.5	45	Зелёный	36		8886660531
3/8 круга 16 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		8886611831
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	36		8886660821
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36		8886660831
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		8886661231
	4-0	1.5	75	Зелёный	36		8886663931
	3-0	2	45	Неокрашенный	36		8886660841
	3-0	2	75	Зелёный	36		8886663941
3/8 круга 24 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		8886661831
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		8886661841
	3-0	2	75	Зелёный	36		8886664141
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		8886661851
	2-0	3	75	Зелёный	36		8886664151

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 20 мм 	3-0	2	45	Зелёный	36		8886605941
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36		8886674441
	2-0	3	75	Зелёный	36		8886674551
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		8886674451
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	Зелёный	36		8886675551
	0	3.5	75	Зелёный	36		8886675561
	1	4	75	Зелёный	36		8886675571
1/2 круга 40 мм 	1	4	75	Зелёный	36		8886678771
1/2 круга 48 мм 	1	4	90	Зелёный	36		8886676971
Прямая 60 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		8886690831
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		8886690841
Прямая 250 мм 	2-0	3	75	Зелёный	12		8886639053

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 11 мм		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	8886653311
		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	8886653211
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	8886653221
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SMM-5516
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SMM-5526
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SMM-5536
3/8 круга 16 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SMM-5431
1/2 круга 19 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SMM-5043
		3-0	2	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SMM-5044


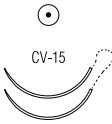


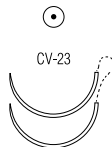
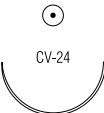
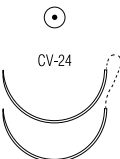
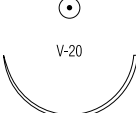
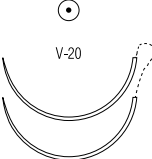
ШПАТЕЛЬ/ SPATULA

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 8 мм		7-0	0.5	45	Зелёный	36		8886662801

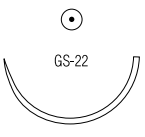
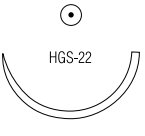
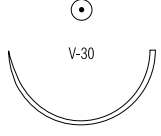
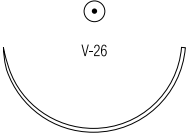
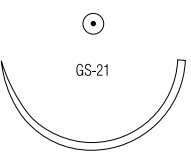
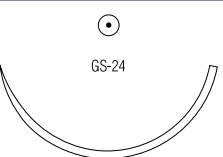

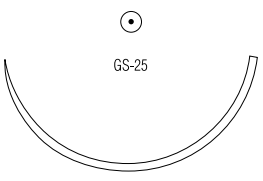
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 9 мм		7-0	0.5	45	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886614501
		7-0	0.5	60	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886613901
		7-0	0.5	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886612701
		6-0	0.7	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886612711
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886614811
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886612411
		5-0	1	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886612421

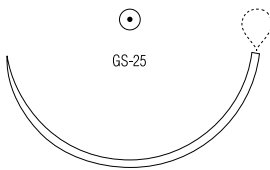
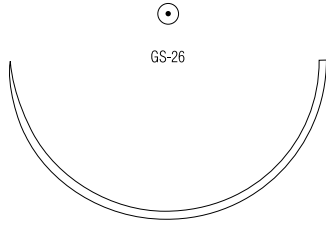
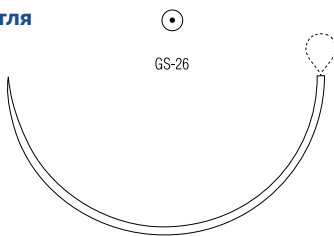
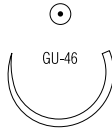
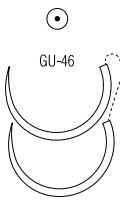
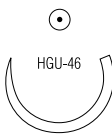
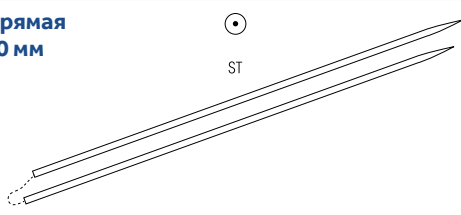
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 17 мм 	4-0	1.5	75	Зелёный	36	8886605731
3/8 круга 17 мм 	5-0	1	75	Зелёный	36	Maxon™ CV- Surgalloy™ 8886646221
	4-0	1.5	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™ 8886646231
1/2 круга 13 мм 	6-0	0.7	75	Зелёный	36	Surgalloy™ 8886621311
	5-0	1	75	Зелёный	36	Surgalloy™ 8886621321
1/2 круга 17 мм 	5-0	1	75	Зелёный	36	Surgalloy™ 8886620721
	4-0	1.5	75	Зелёный	36	Surgalloy™ 8886620731
	3-0	2	75	Зелёный	36	Surgalloy™ 8886620741
1/2 круга 17 мм 	5-0	1	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™ 8886614921
	4-0	1.5	90	Зелёный	36	Maxon™ CV- Surgalloy™ 8886613431
1/2 круга 20 мм 	5-0	1	75	Зелёный	36	8886621721
	4-0	1.5	75	Зелёный	36	8886621731
	3-0	2	75	Зелёный	36	8886621741
1/2 круга 20 мм 	4-0	1.5	90	Зелёный	36	8886622131
	3-0	2	90	Зелёный	36	8886603641
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	75	Зелёный	36	Surgalloy™ 8886623331
	3-0	2	5x45	Зелёный	12	D-Tach™ 8886622943
	3-0	2	75	Зелёный	36	8886623341
	2-0	3	75	Зелёный	36	Surgalloy™ 8886623351
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	90	Зелёный	36	Surgalloy™ 8886623531
	3-0	2	90	Зелёный	36	Surgalloy™ 8886623541

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 27 мм 	2-0	3	75	Зелёный	36		8886624551
	0	3.5	75	Зелёный	36		8886624561
1/2 круга 27 мм Н 	0	3.5	75	Зелёный	36		8886624961
1/2 круга 30 мм 	4-0	1.5	75	Зелёный	36		8886626131
	3-0	2	75	Зелёный	36		8886626141
	2-0	3	75	Зелёный	36		8886626151
	0	3.5	75	Зелёный	36		8886626161
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	75	Зелёный	36		8886625741
	2-0	3	75	Зелёный	36		8886625751
	0	3.5	75	Зелёный	36		8886625761
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	Зелёный	36		8886626751
	0	3.5	75	Зелёный	36		8886626761
	0	3.5	90	Зелёный	36		8886626961
	1	4	75	Зелёный	36		8886626771
	1	4	90	Зелёный	36		8886626971
1/2 круга 40 мм 	2-0	3	90	Зелёный	36		8886628751
	0	3.5	75	Зелёный	36		8886628561
	0	3.5	90	Зелёный	36		8886628761
	1	4	75	Зелёный	36		8886628571
	1	4	90	Зелёный	36		8886628771
1/2 круга, петля 40 мм 	0	3.5	150	Зелёный	12	Петля	GMM-563L
	1	4	150	Зелёный	12	Петля	GMM-573L
1/2 круга 48 мм 	0	3.5	90	Зелёный	36		8886630761
	1	4	90	Зелёный	36		8886630771

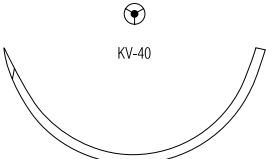
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга, петля 48 мм 	0	3.5	150	Зелёный	12	Петля	GMM-634L
	1	4	150	Зелёный	12	Петля	GMM-632L
1/2 круга 65 мм 	0	3.5	150	Зелёный	24		8886631962
	1	4	150	Зелёный	24		8886631972
1/2 круга, петля 65 мм 	0	3.5	150	Зелёный	12	Петля	GMM-341L
	0	3.5	240	Зелёный	12	Петля	GMM-343L
	1	4	240	Зелёный	12	Петля	GMM-344L
5/8 круга 27 мм 	2-0	3	75	Зелёный	36		8886640351
5/8 круга 27 мм 	2-0	3	75	Зелёный	36		8886640451
5/8 круга 27 мм 	0	3.5	75	Зелёный	36		8886645661
	1	4	75	Зелёный	36		8886641971
Прямая 60 мм 	0	3.5	75	Зелёный	36		8886623761
	3-0	2	75	Зелёный	36		8886623741

ТУПОКОНЕЧНАЯ КОЛЮЩАЯ / BLUNT POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 48 мм 	1	4	150	Зелёный	12	Нить 150 см, Петля 75 см	GMMT-90L

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 37 мм 	0	3.5	90	Зелёный	36		8886627761
1/2 круга, петля 40мм 	1	4	150	Зелёный	12	Нить 150 см, Петля 75 см	GMM-873L
1/2 круга 48мм 	1	4	90	Зелёный	36		8886629571
1/2 круга, петля 48мм 	0	3.5	150	Зелёный	12	Петля	GMM-806L
	1	4	150	Зелёный	12	Петля	GMM-807L

МНОГОЦЕЛЕВАЯ / MULTIPURPOSE

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
5/8 круга, петля 65 мм 	0	3.5	150	Зелёный	12	Петля	GMM-496L
	1	4	180	Зелёный	12	Петля	GMM-497L

SURGIPro™ II / SURGIPro™

Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена

Удовлетворяет всем требованиям к полипропилену.



Surgipro™ / Surgipro™ II - шовный материал, которому вы доверяете много лет, улучшенный и эффективный.

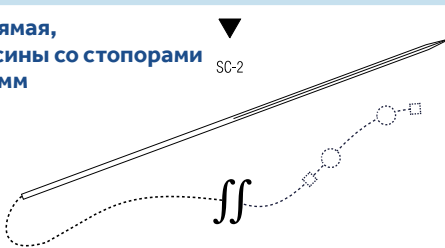
Описание материала	Инертный, нерассасывающийся окрашенный монофиламентный шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ изготовлен из изотактического кристаллизованного стереоизомера полипропилена и содержит полиэтилен.
Показания	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ предназначен для сопоставления мягких тканей и/или для лигирования, применяется в сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии, общей и торакальной хирургии, пластической хирургии.
Применение	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ вызывает минимальную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
Срок поддержки раны	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ не рассасывается и не имеет значительного изменения прочности in vivo.
Стерилизация	Окись этилена.
Упаковка	<p>Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ II производится как в неокрашенном виде, так и окрашенном фталоцианином меди в синий цвет, размерами от 3-0 USP (2 EP) до 8-0 USP (0.4 EP).</p> <p>Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ также производится как в неокрашенном виде, так и окрашенным фталоцианином меди в синий цвет, размерами от 10-0 USP (0.2 EP), 8-0 USP (0.4 EP) до 2 USP (5 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.</p> <p>Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ II возможен с PTFE (политетрафлуорэтиленовые) прокладками, которые располагаются между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта. Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ также возможен в следующих вариантах поставки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С PTFE (политетрафлуорэтиленовыми) прокладками, которые располагаются между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта. 2. С бусинами и стопорами для фиксации кончика нити при внутрикожном шве или для использования как подтягивающие нити. <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>

Surgipro™ II / Surgipro™




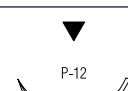
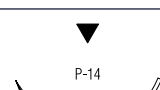
Surgipro™ / Surgipro™ II - шовный материал, которому вы доверяете много лет, улучшенный и эффективный.

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING								
Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 16 мм		6-0	0.7	45	Синий	36		SP-660
		6-0	0.7	45	Синий	12		SP-660G
		5-0	1	45	Синий	12		SP-559G
		4-0	1.5	75	Синий	36		SP-631
3/8 круга 19 мм		5-0	1	45	Синий	36		SP-661
		5-0	1	45	Синий	12		SP-661G
		4-0	1.5	45	Синий	36		SP-683
		4-0	1.5	45	Синий	12		SP-683G
		3-0	2	45	Синий	36		SP-665
		3-0	2	45	Синий	12		SP-665G
3/8 круга 24 мм		4-0	1.5	45	Синий	36		SP-629
		3-0	2	45	Синий	36		SP-684
		3-0	2	45	Синий	12		SP-684G
3/8 круга 26 мм		2-0	3	45	Синий	36		SP-868
		2-0	3	75	Синий	36		SP-685
3/8 круга 30 мм		4-0	1.5	75	Синий	36		SP-670
		3-0	2	75	Синий	36		SP-675
3/8 круга 39 мм		3-0	2	75	Синий	36		SP-649
		2-0	3	75	Синий	36		SP-689
		0	3.5	75	Синий	36		SP-690
1/2 круга 26 мм		2-0	3	75	Синий	36		CP-443
Прямая 60 мм		3-0	2	75	Синий	36		SP-622
		2-0	3	75	Синий	36		SP-623

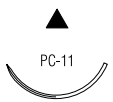
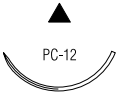
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
Прямая, бусины со стопорами 60 мм 	3-0	2	75	Синий	24	2 бусины со стопорами	SP-622-BC
	2-0	3	75	Синий	24	2 бусины со стопорами	SP-623-BC


КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 11 мм 	7-0	0.5	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-1696
	7-0	0.5	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-1696G
	6-0	0.7	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-1697
	6-0	0.7	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-5697G
	6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SP-1606
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5695
	5-0	1	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5698
	4-0	1.5	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5699
3/8 круга 16 мм 	6-0	0.7	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-5680G
	5-0	1	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5681
	5-0	1	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-5681G
	4-0	1.5	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-5692G
	3-0	2	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-1693G
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5686
	4-0	1.5	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5682
	4-0	1.5	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-5682G
	3-0	2	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5687
	3-0	2	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-5687G
3/8 круга 24 мм 	3-0	2	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5663



КОСМЕТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ / COSMETIC CONVENTIONAL CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
3/8 круга 16 мм 	5-0	1	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-1635
	4-0	1.5	45	Синий	36		SP-1634
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	Синий	36		SP-1644

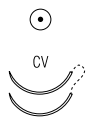



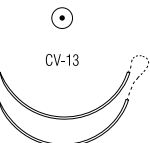
ПРЕМИУМ ШПАТЕЛЬ / PREMIUM SPATULA

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
1/2 круга 5.5 мм 	10-0	0.2	30	Синий	12	Surgalloy™	P-2756K


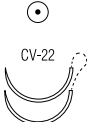


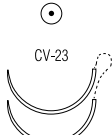
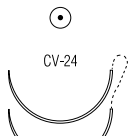
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
3/8 круга 9 мм 	7-0	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™ Optimis™	VP-72-X
	7-0	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-702-X
	7-0	0.5	5x60	Синий	12	Surgalloy™ Optimis™	VP-72-MX
	7-0	0.5	5x60	Синий	12	Surgalloy™	VP-702-MX
	7-0	0.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-713-X
	7-0	0.5	5x75	Синий	12	Surgalloy™	VP-713-MX
	6-0	0.7	45	Синий	36	Surgalloy™	VP-746-X
	6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™ Optimis™	VP-73-X
	6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-703-X
	6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-709-X
3/8 круга 9 мм 	7-0	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VPF-702-X
	7-0	0.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VPF-713-X
	6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VPF-709-X

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа		
							USP	Метрик
3/8 круга 11 мм 	6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™ Optimis™	VP-74-X	
	6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-776-X	
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-889-X	
	5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-890-X	
3/8 круга 13 мм 	7-0	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-727-X	
	6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-726-X	
	6-0	0.7	5x60	Синий	12	Surgalloy™	VP-726-MX	
	6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™ Optimis™	VP-76-X	
	6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-706-X	
	5-0	1	60	Синий	36	Surgalloy™ Optimis™	VP-75-X	
	5-0	1	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-725-X	
	5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-705-X	
	5-0	1	5x75	Синий	12	Surgalloy™	VP-705-MX	
	5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™ Optimis™	VP-70-X	
	5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-720-X	
	4-0	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-813-X	
	3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VPF-706-X
3/8 круга 17 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-881-X	
3/8 круга 17 мм 	5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-580-X	
	4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-581-X	
	4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™ Прокладки 3X7 мм жёсткие	VP-582-X	
	3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-585-X	
3/8 круга 22 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-841-X	
	4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-851-X	
	3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-532-X	
	2-0	3	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-533	


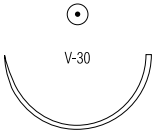
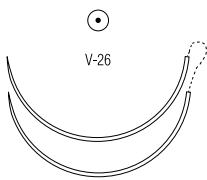

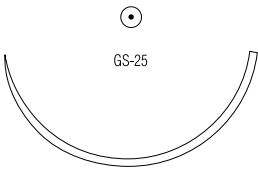
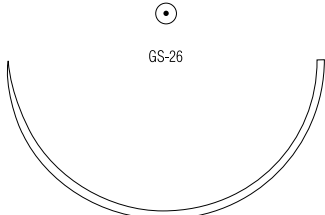
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
1/2 круга 10 мм 	6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-754-X
	5-0	1	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-755-X
1/2 круга 13 мм 	6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-711-X
	6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-733-X
	5-0	1	45	Синий	36	Surgalloy™	VP-715-X
	5-0	1	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-205-X
	5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-710-X
	4-0	1.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-204-X
1/2 круга 13 мм 	5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VPF-711-X
1/2 круга 17 мм 	5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-870-X
	4-0	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-871-X
	3-0	2	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-872-X
1/2 круга 17 мм 	6-0	0.7	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-555-X
	5-0	1	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-566-X
	5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-660-X
	5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-556-X
	5-0	1	5x90	Синий	12	Surgalloy™	VP-556-MX
	4-0	1.5	45	Синий	36	Surgalloy™	VP-757-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-557-X
	3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-558-X
1/2 круга 17 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VPF-557-X
1/2 круга 20 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-331-X

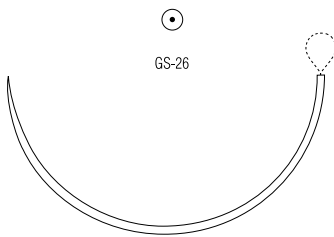
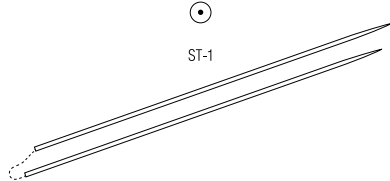
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 22 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-771-X
1/2 круга 22 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-761-X
	3-0	2	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-760-X
	3-0	3	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-762-X
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-831-X
	3-0	2	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-832-X
	2-0	3	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-833
	0	3.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-834
1/2 круга 26 мм 	5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-510-X
	5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-520-X
	4-0	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-511-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-521-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™ Прокладки 3X7 мм жёсткие	VP-421-X
	3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-522-X
	3-0	2	120	Синий	36	Surgalloy™	VP-542-X
	2-0	3	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-523
	2-0	3	120	Синий	36	Surgalloy™	VP-543
1/2 круга 26 мм 	2-0	3	120	Синий	36	Surgalloy™	VP-151
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VPF-522-X
	2-0	3	120	Синий	36	Surgalloy™	VPF-543
1/2 круга 27 мм 	2-0	3	75	Синий	36		CP-411
	0	3.5	75	Синий	36		CP-412

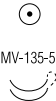
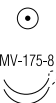
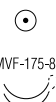
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 27 мм Н 	0	3.5	75	Синий	36		CP-414
	1	4	90	Синий	36		CP-415
1/2 круга 30 мм 	2-0	3	75	Синий	36		VP-945
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	90	Синий	36		VP-842-X
	2-0	3	90	Синий	36		VP-843
	2-0	3	120	Синий	36		VP-853
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	Синий	36		CP-423
	0	3.5	75	Синий	36		CP-424
	1	4	75	Синий	36		CP-425
1/2 круга 40 мм 	2-0	3	75	Синий	36		CP-433
	0	3.5	75	Синий	36		CP-434
	1	4	75	Синий	36		CP-435
	1	4	100	Синий	36		CP-535
1/2 круга 48 мм 	1	4	75	Синий	36		CP-455
1/2 круга 65 мм 	1	4	150	Синий	24		CP-824
	2	5	150	Синий	24		CP-825

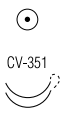
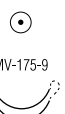
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 65 мм  GS-26	1	4	120	Синий	24	Нить 120 см, Петля 60 см	CP-824-L
	1	4	240	Синий	24	Нить 240 см, Петля 120 см	CP-834-L
Прямая 51 мм  ST-1	2-0	3	90	Синий	36		GP-282

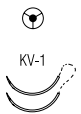
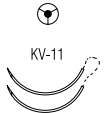
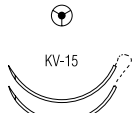
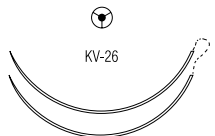
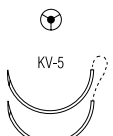
МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОЛЮЩАЯ / MICROSURGERY TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 6 мм  MV-135-5	8-0	0.4	45	Синий	36	Surgalloy™	VP-900-X
	8-0	0.4	2x45	Синий	12	Surgalloy™	VP-900-MX
	8-0	0.4	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-902-X
	8-0	0.4	2x60	Синий	12	Surgalloy™	VP-902-MX
	8-0	0.4	75	Синий	12	Surgalloy™	VP-973-X
	7-0	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-904-X
3/8 круга 8 мм  MV-175-8	8-0	0.4	45	Синий	36	Surgalloy™	VP-744-X
	8-0	0.4	2x45	Синий	12	Surgalloy™	VP-744-MX
	8-0	0.4	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-745-X
	7-0	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-735-X
	7-0	0.5	2x60	Синий	12	Surgalloy™	VP-737-MX
	7-0	0.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-747-X
3/8 круга 8 мм  MVF-175-8	7-0	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VPF-735-X

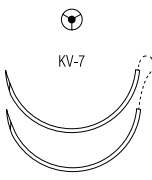
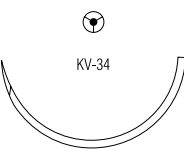
МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОЛЮЩАЯ / MICROSURGERY TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 8 мм		8-0	0.4	60	Синий	36	Cardiopoint™	VP-738-X
		8-0	0.4	2x60	Синий	12	Cardiopoint™	VP-738-MX
		7-0	0.5	60	Синий	36	Cardiopoint™	VP-630-X
		6-0	0.7	60	Синий	36	Cardiopoint™	VP-631-X
3/8 круга 10 мм		7-0	0.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-875-X
		8-0	0.4	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-763-X

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPER CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 9 мм		7-0	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-704-X
		6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-712-X
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-728-X
		5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-708-X
3/8 круга 17 мм		5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-914-X
		4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-925-X
		3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-926-X
3/8 круга 26 мм		3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-956
1/2 круга 17 мм		5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-934-X
		4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-935-X
		3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-936-X

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPER CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-975-X
	3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-976-X
	2-0	3	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-977
	0	3.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-978
1/2 круга 37 мм 	0	3.5	75	Синий	36		CP-844

TI-CRON™ / SURGIDAC™

Плетёный и монофиламентный нерассасывающийся
покрытый и непокрытый шовный материал из полиэстера

Шовный материал, которому Вы доверяете свыше 35 лет.



Описание материала	<p>Нерассасывающийся, стерильный шовный материал из полиэстера Ti-Cron™ / Surgidac™ изготавливается из полиэтилена терефталата. Шовный материал состоит из волокон полиэстера с высоким молекулярным весом, длинными линейными цепочками с ароматическими кольцами в качестве связующего звена.</p> <p>Плетёный шовный материал Ti-Cron™ выпускается как непокрытым, так и пропитанным силиконом для увеличения скольжения поверхности, тем самым улучшая манипуляционные свойства, прохождение через ткани и опускание узла.</p> <p>Монофиламентные нити Surgidac™ не покрыты, а плетёные доступны в непокрытом варианте, а также покрытом полибутиленом адипатом.</p>
Показания	Шовный материал Ti-Cron™ / Surgidac™ из полиэстера предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования, применения в общей, торакальной, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии, ортопедии и нейрохирургии.
Применение	Шовный материал из полиэстера Ti-Cron™ / Surgidac™ вызывает минимальную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
Срок поддержки раны	Нерассасывающийся шовный материал Ti-Cron™ / Surgidac™ не меняет прочности in vivo.
Стерилизация	Шовный материал Ti-Cron™ / Surgidac™ размером 6-0 и менее или с прокладками стерилизуется окисью этилена. Размер 5-0 и более стерилизуется путем гамма облучения.
Упаковка	<p>Плетёный шовный материал Ti-Cron™ возможен как в неокрашенном (белом) виде, так и окрашенном в синий D&C цвет No. 6, покрытый или не покрытый, размерами от 5 USP (7 EP) до 6-0 (0.7 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках различной длины и катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.</p> <p>Шовный материал из полиэстера Ti-Cron™ выпускается со специальными PTFE (политетрафлуорэтиленовые) прокладками между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта.</p> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>

Ti-Cron™ / Surgidac™

Ti-Cron™ / Surgidac™ - шовный материал, которому вы доверяете более 35 лет, имеющий доказанную временем эффективность.

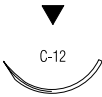
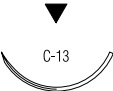
ЛИГАТУРЫ/ PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	5-0	1	12x45	Синий	36		88863008-21
	4-0	1.5	12x75	Синий	24		88863003-32
	3-0	2	12x75	Синий	24		88863003-42
	2-0	3	12x45	Синий	36		88863008-51
	2-0	3	12x75	Синий	24		88863003-52
	0	3.5	6x75	Синий	24		88863002-62
	1	4	6x45	Синий	24		88863001-72

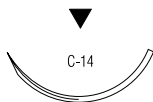
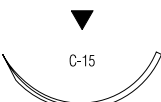
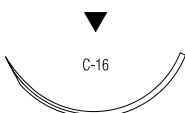
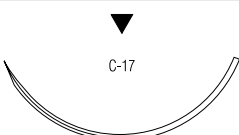
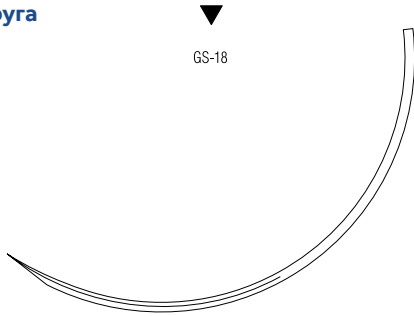
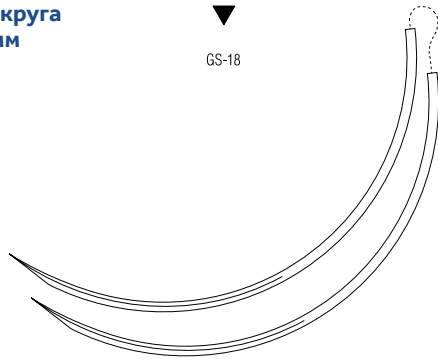
КАТУШКИ / REEL

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	2-0	3	250	Синий	24		88863380-52
	0	3.5	250	Синий	24		88863380-62
	1	4	250	Синий	24		88863380-72
	2	5	250	Синий	24		88863380-82
	4	6	150	Синий	24		88863381-09
	5	7	150	Синий	24		88863381-89

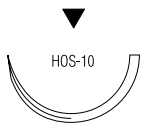
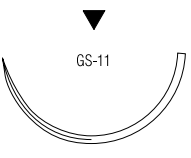
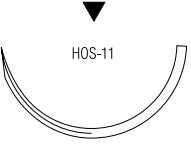
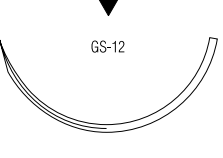
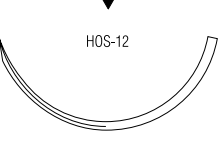
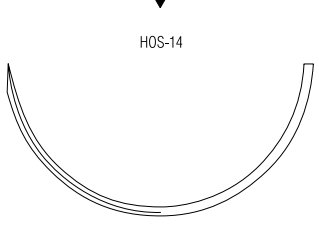
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 16 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36		88863046-31
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	Синий	36		88863047-31
	3-0	2	45	Синий	36		88863047-41
	3-0	2	75	Синий	36		88863055-41
	2-0	3	75	Синий	36		88863048-51

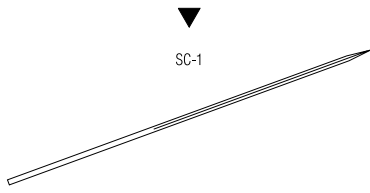
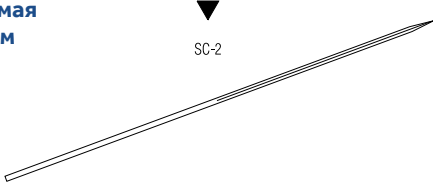
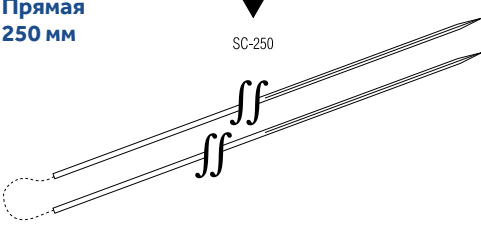
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 24 мм 	3-0	2	75	Синий	36	88863050-41
	2-0	3	75	Синий	36	88863050-51
	0	3.5	75	Синий	36	88863050-61
	0	3.5	90	Синий	36	88863065-61
3/8 круга 26 мм 	2-0	3	75	Синий	36	88863070-51
3/8 круга 30 мм 	2-0	3	75	Синий	36	88863023-51
	0	3.5	75	Синий	36	88863023-61
	0	3.5	90	Синий	36	88863012-61
	1	4	75	Синий	36	88863023-71
3/8 круга 39 мм 	2-0	3	75	Синий	36	88863054-51
	0	3.5	75	Синий	36	88863054-61
	1	4	75	Синий	36	88863054-71
	2	5	75	Синий	36	88863054-81
3/8 круга 77 мм 	5	7	45	Синий	12	88863056-89
3/8 круга 77 мм 	2	5	75	Синий	24	88863128-82


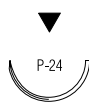
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 26 мм 	2-0	3	75	Синий	36	88863395-51
	0	3.5	75	Синий	36	88863395-61
	1	4	75	Синий	36	88863395-71
	2	5	75	Синий	36	88863395-81
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	Синий	36	88863309-51
	1	4	75	Синий	36	88863309-71
	4	6	75	Синий	36	88863154-09
1/2 круга 37 мм 	1	4	75	Синий	36	88863028-71
1/2 круга 40 мм 	2	5	75	Синий	36	88863155-81
1/2 круга 40 мм 	1	4	75	Синий	36	88863026-71
	2	5	75	Синий	36	88863026-81
1/2 круга 57 мм 	5	7	75	Синий	36	88863027-79


ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
Прямая 51 мм 	2-0	3	75	Синий	36	88863163-51
	1	4	75	Синий	36	88863163-71
Прямая 60 мм 	3-0	2	75	Синий	36	88863062-41
	2-0	3	75	Синий	36	88863062-51
Прямая 250 мм 	2-0	3	75	Синий	12	88862947-53

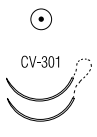


КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 13 мм 	5-0	1	45	Белый	12	Surgalloy™ SCD-2864G
	4-0	1.5	45	Белый	12	Surgalloy™ 88862862-34
1/2 круга 16 мм 	2-0	3	45	Синий	12	Surgalloy™ 88863059-53


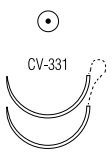
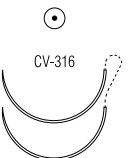
ШПАТЕЛЬ / SPATULA

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/4 круга 8.6 мм 	6-0	0.7	45	Белый	12	CD-3113-K
	5-0	1	45	Белый	12	CD-3123-K

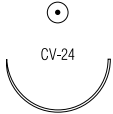


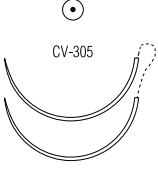

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	75	Синий	36	Cardiopoint™	88863280-11
	5-0	1	75	Синий	36	Cardiopoint™	88863280-21
	5-0	1	75	Белый	36	Cardiopoint™	88862801-21
	4-0	1.5	75	Синий	36	Cardiopoint™	88863280-31
	4-0	1.5	75	Синий	36	Cardiopoint™ Прокладки 3x3 мм жёсткие	88863314-31
	3-0	2	75	Синий	36	Cardiopoint™	88863280-41
3/8 круга 16 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	Cardiopoint™	88863229-31
	3-0	2	75	Синий	36	Cardiopoint™	88863229-41
3/8 круга 17 мм 	2-0	3	90	Белый	6	Surgalloy™	88862636-56
3/8 круга 18 мм 	5-0	1	75	Синий	36	Cardiopoint™	88862775-21
	4-0	1.5	75	Синий	36	Cardiopoint™	88862775-31
	3-0	2	75	Синий	36	Cardiopoint™	88862775-41
3/8 круга 22 мм 	3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	88862627-41
3/8 круга 26 мм 	2-0	3	10x90	Синий / белый	6		88863230-56
1/2 круга 10 мм 	5-0	1	90	Синий	36	Cardiopoint™	88863139-21
	5-0	1	90	Синий	36	Cardiopoint™ Прокладки 3x3 мм жёсткие	88863297-21
1/2 круга 13 мм 	5-0	1	60	Синий	36	Cardiopoint™	8886322621
	4-0	1.5	60	Синий	36	Cardiopoint™	8886322631
	4-0	1.5	90	Синий	36	Cardiopoint™	8886324931
	3-0	2	45	Синий	36	Cardiopoint™ Прокладки 3x3 мм жёсткие	8886329541


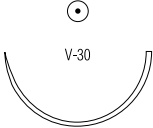
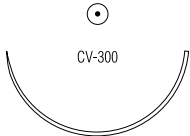
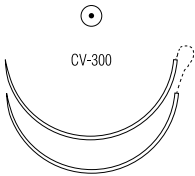
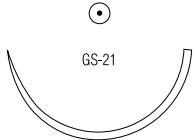
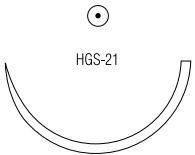

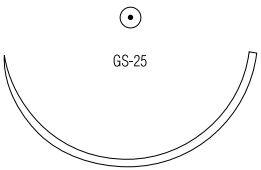
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа		
							USP	Метрик
1/2 круга 16 мм 	5-0	1	75	Синий	36	Cardioint™	88863186-21	
	4-0	1.5	75	Синий	36	Cardioint™	88863186-31	
	3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863186-41	
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863186-51	
1/2 круга 16 мм 	5-0	1	90	Синий	36	Cardioint™	88863271-21	
	4-0	1.5	75	Синий	36	Cardioint™	88863087-31	
	4-0	1.5	90	Синий	36	Cardioint™	88863271-31	
	3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863087-41	
	3-0	2	10x75	Синий	6	Cardioint™	88863084-46	
	3-0	2	90	Синий	36	Cardioint™	88863271-41	
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863087-51	
	2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™	88863083-56	
	2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x3 мм жёсткие	88863086-56	
	2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм жёсткие овал	VCD20331FE	
	2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863091-56	
	2-0	3	10x90	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863269-56	
1/2 круга 20 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	Cardioint™	88863369-31	
	3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863227-41	
	3-0	2	90	Синий	36	Cardioint™	88863369-41	
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863227-51	
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм жёсткие овал	VCD20316FE	
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм мягкие овал	VCD20316SE	
	2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм жёсткие овал	VCD20316MFE	
	2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм мягкие овал	VCD20316MSE	
	2-0	3	10x75	Синий / Белый	6	Cardioint™	88863385-56	
	2-0	3	10x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x3 мм жёсткие	88863277-56	
	2-0	3	10x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863323-56	
	2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™	88863369-51	
	2-0	3	90	Белый	36	Cardioint™	88862839-51	

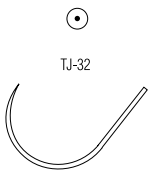
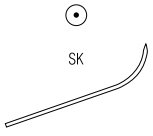
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 20 мм 	3-0	2	5x45	Синий	24	D-Tach™	88863267-42
1/2 круга 22 мм 	0	3.5	5x45	Синий	24	D-Tach™	88863257-62
1/2 круга 25 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	Cardioint™	88863185-31
	3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863185-41
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863185-51
	0	3.5	75	Синий	36	Cardioint™	88863185-61
	1	4	75	Синий	36	Cardioint™	88863185-71
1/2 круга 25 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	Cardioint™	88863256-31
	3-0	2	90	Синий	36	Cardioint™	88863256-41
	2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокл. 3x6 мм жёсткие овал	VCD20305MFE
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™ Прокл. 3x6 мм жёсткие овал	VCD20305FE
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™ Прокл. 3x6 мм мягкие овал	VCD20305SE
	2-0	3	75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокл. 3x6 мм мягкие овал	VCD20305MSE
	2-0	3	75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокл. 4.5x6 мм жёсткие овал	VCD203056MFE
	2-0	3	75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокл. 4.5x6 мм мягкие овал	VCD203056MSE
	2-0	3	10x75	Синий / Белый	6	Cardioint™	88863356-56
	2-0	3	10x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863324-56
	2-0	3	8x90	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокл. 3x6 мм жёсткие овал	VCD2036305FE
	2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™	88863256-51
	2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863336-51
	2-0	3	10x90	Синий / Белый	6	Cardioint™	88862981-56
	2-0	3	6x90	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863306-56
	0	3.5	90	Синий	36	Cardioint™	88863256-61
1/2 круга 27 мм 	2-0	3	75	Синий	36		88863093-51
	0	3.5	75	Синий	36		88863093-61



КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 27 мм 	2	5	5x45	Синий	24	88863372-82
1/2 круга 30 мм 	3-0	2	75	Синий	36	88863205-41
	2-0	3	75	Синий	36	88863205-51
	0	3.5	75	Синий	36	88863205-61
1/2 круга 35 мм 	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™ 88863082-51
	0	3.5	75	Синий	36	Cardioint™ 88863082-61
1/2 круга 35 мм 	2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™ 88863393-51
	0	3.5	75	Синий	36	Cardioint™ 88863274-61
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	Синий	36	88863090-51
	0	3.5	75	Синий	36	88863090-61
	1	4	75	Синий	36	88863090-71
1/2 круга 37 мм 	1	4	75	Синий	36	88863113-71
	2	5	75	Синий	36	88863113-81
	5	7	75	Синий	36	88863111-79
1/2 круга 40 мм 	2	5	75	Синий	36	88863376-81
1/2 круга 48 мм 	0	3.5	75	Синий	36	88863097-61
	1	4	75	Синий	36	88863097-71

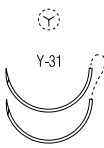
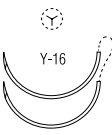
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
Ј-игла 32 мм 	1	4	75	Синий	36		88863103-71
Лыжа 23 мм 	2-0	3	120	Синий	36		88863017-51
	0	3.5	120	Синий	36		88863017-61

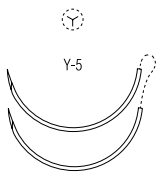
КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 18 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	Cardioint™	88863107-31
3/8 круга 18 мм 	3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863182-41
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863182-51
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863233-51
	2-0	3	10x75	Синий / белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863365-56
	2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™	88862631-51
	2-0	3	10x90	Синий / белый	6	Cardioint™	88863052-56
	2-0	3	10x90	Синий / белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88862658-56

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPER CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 16 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	Cardioint™	88863160-31
	3-0	2	75	Белый	36	Cardioint™	88862880-41
	3-0	2	90	Синий	36	Cardioint™	88863160-41
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863125-51
	2-0	3	75	Белый	36	Cardioint™	88862880-51
	2-0	3	10X75	Синий / Белый	6	Cardioint™	88862877-56
	2-0	3	10X75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863221-56
	2-0	3	8X75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863218-56
	2-0	3	8X75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863219-56
	2-0	3	8X75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм жёсткие овал	VCD2031MFE
	2-0	3	8X75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм мягкие овал	VCD2031MSE
	2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™	88863160-51
	2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863204-51
	2-0	3	90	Белый	36	36 Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88862808-51
	1/2 круга 17 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™
3-0		2	90	Синий	36	Surgalloy™	88863159-41
2-0		3	10X75	Синий / Белый	6	Surgalloy™	88862879-56
2-0		3	8X75	Синий / Белый	6	Surgalloy™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863235-56
2-0		3	90	Синий	36	Surgalloy™	88863159-51
1/2 круга 20 мм 	2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™	88863157-51
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863088-41
	2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863088-51

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	90	Синий	36	Cardiopoint™	88863167-41
	2-0	3	10x75	Синий/белый		Cardiopoint™	88863222-56
	2-0	3	75	Синий	36	Cardiopoint™	88863202-51
	2-0	3	10x90	Синий/белый		Cardiopoint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863290-56
	2-0	3	90	Синий	36	Cardiopoint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863212-51
	2-0	3	90	Синий	36	Cardiopoint™	88863167-51
	2-0	3	90	Белый	36	Cardiopoint™	88862815-51
	0	3.5	90	Синий	36	Cardiopoint™	88863167-61
1/2 круга 26 мм 	2-0	3	8x75	Синий/белый	36	Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863240-56
1/2 круга 26 мм 	0	3.5	90	Синий	36		88863119-61
1/2 круга 40 мм 	0	3.5	75	Синий	36		88863092-61
	1	4	75	Синий	36		88863092-71

ПРОКЛАДКИ / PLEDGETS

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
PTFE прямоугольные					10x36	3x3 мм жёсткие	88868675-01
					10x36	3x7 мм жёсткие	88868677-01
					10x36	3x7 мм мягкие	88868682-01
					5x36	9.5x4.8 мм жёсткие	88868679-01
					5x36	9.5x4.8 мм мягкие	88868678-01

VASCUFIL™

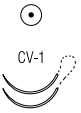
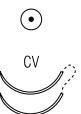
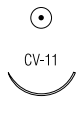

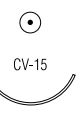
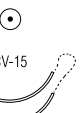


Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полибутестера с рассасывающимся покрытием из Polytribolate™

Инновация в кардиохирургии.

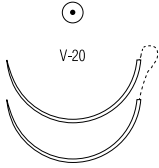


Описание материала	Vascufil™ - покрытый нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал, состоящий из полибутестера, кополимера бутилен терефталата и политераметилена гликоля. Шовный материал имеет покрытие из POLYTRIBOLATE™- рассасывающийся полимер из ε-капролактона-гликолида-полоксамера 188.
Показания	Монофиламентный шовный материал Vascufil™ применяется как нерассасывающийся шовный материал для сопоставления тканей и/или для лигирования в сердечно-сосудистой хирургии и офтальмохирургии. Применение данного шовного материала на нервных тканях и в микрохирургии не рекомендуется.
Применение	Монофиламентный шовный материал Vascufil™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
Срок поддержки раны	Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал Vascufil™ не теряет прочность in vivo. Выведение рассасывающегося покрытия полностью завершается в течение 30 дней.
Стерилизация	Гамма облучение.
Упаковка	<p>Стерильный шовный материал Vascufil™ производится различной длины, диаметра и с разным количеством в индивидуальной упаковке. Возможные варианты размеров от 2-0 USP (3 EP) до 7-0 USP (0.5 EP).</p> <p>Шовный материал VASCUFIL™ окрашен в синий цвет фталоцианином меди.</p> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>

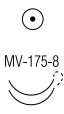
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
3/8 круга 9 мм 	7-0	0.5	45	Синий	36	Surgalloy™	88864703-01V
	7-0	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	88864705-01V
	7-0	0.5	75	Синий	36	Surgalloy™	88864704-01V
	6-0	0.7	45	Синий	36	Surgalloy™	88864703-11V
	6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	88864705-11V
	6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	88864704-11V
3/8 круга 11 мм 	6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	88864756-11V
3/8 круга 13 мм 	5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	88864722-21V
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	88864709-11V
	6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	88864710-11V
	5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	88864710-21V
	5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™	88864711-21V
3/8 круга 17 мм 	5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	88864739-21V
	4-0	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	88864739-31V
3/8 круга 17 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	88864716-31V
1/2 круга 13 мм 	6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	88864741-11V
	6-0	0.7	4x75	Синий	12	Surgalloy™	88864742-15V
	5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	88864741-21V
1/2 круга 17 мм 	5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™	88864719-21V
	4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	88864719-31V

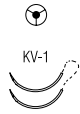

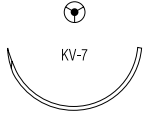
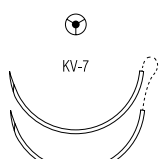
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	Surgalloy™	88864750-31V
	3-0	2	90	СИНИЙ	36	Surgalloy™	88864750-41V
	2-0	3	90	СИНИЙ	36	Surgalloy™	88864750-51V

МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОЛЮЩАЯ / MICROSURGERY TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 8 мм 	7-0	0.5	60	СИНИЙ	36	Surgalloy™	88864794-01V

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 9 мм 	6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	88864714-11V
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	88864734-11V
	5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	88864734-21V
1/2 круга 26 мм 	2-0	3	90	Синий	36	Surgalloy™	88864730-51V
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	88864731-31V
	3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	88864731-41V
	2-0	3	90	Синий	36	Surgalloy™	88864731-51V

FLEXON™

Кручёная проволока из нержавеющей стали с покрытием

Превосходная стабильность с высокой гибкостью.

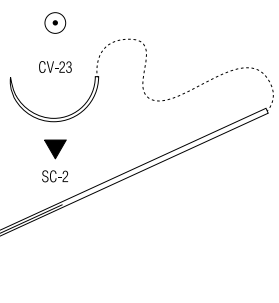
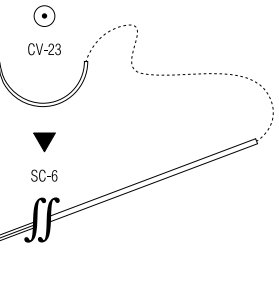
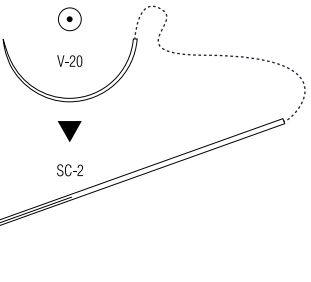
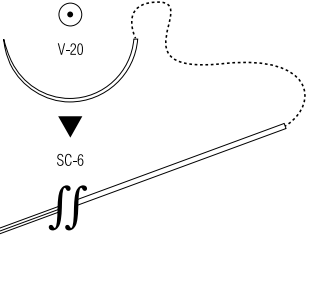


Проводник для временного водителя сердечного ритма.

Описание материала	Проводник для временного водителя сердечного ритма - материал Flexon™ представляет собой кручёную проволоку из нержавеющей стали с покрытием из оранжевого или белого PTFE (политетрафторэтилен) или прозрачного FEP.
Показания	Материал Flexon™ предназначен для использования в качестве временного проводника в предсердии и желудочковой зоне до и после операций на сердце.
Применение	Шовный материал Flexon™ вызывает минимальную реакцию тканей и не рассасывается.
Срок поддержки раны	Постоянная.
Стерилизация	Окись этилена.
Упаковка	Проводник временного водителя ритма Flexon™ поставляется покрытым оранжевым или белым PTFE или прозрачным FEP в размерах от 3-0 USP (2 EP) до 0 USP (3.5 EP). Временный проводник сердечного ритма FLEXON™ поставляется стерильным с различными видами игл, включая так называемые «отламывающиеся» иглы BREAKAWAY™. Формируется в коробках по 12 шт.

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<p>1/2 круга 17 мм</p>  <p>Прямая 60 мм</p>	3-0	2	60		12	Покрытие FEP	88862592-43
<p>1/2 круга 17 мм</p>  <p>Прямая 88 мм</p>	3-0	2	60		12	Break-Away™ Покрытие FEP	88862586-43
<p>1/2 круга 26 мм</p>  <p>Прямая 60 мм</p>	0	3.5	60		12	Покрытие FEP	88862597-63
<p>1/2 круга 26 мм</p>  <p>Прямая 88 мм</p>	2-0	3	60	Оранжевый	12	Break-Away™ Покрытие PTFE	88862617-53
	2-0	3	60	Белый	12	Break-Away™ Покрытие PTFE	88862615-53
	2-0	3	2x60	Оранжевый /белый	12	Break-Away™ Покрытие PTFE	88862623-53

STEEL™

Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал
из нержавеющей стали 316L

Обеспечивает максимальную прочность.



Описание материала	Шовный материал из нержавеющей стали 316L и соответствуют всем стандартам USP и EP, предъявляемым к нерассасывающимся шовным материалам.
Характеристика материала	Шовный материал из стали наиболее инертный среди всех шовных материалов и обеспечивает максимальную прочность.
Показания	Синтетический стальной шовный материал предназначен для закрытия грудины и также для некоторых ортопедических процедур (например, при восстановлении сухожилия).
Действие	Стальной шовный материал вызывает минимальную реакцию тканей и не рассасывается в организме.
Прочность	Постоянная.
Стерилизация	Окись этилена или гамма облучение.
Упаковка	<p>Возможные варианты размеров стального шовного материала от 2-0 USP (3 EP) до 7 USP (9 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, без игл или с иглами, закрепленными перманентно или ROTO GRIP™, поворачивающимися на 360°.</p> <p>Формируется в коробках по 12 шт.</p> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>

ЛИГАТУРЫ / PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	0	3.5	12x45		12		88862407-63
	2	5	6x45		12		88862408-83

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 40 мм 	2	5	5x45		12		88862413-83
1/2 круга 48 мм 	2	5	2x45		12	Rotogrip™	88862420-83
	4	6	2x45		12	Rotogrip™	88862420-09
1/2 круга 55 мм 	5	7	4x45		12	Rotogrip™	88862410-89
	5	7	75		12	Rotogrip™	88862412-89
	5	7	2x75		12	Rotogrip™	88862424-89

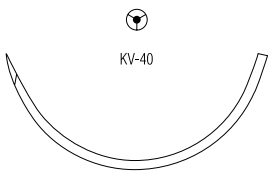
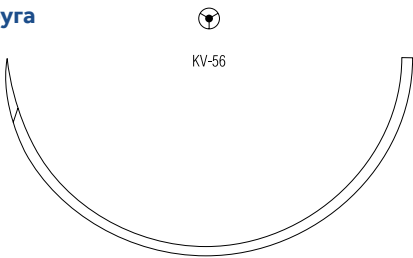
РЕЖУЩАЯ / CONVENTIONAL CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 48 мм 	5	7	4x45		12		88862224-89
	6	8	2x45		12		88862222-69
	6	8	4x45		12		88862224-69
	6	8	6x45		12		88862226-69
	7	9	4x45		12		88862224-49

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	5x45		12		88862345-53

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 48 мм 	5	7	4x45		12	Rotogrip™	88862414-89
	5	7	4x45		12		88862393-89
	6	8	2x45		12		88862392-69
	6	8	4x45		12		88862393-69
	7	9	2x45		12		88862392-49
1/2 круга 60 мм 	5	7	5x75		12		88862396-89

MONOSOF™ / DERMALON™

Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полиамида

Высокая прочность на растяжение. Низкая реактивность ткани.



Описание материала	Монофиламентный шовный материал Monosof™ / Dermalon™ из полиамида является инертным, нерассасывающимся шовным материалом. По химической структуре представляет собой длинную химическую цепь алифатических полимеров Нейлон 6 и Нейлон 6.6.
Показания	Монофиламентный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал Monosof™ / Dermalon™ применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, используется в общей, пластической, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии.
Применение	Монофиламентный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал Monosof™ / Dermalon™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
Срок поддержки раны	Как и любой другой нейлоновый не рассасывающийся шовный материал со временем подвергается частичному гидролизу in vivo, что может привести к незначительной потере прочности.
Стерилизация	Окись этилена или гамма облучение.
Упаковка	Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал Monosof™ производится как неокрашенным, так и в черном цвете размерами от 2 USP (5 EP) до 11-0 USP (0.1 EP). Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал Dermalon™ производится окрашенным в синий D&C цвет No. 2 в размерах от 2-0 USP (3 EP) до 6-0 (0.7 EP). Стерильный шовный материал Monosof™ / Dermalon™ поставляется в отрезках различной длины и катушках, в безыгольном исполнении и с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 или 36 штук.

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

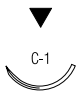
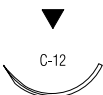
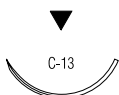
Monosof™ / Dermalon™

Monosof™ / Dermalon™ - шовный материал, которому вы доверяете около 50 лет, имеющий доказанную временем эффективность.

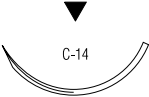
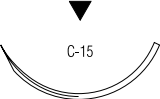



ЛИГАТУРЫ/ PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	2	5	6x45	Чёрный	36		N-64

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 12 мм 	6-0	0.7	45	Чёрный	36		SN-667
	6-0	0.7	45	Синий	36		88861741-11
	5-0	1	45	Чёрный	36		SN-871
	5-0	1	45	Синий	36		88861741-21
3/8 круга 16 мм 	6-0	0.7	45	Чёрный	36		SN-660
	5-0	1	45	Чёрный	36		SN-659
	4-0	1.5	75	Чёрный	36		SN-762
	3-0	2	75	Чёрный	36		SN-763
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	Чёрный	36		SN-661
	5-0	1	45	Чёрный	12		SN-661G
	5-0	1	45	Синий	36		88861756-21
	4-0	1.5	45	Чёрный	36		SN-662
	4-0	1.5	45	Синий	36		88861756-31
	4-0	1.5	75	Синий	36		88861757-31
	4-0	1.5	90	Чёрный	36		SN-644
	3-0	2	45	Чёрный	36		SN-653
	3-0	2	45	Синий	36		88861756-41
	3-0	2	75	Чёрный	36		SN-641
	3-0	2	75	Синий	36		88861757-41
	3-0	2	90	Чёрный	36		SN-665
	2-0	3	45	Синий	36		88861756-51
	2-0	3	90	Чёрный	36		SN-666



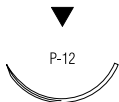
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 24 мм 	4-0	1.5	45	Чёрный	36		SN-658
	4-0	1.5	90	Чёрный	36		SN-649
	3-0	2	45	Чёрный	36		SN-663
	3-0	2	45	Чёрный	12		SN-663G
	3-0	2	45	Чёрный	36		88861744-41
	3-0	2	75	Синий	36		88861799-41
	3-0	2	90	Синий	36		SN-648
	2-0	2	45	Чёрный	36		SN-758
	2-0	3	75	Синий	36		88861799-51
	2-0	3	90	Чёрный	36		SN-747
	3/8 круга 26 мм 	2-0	3	45	Чёрный	36	
2-0		3	45	Синий	36		88861744-51
2-0		3	75	Чёрный	36		SN-664
2-0		3	75	Чёрный	12		SN-664-G
3/8 круга 30 мм 	3-0	2	75	Чёрный	36		SN-671
	3-0	2	75	Синий	36		88861750-41
	3-0	2	90	Чёрный	36		SN-771
	2-0	3	75	Чёрный	36		SN-688
	2-0	3	90	Чёрный	36		SN-788
	0	3.5	75	Чёрный	36		SN-689
	1	4	90	Чёрный	36		SN-790
3/8 круга 35 мм 	2-0	3	90	Чёрный	36		SN-694
3/8 круга 39 мм 	3-0	2	75	Чёрный	36		SN-673
	3-0	2	75	Синий	36		88861727-41
	2-0	3	75	Чёрный	36		SN-674
	2-0	3	75	Синий	36		88861727-51
	0	3.5	90	Чёрный	36		SN-775
	1	4	90	Чёрный	36		SN-776

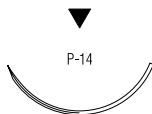
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 18 мм 	4-0	1.5	75	Чёрный	36	SN-630
	3-0	2	75	Чёрный	36	SN-681
1/2 круга 30 мм 	2-0	3	90	Чёрный	36	SN-782
	1-0	4	90	Чёрный	36	SN-819
1/2 круга 37 мм 	1	4	90	Чёрный	36	CN-822
	2-0	3	75	Чёрный	36	CN-819
Прямая 51 мм 	4-0	1.5	90	Чёрный	36	SN-615
	3-0	2	90	Чёрный	36	SN-615
Прямая 60 мм 	2-0	3	75	Чёрный	36	SN-628
	2-0	3	100	Чёрный	36	SN-728


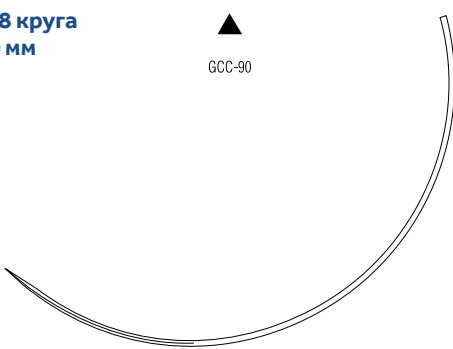
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 11 мм 	6-0	0.7	45	Чёрный	36	Surgalloy™
	6-0	0.7	45	Чёрный	12	SN-3697
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	45	Чёрный	36	Surgalloy™
	5-0	1	45	Чёрный	36	SN-5698
	4-0	1.5	45	Чёрный	36	SN-5699
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SN-5691
3/8 круга 16 мм 	5-0	1	45	Чёрный	36	SN-5668
	4-0	1.5	45	Чёрный	36	SN-5694
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	Чёрный	36	SN-5666
	4-0	1.5	45	Чёрный	36	SN-5667
	3-0	2	45	Чёрный	36	SN-5669


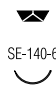
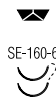
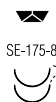
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 24 мм 	3-0	2	45	Чёрный	36	Surgalloy™	SN-5663

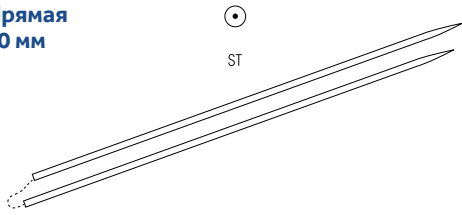
РЕЖУЩАЯ / CONVENTIONAL CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	Чёрный	36		SN-568
	4-0	1.5	45	Синий	36		88861742-31
	3-0	2	45	Синий	36		88861742-41
3/8 круга 90 мм 	2-0	3	100	Чёрный	36		CN-791
	1	4	100	Чёрный	36		CN-793




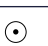


ПРЕМИУМ ШПАТЕЛЬ / PREMIUM SPATULA

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/4 круга 6.3 мм 	8-0	0.4	30	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2714-K
3/8 круга 6.3 мм 	10-0	0.2	30	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2770-K
1/2 круга 5.5 мм 	9-0	0.3	30	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2760-K
1/2 круга 6.9 мм 	8-0	0.4	30	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2716-K

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 40 мм 	0	3.5	100	Чёрный	36	CN-723
1/2 круга, петля 40 мм 	0	3.5	150	Чёрный	24	Петля CN-825-L
1/2 круга, петля 48 мм 	1	4	150	Чёрный	24	Петля CN-830-L
Прямая 60 мм 	2-0	3	90	Чёрный	36	GN-283
	0	3.5	90	Чёрный	36	GN-284

МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОЛЮЩАЯ / MICROSURGERY TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 4 мм	 MV-50-3	11-0	0.1	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2500
3/8 круга 4 мм	 MV-70-3	11-0	0.1	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2510
		10-0	0.2	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2512
3/8 круга 4 мм	 MV-135-3	9-0	0.3	8	Чёрный	12	Surgalloy™	N-1603G
3/8 круга 5 мм	 MV-100-4	10-0	0.2	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2530
		9-0	0.3	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2532
3/8 круга 5 мм	 MV-135-4	9-0	0.3	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2546
		8-0	0.4	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2543
3/8 круга 6 мм	 MV-135-5	9-0	0.3	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2548
		8-0	0.4	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2547

NOVAFIL™

Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал
из полибутэстера

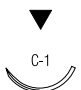
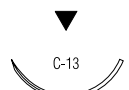
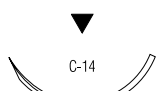
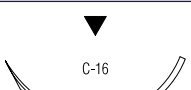



Эластичный и гибкий.








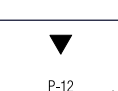



Эластичный и гибкий.
Контролируемое растяжение в
ваших руках.

Описание материала	Нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал Novafil™ состоит из полибутестера - кополимера бутилена терефталата и политетраметилена-гликолиевого эфира.
Показания	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал Novafil™ применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, включая использование в сердечно-сосудистой и офтальмохирургии. Применение в микрохирургии и на нервных тканях не рекомендуется.
Применение	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал Novafil™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Шовный материал Novafil™ устойчив к воздействию тканевых ферментов.
Срок поддержки раны	Монофиламентный шовный материал Novafil™ не рассасывается и не меняет прочности in vivo.
Стерилизация	Гамма облучение.
Упаковка	<p>Полибутестеровый шовный материал NOVAFIL™ производится в бесцветном варианте или окрашенным в синий цвет фталоцианином меди. Возможные варианты размеров от 1 USP (4 EP) до 7-0 USP (0.5 EP). Стерильный шовный материал NOVAFIL™ поставляется различной длины, диаметра и с разным количеством отрезков в индивидуальной упаковке, в безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми.</p> <p>Формируется в коробках по 12, 24 или 36 штук.</p> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>

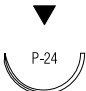
Novafil™ - шовный материал, которому вы доверяете около 30 лет, имеющий доказанную временем эффективность.

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING								
Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 12 мм		6-0	0.7	45	Синий	12		8886441913
		5-0	1	45	Синий	12		8886441923
		4-0	1.5	45	Синий	12		8886441933
3/8 круга 19 мм		5-0	1	45	Синий	12		8886442023
		4-0	1.5	45	Синий	12		8886442033
		3-0	2	45	Синий	12		8886442043
		3-0	2	75	Синий	36		8886455441
3/8 круга 24 мм		4-0	1.5	45	Синий	12		8886442233
		3-0	2	45	Синий	12		8886442243
		3-0	2	90	Синий	36		8886400241
		2-0	3	45	Синий	12		8886442253
		2-0	3	75	Синий	12		8886442153
3/8 круга 30 мм		3-0	2	75	Синий	36		8886442441
		2-0	3	75	Синий	36		8886442451
		0	3.5	75	Синий	36		8886442461
3/8 круга 39 мм		2-0	3	75	Синий	36		8886442651
3/8 круга 48 мм		1	4	75	Синий	36		8886443671
Прямая 60 мм		3-0	2	75	Синий	36		8886449041
		2-0	3	75	Синий	36		8886449051



КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 11 мм		7-0	0.5	45	Синий	12	Surgalloy™	8886441003
		6-0	0.7	45	Синий	12	Surgalloy™	8886441013
		5-0	1	45	Синий	12	Surgalloy™	8886441023
3/8 круга 13 мм		5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	8886402721
		4-0	1.5	45	Синий	12	Surgalloy™	SPB-1233G
3/8 круга 13 мм		5-0	1	45	Синий	12		8886440023
3/8 круга 16 мм		4-0	1.5	45	Синий	12	Surgalloy™	SPB-5143G
3/8 круга 16 мм		5-0	1	45	Синий	12		8886440123
		4-0	1.5	45	Синий	12		8886440133
3/8 круга 19 мм		4-0	1.5	45	Синий	12	Surgalloy™	SPB-5633G
3/8 круга 19 мм		4-0	1.5	45	Синий	12		8886440233
		3-0	2	45	Синий	12		8886440243
3/8 круга 24 мм		3-0	2	45	Синий	12	Surgalloy™	SPB-5843G
		3-0	2	75	Синий	36	Surgalloy™	8886458243
		2-0	3	45	Синий	12	Surgalloy™	8886441853
3/8 круга 24 мм		3-0	2	45	Синий	12		8886440343

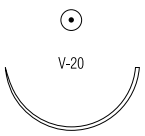
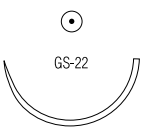
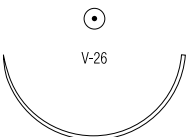
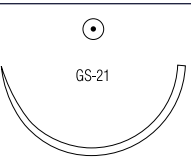
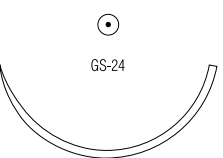
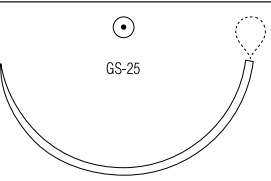
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 16 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SPB-5433G

КОСМЕТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ / COSMETIC CONVENTIONAL CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 16 мм		6-0	0.7	45	Синий	12	Dermax™	XNF-1966
		5-0	1	45	Синий	12	Dermax™	XNF-1965
		4-0	1.5	45	Синий	12	Dermax™	XNF-1964
3/8 круга 19 мм		5-0	1	45	Синий	12	Dermax™	XNF-1995
		4-0	1.5	45	Синий	12	Dermax™	XNF-1994
		3-0	2	45	Синий	12	Dermax™	XNF-1993

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 26 мм		3-0	2	75	Синий	36	Surgalloy™	8886445241
		2-0	3	75	Синий	36	Surgalloy™	8886445251
		0	3.5	75	Синий	36	Surgalloy™	8886445261
1/2 круга 27 мм		2-0	3	75	Синий	36		8886445951
1/2 круга 37 мм		3-0	2	75	Синий	36		8886445041
1/2 круга 37 мм		0	3.5	75	Синий	36		8886445561
		1	4	75	Синий	36		8886445571
1/2 круга 40 мм		1	4	75	Синий	36		8886446371
1/2 круга, петля 48 мм		0	3.5	200	Синий	12	Петля	8886453863

SURGILON™

Плетёный нерассасывающийся шовный материал из полиамида

Равномерно покрыт силиконом для улучшения манипуляционных характеристик.



Описание материала	Плетёный шовный материал из полиамида Surgilon™ — инертен и не рассасывается. По химической структуре представляет собой длинную химическую цепь полимеров Нейлон 6 и Нейлон 6.6. Плетеные нити равномерно покрыты силиконом для улучшения манипуляционных характеристик и уменьшения капиллярности.
Показания	Плетёный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал Surgilon™ применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, используется в общей, торакальной, пластической, косметической, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии.
Применение	Плетёный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал Surgilon™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
Срок поддержки раны	Как и любой другой нейлоновый не рассасывающийся шовный материал со временем подвергается частичному гидролизу in vivo, что может привести к незначительной потере прочности.
Стерилизация	Плетёный шовный материал из полиамида Surgilon™ стерилизуется оксидом этилена в размерах от 6-0 (метрический размер 0,7) и менее, гамма облучением в размерах от 2 (метрический размер 5) до 5-0 (метрический размер 1).
Упаковка	<p>Плетёный нейлоновый шовный материал Surgilon™ производится как неокрашенным (белым), так и в черном цвете ...размерами от 3 USP (6 EP) до 5-0 USP (1 EP). Стерильный шовный материал urgilon™ поставляется различной длины, диаметра и с разным количеством в индивидуальной упаковке, в безыгольном исполнении или с иглами, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми.</p> <p>Формируется в коробках по 12, 24 или 36 штук.</p> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>

ЛИГАТУРЫ / PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	4-0	1.5	12x45	Чёрный	36		88861918-31
	4-0	1.5	7x75	Чёрный	36		88861919-31
	3-0	2	12x45	Чёрный	36		88861918-41
	3-0	2	7x75	Чёрный	36		88861919-41
	2-0	3	12x45	Чёрный	36		88861918-51
	2-0	3	12x45	Белый	36		88861899-51
	2-0	3	7x75	Чёрный	36		88861919-51
	0	3.5	6x45	Чёрный	36		88861917-61
	0	3.5	6x45	Белый	36		88861902-61
	0	3.5	7x75	Чёрный	36		88861919-61
	1	4	6x45	Чёрный	36		88861917-71
	1	4	7x75	Чёрный	36		88861919-71
	2	5	6x45	Чёрный	24		88861917-82


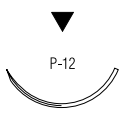
КАТУШКИ / REEL

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	3-0	2	360	Чёрный	24		88861906-42
	2-0	3	360	Чёрный	24		88861906-52
	0	3.5	250	Чёрный	24		88861920-62
	1	4	250	Чёрный	24		88861920-72
	2	5	300	Чёрный	12		88861914-83
	3	6	238	Чёрный	12		88861920-93


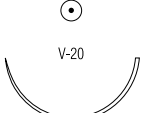



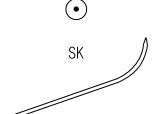
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 19 мм 	2-0	3	75	Чёрный	36	88861982-51
3/8 круга 24 мм 	3-0	2	75	Чёрный	36	88861935-41
	2-0	3	45	Чёрный	12	88861934-53
	2-0	3	75	Чёрный	36	88861935-51
3/8 круга 30 мм 	2-0	3	75	Чёрный	36	88861883-51
	0	3.5	75	Чёрный	36	88861883-61
	1	4	75	Чёрный	36	88861883-71
3/8 круга 35 мм 	1	4	75	Чёрный	36	88861922-71
1/2 круга 26 мм 	2-0	3	75	Чёрный	36	88861932-51
1/2 круга 37 мм 	1	4	75	Чёрный	36	88861915-71
Прямая 51 мм 	2-0	3	75	Чёрный	36	88861985-51

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
3/8 круга 13 мм 	5-0	1	45	Чёрный	12	Surgalloy™	SBS-1928G
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	Белый	12	Surgalloy™	SBS-1884G
	3-0	2	45	Белый	12	Surgalloy™	SBS-1883G

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 17 мм 	4-0	1.5	75	Чёрный	36	88861995-31
	3-0	2	75	Чёрный	36	88861995-41
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	75	Чёрный	36	88861951-41
	2-0	3	75	Чёрный	36	88861951-51
	0	3.5	75	Чёрный	36	88861951-61
1/2 круга 27 мм 	0	3.5	75	Чёрный	36	88861968-61
1/2 круга 30 мм 	2-0	3	75	Чёрный	36	88861964-51
	0	3.5	75	Чёрный	36	88861964-61
1/2 круга 37 мм 	1	4	75	Чёрный	36	88861971-71
Лыжа 23 мм 	2-0	3	250	Чёрный	36	88862011-51

SOFSILK™

Плетёный нерассасывающийся покрытый шелк

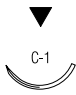
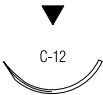
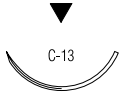
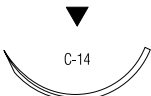


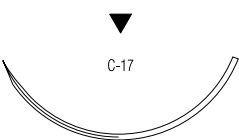
Оптимальные манипуляционные свойства.



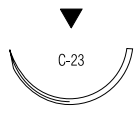
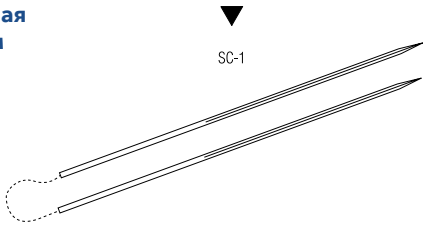
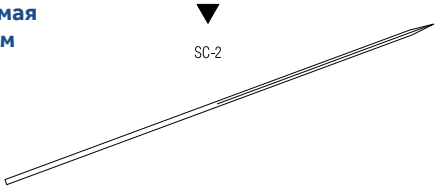
Описание материала	Шовный материал Sof silk™ представляет собой нерассасывающийся, стерильный, немутагенный хирургический шовный материал, состоящий из натуральных белковых шёлковых волокон - фиброин. Этот белок получают от одомашненных гусениц тутового шелкопряда Bombyx mori семейства Bombycidae. Для получения хирургического шовного материала SOFSILK™ шёлковые волокна обрабатываются для удаления серициновой смазки, отбеливаются, сплетаются. Плетёные нити равномерно покрываются силиконом или особой восковой рецептурой для снижения капиллярности и увеличения смачиваемости, обеспечивающей оптимальные манипуляционные свойства, плавное прохождение через ткани и опускание узла.
Показания	Шовный материал Sof silk™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования, применения в общей, торакальной, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии, ортопедии и нейрохирургии.
Применение	Шовный материал Sof silk™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
Срок поддержки раны	Шовный материал Sof silk™ является нерассасывающимся. Деградация протеиновых волокон шелка in vivo может приводить к частичной потере прочности шовного материала со временем.
Стерилизация	Гамма облучение.
Упаковка	Шовный материал Sof silk™ выпускается белым или окрашенным в черный цвет и покрыт или силиконом, или специальной восковой рецептурой, размерами от 2 USP (5 EP) до 8-0 USP (0.4 EP). Стерильный шовный материал Sof silk™ поставляется с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12,24 или 36 шт.

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.



ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 12 мм 	5-0	1	45	Чёрный	36	Покрытие воском	S-1173
3/8 круга 16 мм 	6-0	0.7	45	Чёрный	36	Покрытие силиконом	SS-681
	5-0	1	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-673
	4-0	1.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-645
	3-0	2	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-745
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-682
	5-0	1	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-652
	4-0	1.5	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-683
	3-0	2	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-694
	3-0	2	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-654
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-656
3/8 круга 24 мм 	4-0	1.5	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-629
	3-0	2	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-684
	2-0	3	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-695
	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-785
3/8 круга 26 мм 	2-0	3	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-685
3/8 круга 30 мм 	3-0	2	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-675
	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-679
	0	3.5	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-678
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-680
	1	4	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-689
3/8 круга 39 мм 	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-648
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-647
	1	4	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-646
	2	5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-651

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 24 мм 	3-0	2	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-632
	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-633
Прямая 51 мм 	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-523
Прямая 60 мм 	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-623
	2-0	3	100	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-723
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-624

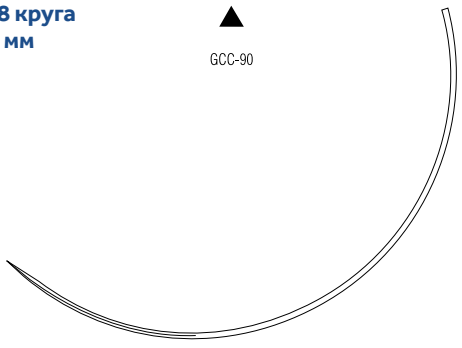
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 11 мм 	6-0	0.7	45	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие силиконом	SS-5639
3/8 круга 13 мм 	5-0	1	45	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	SS-5640

ПРЕМИУМ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / PREMIUM POINT REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 13 мм 	4-0	1.5	45	Чёрный	12	Покрытие воском	S-1789-K

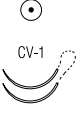


РЕЖУЩАЯ / CONVENTIONAL CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 90 мм 	2-0	3	100	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-791
	0	3.5	100	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-792
	1	4	100	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-793
	2	5	100	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-794

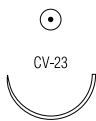
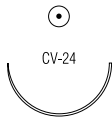
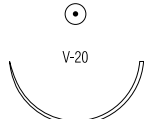

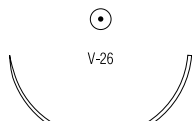

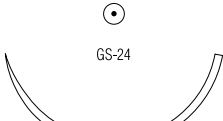
ПРЕМИУМ ШПАТЕЛЬ / PREMIUM SPATULA

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 6.3 мм 	8-0	0.4	45	Чёрный	12	Surgalloy™ Покрытие силиконом	S-1734-K

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 9 мм 	7-0	0.5	45	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие силиконом	VS-809
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие силиконом	VS-889
	5-0	1	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	VS-890
3/8 круга 17 мм 	4-0	1.5	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	VS-881
	3-0	2	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	VS-882

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
1/2 круга 17 мм 	4-0	1.5	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	VS-871
	3-0	2	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	VS-872
1/2 круга 20 мм 	4-0	1.5	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	GS-451
	3-0	2	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	GS-452
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	75	Чёрный	36	Покрытие воском	GS-832
	2-0	3	5x45	Чёрный	24	D-Tach™ Покрытие воском	GS-62-M
	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	GS-833
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	GS-834
1/2 круга 30 мм 	3-0	2	75	Чёрный	36	Покрытие воском	GS-822
	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	GS-823
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	GS-824
1/2 круга 37 мм 	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	VS-844
	1	4	75	Чёрный	36	Покрытие воском	VS-845
	2	5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	VS-846
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-423
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-424
1/2 круга 40 мм 	2	5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-575

V-LOC™ 90

Рассасывающееся устройство для ушивания ран

Надёжно. Быстро. Эффективно.

Революционная технология
сопоставления тканей
без завязывания узлов.

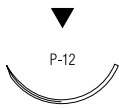
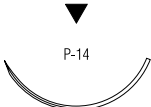



Описание материала	<p>V-Loc™ 90 - рассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой рассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов.</p> <p>V-Loc™ 90 изготовлен из синтетического полиэфира: композиции гликолида, диаксанона и триметилен карбоната. V-loc 90 выпускается как неокрашенным, так и фиолетовым. Рассасывающееся устройство для закрытия ран стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур.</p>
Показания	<p>V-Loc™ 90 предназначен для сопоставления мягких тканей, когда возможно применение рассасывающихся шовных материалов. Безопасность и эффективность V-Loc™ 90 не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии.</p>
Применение	<p>V-Loc™ 90 вызывает лишь минимальную воспалительную реакцию тканей, которая связана с постепенным формированием вокруг нити фиброзной соединительной ткани. Постепенная потеря прочности и полная абсорбция V-Loc™ 90 происходит путем гидролиза: рассасывающееся устройство для закрытия ран разрушается до гликолевой и диаксаноновой кислот, пропандиола и углекислого газа, которые метаболизируются в организме.</p>
Срок поддержки раны	<p>Не менее 90% начальной прочности сохраняется в течение первой недели, не 75% в течение второй недели после имплантации.</p>
Стерилизация	<p>Окись этилена.</p>
Рассасывание	<p>Абсорбция начинается с потери прочности без существенной потери массы. Исследования на животных показывают, что полное рассасывание заканчивается между 90 и 110 днями.</p>
Упаковка	<p>Шовный материал V-LOC™ 90 производится в бесцветном варианте или окрашенном в фиолетовый цвет. Возможные варианты размеров от 2-0 USP (3 EP) до 4-0 USP (1.5 EP). Стерильный шовный материал поставляется с различными видами перманентно зафиксированных игл. Формируется в коробках по 12 шт.</p> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>

V-Loc™ 90

V-Loc™ 90 - рассасывающееся устройство для ушивания ран с однонаправленными насечками со средним сроком рассасывания.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	15	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0003
	4-0	1.5	30	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0013
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0023
	4-0	1.5	58	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0033
	3-0	2	15	Неокрашенный	12		VLOCM0004
	3-0	2	30	Неокрашенный	12		VLOCM0014
	3-0	2	45	Неокрашенный	12		VLOCM0024
	3-0	2	58	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0034
	2-0	3	15	Неокрашенный	12		VLOCM0005
3/8 круга 24 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0123
	3-0	2	30	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0114
	3-0	2	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0124
	3-0	2	58	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0134
	2-0	3	15	Неокрашенный	12		VLOCM0125
	2-0	3	58	Неокрашенный	12		VLOCM0135
3/8 круга 30 мм 	3-0	2	45	Неокрашенный			VLOCM1824

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 17 мм		4-0	1.5	15	Фиолетовый	12		VLOCM1203
		3-0	2	15	Фиолетовый	12	Surgalloy™	VLOCM1204
1/2 круга 17 мм		3-0	2	15	Фиолетовый	12	Surgalloy™	VLOCM0804
		3-0	2	23	Фиолетовый	12	Surgalloy™	VLOCM0844
		3-0	2	30	Фиолетовый	12		VLOCM0814
1/2 круга 26 мм		4-0	1.5	15	Фиолетовый	12	Surgalloy™	VLOCM0603
		3-0	2	15	Фиолетовый	12		VLOCM0604
		3-0	2	23	Фиолетовый	12	Surgalloy™	VLOCM0644
		3-0	2	30	Фиолетовый	12		VLOCM0614
		3-0	2	45	Фиолетовый	12		VLOCM0624
		2-0	3	45	Фиолетовый	12		VLOCM0625
1/2 круга 27 мм		2-0	3	15	Фиолетовый	12		VLOCM2105
		2-0	3	23	Фиолетовый	12		VLOCM2145
		2-0	3	30	Фиолетовый	12		VLOCM2115
1/2 круга 30 мм		3-0	2	23	Фиолетовый	12		VLOCM1544
		2-0	3	23	Фиолетовый	12		VLOCM1545
1/2 круга 37 мм		2-0	3	15	Фиолетовый	12		VLOCM0305
		2-0	3	23	Фиолетовый	12		VLOCM0345
		2-0	3	30	Фиолетовый	12		VLOCM0315
5/8 круга 27 мм		3-0	2	15	Фиолетовый	12		VLOCM1704
		3-0	2	23	Фиолетовый	12		VLOCM1744

V-LOC™ 180

Рассасывающееся устройство для ушивания ран

Надёжно. Быстро. Эффективно.



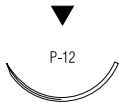

Революционная технология
сопоставления тканей
без завязывания узлов.

Описание материала	<p>V-Loc™ 180 – рассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой рассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов. V-Loc™ 180 изготовлен из сополимера гликолевой кислоты и триметилен карбоната.</p> <p>V-Loc™ 180 выпускается как неокрашенным, так и зеленым.</p> <p>Рассасывающееся устройство для закрытия ран стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур.</p>
Показания	<p>V-Loc™ 180 предназначен для сопоставления мягких тканей, когда возможно применение рассасывающихся шовных материалов. Безопасность и эффективность V-Loc™ 180 не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии.</p>
Применение	<p>Исследования на животных показали, что V-Loc™ 180 вызывает лишь минимальную реакцию тканей, которая связана с имплантацией инородного тела в зависимости от окружающих тканей. Тканевая реакция исчезает по мере рассасывания</p> <p>V-Loc™ 180. Эксперименты на животных убедительно доказали отсутствие антигенной активности, системной токсичности, канцерогенности, мутагенности, тератогенности и негативных эффектов на репродуктивные функции организма.</p>
Срок поддержки раны	<p>Исследования демонстрируют следующую потерю прочности в узле в процентах по USP и EP, в зависимости от диаметра нити. Примерно 80% прочности сохраняются в первую неделю, 75% в течение второй недели и 65% через три недели после имплантации.</p>
Стерилизация	<p>Окись этилена.</p>
Рассасывание	<p>Абсорбция начинается с потери прочности без существенной потери массы. Исследования на животных показывают, что полное рассасывание заканчивается через 6 месяцев.</p>
Упаковка	<p>Шовный материал V-LOC™ 180 производится в бесцветном варианте или окрашенном в зеленый цвет. Возможные варианты размеров от 0 USP (3.5 EP) до 4-0 USP (1.5 EP). Стерильный шовный материал поставляется с различными видами перманентно зафиксированных игл.</p> <p>Формируется в коробках по 12 шт.</p>


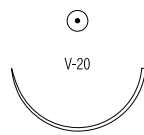
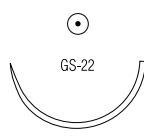
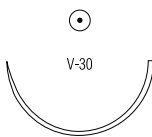
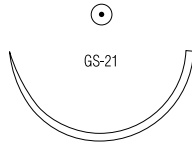
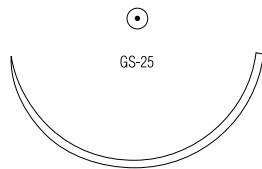
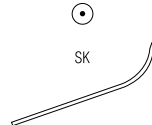
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

V-Loc™ 180

V-Loc™ 90 - рассасывающееся устройство для ушивания ран с однонаправленными насечками с длительным сроком рассасывания.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING							
Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCL0023
	4-0	1.5	58	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCL0033
	3-0	2	15	Неокрашенный	12		VLOCL0004
	3-0	2	30	Неокрашенный	12		VLOCL0014
	3-0	2	45	Неокрашенный	12		VLOCL0024
	3-0	2	60	Неокрашенный	12		VLOCL0034
	2-0	3	45	Неокрашенный	12		VLOCL0025
3/8 круга 24 мм 	3-0	2	30	Неокрашенный	12		VLOCL0114
	3-0	2	45	Неокрашенный	12		VLOCL0124
	3-0	2	60	Неокрашенный	12		VLOCL0134
	2-0	3	60	Неокрашенный	12		VLOCL0135

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 17 мм 	4-0	1.5	15	Зеленый	12		VLOCL0803
	4-0	1.5	30	Зеленый	12	Surgalloy™	VLOCL0813
	3-0	2	15	Зеленый	12		VLOCL0804
	3-0	2	23	Зеленый	12	Surgalloy™	VLOCL0844
	3-0	2	30	Зеленый	12		VLOCL0814
	3-0	2	45	Зеленый	12		VLOCL0824
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	30	Зеленый	12		VLOCL0613
	3-0	2	15	Зеленый	12		VLOCL0604
	3-0	2	23	Зеленый	12	Surgalloy™	VLOCL0644
	3-0	2	30	Зеленый	12	Surgalloy™	VLOCL0614
	3-0	2	45	Зеленый	12	Surgalloy™	VLOCL0624
	2-0	3	30	Зеленый	12		VLOCL0615
	2-0	3	45	Зеленый	12		VLOCL0625
1/2 круга 27 мм 	2-0	3	23	Зеленый	12		VLOCL2145
1/2 круга 30 мм 	3-0	2	23	Зеленый	12		VLOCL1544
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	30	Зеленый	12		VLOCL0315
	2-0	3	45	Зеленый	12		VLOCL0325
	2-0	3	60	Зеленый	12		VLOCL0335
	0	3.5	30	Зеленый	12		VLOCL0316
	0	3.5	30	Зеленый	12		VLOCL0316
	0	3.5	45	Зеленый	12		VLOCL0326
	0	3.5	60	Зеленый	12		VLOCL0336
1/2 круга 48 мм 	0	3.5	45	Зеленый	12		VLOCL0426
	0	3.5	60	Зеленый	12		VLOCL0436
Лыжа 23 мм 	3-0	2	23	Зеленый	12		VLOCL2744

V-LOC™ PBT

Нерассасывающееся устройство для ушивания ран из полибутиэстера

Надёжно. Быстро. Эффективно.

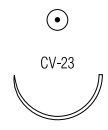
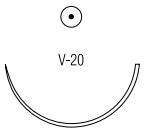
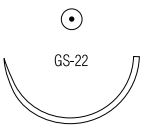
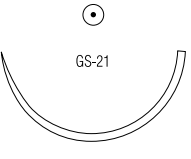


Революционная технология
сопоставления тканей
без завязывания узлов.

Описание материала	V-Loc™ PBT – нерассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой нерассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов. V-Loc™ PBT изготовлен из полибутэстера – кополимера бутилена терефталата и политетраметилена-гликолевого эфира. V-Loc™ PBT выпускается окрашенным в синий цвет. Устройство стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур.
Показания	V-Loc™ PBT предназначен для сопоставления мягких тканей, когда необходима их перманентная поддержка. Безопасность и эффективность V-Loc™ PBT не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии.
Применение	Исследования на животных показали, что V-Loc™ PBT вызывает лишь минимальную реакцию тканей, которая связана с имплантацией инородного тела в зависимости от окружающих тканей. Эксперименты на животных убедительно доказали отсутствие антигенной активности, системной токсичности, канцерогенности, мутагенности, тератогенности и негативных эффектов на репродуктивные функции организма.
Срок поддержки раны	Постоянная поддержка.
Стерилизация	Гамма излучение.
Рассасывание	Не рассасывается.
Упаковка	Шовный материал V-LOC™ PBT производится в окрашенном в синий цвет. Возможные варианты размеров от 1 USP (4 EP) до 3-0 USP (2 EP). Стерильный шовный материал поставляется с различными видами перманентно зафиксированных игл. Формируется в коробках по 12 шт.
	Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

V-Loc™ PBT

V-Loc™ PBT - нерассасывающееся устройство для ушивания ран с однонаправленными насечками.

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT								
Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 17 мм		3-0	2	30	Синий	12	Surgalloy™	VLOCN0814
1/2 круга 26 мм		2-0	3	30	Синий	12		VLOCN0615
		3-0	2	23	Синий	12		VLOCN0644
1/2 круга 27 мм		0	3.5	45	Синий	12		VLOCN1126
1/2 круга 37 мм		1	4	45	Синий	12		VLOCN0327
		0	3.5	45	Синий	12		VLOCN0326
		2-0	3	45	Синий	12		VLOCN0325

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
2-CL-852	Polysorb™	25	88861968-61	Surgilon™	108	88863001-72	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861727-41	Monosof™ / Dermalon™	93	88861971-71	Surgilon™	108	88863002-62	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861727-51	Monosof™ / Dermalon™	93	88861982-51	Surgilon™	107	88863003-32	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861741-11	Monosof™ / Dermalon™	92	88861985-51	Surgilon™	107	88863003-42	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861741-21	Monosof™ / Dermalon™	92	88861995-31	Surgilon™	108	88863003-52	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861742-31	Monosof™ / Dermalon™	95	88861995-41	Surgilon™	108	88863008-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861742-41	Monosof™ / Dermalon™	95	88862011-51	Surgilon™	108	88863008-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861744-41	Monosof™ / Dermalon™	93	88862222-69	Steel™	88	88863012-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861744-51	Monosof™ / Dermalon™	93	88862224-49	Steel™	88	88863017-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	74
88861750-41	Monosof™ / Dermalon™	93	88862224-69	Steel™	88	88863017-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	74
88861756-21	Monosof™ / Dermalon™	92	88862224-89	Steel™	88	88863023-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861756-31	Monosof™ / Dermalon™	92	88862226-69	Steel™	88	88863023-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861756-41	Monosof™ / Dermalon™	92	88862345-53	Steel™	89	88863023-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861756-51	Monosof™ / Dermalon™	92	88862392-49	Steel™	89	88863026-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	68
88861757-31	Monosof™ / Dermalon™	92	88862392-69	Steel™	89	88863026-81	Ti-Cron™ / Surgidac™	68
88861757-41	Monosof™ / Dermalon™	92	88862393-69	Steel™	89	88863027-79	Ti-Cron™ / Surgidac™	68
88861799-41	Monosof™ / Dermalon™	93	88862393-89	Steel™	89	88863028-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	68
88861799-51	Monosof™ / Dermalon™	93	88862396-89	Steel™	89	88863046-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861883-51	Surgilon™	107	88862407-63	Steel™	88	88863047-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861883-61	Surgilon™	107	88862408-83	Steel™	88	88863047-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861883-71	Surgilon™	107	88862410-89	Steel™	88	88863048-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861899-51	Surgilon™	106	88862412-89	Steel™	88	88863050-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861902-61	Surgilon™	106	88862413-83	Steel™	88	88863050-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861906-42	Surgilon™	106	88862414-89	Steel™	89	88863050-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861906-52	Surgilon™	106	88862420-09	Steel™	88	88863052-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	74
88861914-83	Surgilon™	106	88862420-83	Steel™	88	88863054-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861915-71	Surgilon™	107	88862424-89	Steel™	88	88863054-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861917-61	Surgilon™	106	88862586-43	Flexon™	84	88863054-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861917-71	Surgilon™	106	88862592-43	Flexon™	84	88863054-81	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861917-82	Surgilon™	106	88862597-63	Flexon™	84	88863055-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	66
88861918-31	Surgilon™	106	88862615-53	Flexon™	84	88863056-89	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861918-41	Surgilon™	106	88862617-53	Flexon™	84	88863059-53	Ti-Cron™ / Surgidac™	69
88861918-51	Surgilon™	106	88862623-53	Flexon™	84	88863062-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	69
88861919-31	Surgilon™	106	88862627-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	88863062-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	69
88861919-41	Surgilon™	106	88862631-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	88863065-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861919-51	Surgilon™	106	88862636-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	88863070-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	67
88861919-61	Surgilon™	106	88862658-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	88863082-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	73
88861919-71	Surgilon™	106	88862775-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	88863082-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	73
88861920-62	Surgilon™	106	88862775-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	88863083-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	71
88861920-72	Surgilon™	106	88862775-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	88863084-46	Ti-Cron™ / Surgidac™	71
88861920-93	Surgilon™	106	88862801-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	88863086-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	71
88861922-71	Surgilon™	107	88862808-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863087-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	71
88861932-51	Surgilon™	107	88862815-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	88863087-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	71
88861934-53	Surgilon™	107	88862839-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88863087-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	71
88861935-41	Surgilon™	107	88862862-34	Ti-Cron™ / Surgidac™	69	88863088-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	75
88861935-51	Surgilon™	107	88862877-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863088-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	75
88861951-41	Surgilon™	108	88862879-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863090-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	73
88861951-51	Surgilon™	108	88862880-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863090-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	73
88861951-61	Surgilon™	108	88862880-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863090-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	73
88861964-51	Surgilon™	108	88862947-53	Ti-Cron™ / Surgidac™	69	88863091-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	71
88861964-61	Surgilon™	108	88862981-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	88863092-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	76

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
88863092-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	88863227-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88863395-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	68
88863093-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	88863229-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	88863395-81	Ti-Cron™ / Surgidac™	68
88863093-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	88863229-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886400241	Novafil™	100
88863097-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88863230-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886402721	Novafil™	101
88863097-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88863233-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	8886440023	Novafil™	101
88863103-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	88863235-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	8886440123	Novafil™	101
88863107-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	88863240-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	8886440133	Novafil™	101
88863111-79	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	8886324931	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886440233	Novafil™	101
88863113-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88863256-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886440243	Novafil™	101
88863113-81	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88863256-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886440343	Novafil™	101
88863119-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	88863256-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886441003	Novafil™	101
88863125-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863256-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886441013	Novafil™	101
88863128-82	Ti-Cron™ / Surgidac™	67	88863257-62	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886441023	Novafil™	101
88863139-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	88863267-42	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886441853	Novafil™	101
88863154-09	Ti-Cron™ / Surgidac™	68	88863269-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	8886441913	Novafil™	100
88863155-81	Ti-Cron™ / Surgidac™	68	88863271-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	8886441923	Novafil™	100
88863157-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863271-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	8886441933	Novafil™	100
88863159-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863271-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	8886442023	Novafil™	100
88863159-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863274-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	8886442033	Novafil™	100
88863159-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863277-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	8886442043	Novafil™	100
88863160-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863280-11	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886442153	Novafil™	100
88863160-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863280-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886442233	Novafil™	100
88863160-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863280-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886442243	Novafil™	100
88863163-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	69	88863280-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886442253	Novafil™	100
88863163-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	69	88863290-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	8886442441	Novafil™	100
88863167-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	8886329541	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886442451	Novafil™	100
88863167-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	88863297-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886442461	Novafil™	100
88863167-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	88863306-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886442651	Novafil™	100
88863182-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	88863309-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	68	8886443671	Novafil™	100
88863182-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	88863309-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	68	8886445041	Novafil™	102
88863185-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	88863314-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	8886445241	Novafil™	102
88863185-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	88863323-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	8886445251	Novafil™	102
88863185-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	88863324-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886445261	Novafil™	102
88863185-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	88863336-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886445561	Novafil™	102
88863185-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	88863356-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886445571	Novafil™	102
88863186-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88863365-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	8886445951	Novafil™	102
88863186-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88863369-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	8886446371	Novafil™	102
88863186-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88863369-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88864703-01V	Vascufil™	80
88863186-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88863369-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88864703-11V	Vascufil™	80
88863202-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	88863372-82	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88864704-01V	Vascufil™	80
88863204-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863376-81	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88864704-11V	Vascufil™	80
88863205-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88863380-52	Ti-Cron™ / Surgidac™	66	88864705-01V	Vascufil™	80
88863205-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88863380-62	Ti-Cron™ / Surgidac™	66	88864705-11V	Vascufil™	80
88863205-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88863380-72	Ti-Cron™ / Surgidac™	66	88864709-11V	Vascufil™	80
88863212-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	88863380-82	Ti-Cron™ / Surgidac™	66	88864710-11V	Vascufil™	80
88863218-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863381-09	Ti-Cron™ / Surgidac™	66	88864710-21V	Vascufil™	80
88863219-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863381-89	Ti-Cron™ / Surgidac™	66	88864711-21V	Vascufil™	80
88863221-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	88863385-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88864714-11V	Vascufil™	81
8886322631	Ti-Cron™ / Surgidac™	70	88863393-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	88864716-31V	Vascufil™	80
88863222-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	88863395-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	68	88864719-21V	Vascufil™	80
88863227-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	88863395-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	68	88864719-31V	Vascufil™	80

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
88864722-21V	Vascufil™	80	8886621321	Maxon™	48	8886664141	Maxon™	44
88864730-51V	Vascufil™	81	8886621721	Maxon™	47	8886664151	Maxon™	44
88864731-31V	Vascufil™	81	8886621721	Maxon™	48	8886674441	Maxon™	45
88864731-41V	Vascufil™	81	8886621731	Maxon™	47	8886674451	Maxon™	45
88864731-51V	Vascufil™	81	8886621731	Maxon™	48	8886674551	Maxon™	45
88864734-11V	Vascufil™	81	8886621741	Maxon™	47	8886675551	Maxon™	45
88864734-21V	Vascufil™	81	8886621741	Maxon™	48	8886675561	Maxon™	45
88864739-21V	Vascufil™	80	8886622131	Maxon™	47	8886675571	Maxon™	45
88864739-31V	Vascufil™	80	8886622131	Maxon™	48	8886676971	Maxon™	45
88864741-11V	Vascufil™	80	8886622943	Maxon™	47	8886678771	Maxon™	45
88864741-21V	Vascufil™	80	8886622943	Maxon™	48	8886690831	Maxon™	45
88864742-15V	Vascufil™	80	8886623331	Maxon™	47	8886690841	Maxon™	45
88864750-31V	Vascufil™	81	8886623331	Maxon™	48	88868675-01	Ti-Cron™ / Surgidac™	76
88864750-41V	Vascufil™	81	8886623341	Maxon™	47	88868677-01	Ti-Cron™ / Surgidac™	76
88864750-51V	Vascufil™	81	8886623341	Maxon™	48	88868678-01	Ti-Cron™ / Surgidac™	76
88864756-11V	Vascufil™	80	8886623351	Maxon™	47	88868679-01	Ti-Cron™ / Surgidac™	76
88864794-01V	Vascufil™	81	8886623351	Maxon™	48	88868682-01	Ti-Cron™ / Surgidac™	76
8886449041	Novafil™	100	8886623531	Maxon™	47	C-214	Caprosyn™	30
8886449051	Novafil™	100	8886623531	Maxon™	48	CC-1945G	Caprosyn™	33
8886453863	Novafil™	102	8886623541	Maxon™	47	CC-543	Caprosyn™	30
8886455441	Novafil™	100	8886623541	Maxon™	48	CC-658	Caprosyn™	32
8886458243	Novafil™	101	8886623741	Maxon™	49	CC-801	Caprosyn™	32
8886600741	Maxon™	44	8886623761	Maxon™	49	CC-802	Caprosyn™	32
8886600751	Maxon™	44	8886627761	Maxon™	50	CC-803	Caprosyn™	32
8886601563	Maxon™	44	8886629571	Maxon™	50	CC-810	Caprosyn™	32
8886603641	Maxon™	47	8886631962	Maxon™	49	CC-811	Caprosyn™	32
8886603641	Maxon™	48	8886631972	Maxon™	49	CC-812	Caprosyn™	32
8886605731	Maxon™	47	8886639053	Maxon™	45	CC-813	Caprosyn™	32
8886605731	Maxon™	48	8886640351	Maxon™	49	CC-830	Caprosyn™	32
8886605941	Maxon™	45	8886640451	Maxon™	49	CC-844	Caprosyn™	32
8886611831	Maxon™	44	8886641971	Maxon™	49	CC-845	Caprosyn™	32
8886612411	Maxon™	46	8886645661	Maxon™	49	CC-883	Caprosyn™	32
8886612421	Maxon™	46	8886646221	Maxon™	47	CC-884	Caprosyn™	32
8886612701	Maxon™	46	8886646221	Maxon™	48	CC-885	Caprosyn™	32
8886612711	Maxon™	46	8886646231	Maxon™	47	CC-904	Caprosyn™	33
8886613431	Maxon™	47	8886646231	Maxon™	48	CC-905	Caprosyn™	33
8886613431	Maxon™	48	8886653211	Maxon™	46	CC-913	Caprosyn™	32
8886613901	Maxon™	46	8886653221	Maxon™	46	CC-914	Caprosyn™	32
8886614501	Maxon™	46	8886653311	Maxon™	46	CC-915	Caprosyn™	32
8886614811	Maxon™	46	8886660521	Maxon™	44	CC-923	Caprosyn™	32
8886614921	Maxon™	47	8886660531	Maxon™	44	CC-924	Caprosyn™	32
8886614921	Maxon™	48	8886660821	Maxon™	44	CC-925	Caprosyn™	32
8886620721	Maxon™	47	8886660831	Maxon™	44	CC-983	Caprosyn™	30
8886620721	Maxon™	48	8886660841	Maxon™	44	CD-3113-K	Ti-Cron™ / Surgidac™	69
8886620731	Maxon™	47	8886661231	Maxon™	44	CD-3123-K	Ti-Cron™ / Surgidac™	69
8886620731	Maxon™	48	8886661831	Maxon™	44	CL-030	Polysorb™	27
8886620741	Maxon™	47	8886661841	Maxon™	44	CL-047	Polysorb™	27
8886620741	Maxon™	48	8886661851	Maxon™	44	CL-055	Polysorb™	27
8886621311	Maxon™	47	8886662801	Maxon™	46	CL-10-MG	Polysorb™	22
8886621311	Maxon™	48	8886663931	Maxon™	44	CL-11-MG	Polysorb™	22
8886621321	Maxon™	47	8886663941	Maxon™	44	CL-201-M	Polysorb™	22

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
CL-21-MG	■ Polysorb™	23	CL-824	■ Polysorb™	23	CL-933	■ Polysorb™	17
CL-232	■ Polysorb™	21	CL-824-L	■ Polysorb™	23	CL-936	■ Polysorb™	17
CL-239	■ Polysorb™	22	CL-825	■ Polysorb™	23	CL-937	■ Polysorb™	17
CL-31-MG	■ Polysorb™	23	CL-833	■ Polysorb™	17	CL-941	■ Polysorb™	26
CL-330	■ Polysorb™	21	CL-835-L	■ Polysorb™	23	CL-942	■ Polysorb™	26
CL-457	■ Polysorb™	19	CL-837	■ Polysorb™	26	CL-943	■ Polysorb™	26
CL-460	■ Polysorb™	20	CL-838	■ Polysorb™	26	CL-944	■ Polysorb™	26
CL-461	■ Polysorb™	20	CL-839	■ Polysorb™	26	CL-945	■ Polysorb™	26
CL-510	■ Polysorb™	26	CL-840	■ Polysorb™	26	CL-946	■ Polysorb™	26
CL-511	■ Polysorb™	26	CL-841	■ Polysorb™	26	CL-948	■ Polysorb™	25
CL-513	■ Polysorb™	26	CL-842	■ Polysorb™	22	CL-949	■ Polysorb™	25
CL-516	■ Polysorb™	26	CL-844	■ Polysorb™	22	CL-950	■ Polysorb™	25
CL-517	■ Polysorb™	26	CL-855	■ Polysorb™	23	CL-951	■ Polysorb™	25
CL-528	■ Polysorb™	16	CL-862	■ Polysorb™	23	CL-953	■ Polysorb™	22
CL-533	■ Polysorb™	17	CL-863	■ Polysorb™	23	CL-954	■ Polysorb™	22
CL-534	■ Polysorb™	17	CL-864	■ Polysorb™	23	CL-955	■ Polysorb™	22
CL-543	■ Polysorb™	17	CL-865	■ Polysorb™	23	CL-957	■ Polysorb™	25
CL-544	■ Polysorb™	17	CL-866	■ Polysorb™	23	CL-964	■ Polysorb™	23
CL-568	■ Polysorb™	17	CL-867	■ Polysorb™	16	CL-968	■ Polysorb™	23
CL-569	■ Polysorb™	17	CL-868	■ Polysorb™	16	CL-971	■ Polysorb™	22
CL-5-M	■ Polysorb™	22	CL-869	■ Polysorb™	16	CL-974	■ Polysorb™	23
CL-602	■ Polysorb™	26	CL-870	■ Polysorb™	16	CL-992	■ Polysorb™	16
CL-603	■ Polysorb™	26	CL-871	■ Polysorb™	21	CLT-259	■ Polysorb™	25
CL-622-M	■ Polysorb™	23	CL-882	■ Polysorb™	21	CLT-952	■ Polysorb™	25
CL-63	■ Polysorb™	23	CL-883	■ Polysorb™	21	CLT-954	■ Polysorb™	25
CL-633-M	■ Polysorb™	23	CL-885	■ Polysorb™	21	CM-126	■ Biosyn™	38
CL-64-M	■ Polysorb™	23	CL-892	■ Polysorb™	20	CM-208	■ Biosyn™	38
CL-665-M	■ Polysorb™	23	CL-893	■ Polysorb™	20	CM-222	■ Biosyn™	37
CL-673-G	■ Polysorb™	24	CL-894	■ Polysorb™	20	CM-528	■ Biosyn™	36
CL-6-M	■ Polysorb™	22	CL-903	■ Polysorb™	23	CM-544	■ Biosyn™	36
CL-739	■ Polysorb™	26	CL-904	■ Polysorb™	23	CM-740L	■ Biosyn™	41
CL-740-L	■ Polysorb™	26	CL-905	■ Polysorb™	23	CM-767L	■ Biosyn™	40
CL-741-L	■ Polysorb™	26	CL-906	■ Polysorb™	23	CM-776L	■ Biosyn™	40
CL-769	■ Polysorb™	16	CL-911	■ Polysorb™	23	CM-780L	■ Biosyn™	41
CL-779	■ Polysorb™	23	CL-913	■ Polysorb™	23	CM-790L	■ Biosyn™	40
CL-801	■ Polysorb™	23	CL-914	■ Polysorb™	23	CM-810	■ Biosyn™	40
CL-802	■ Polysorb™	23	CL-915	■ Polysorb™	23	CM-811	■ Biosyn™	40
CL-803	■ Polysorb™	23	CL-916	■ Polysorb™	17	CM-812	■ Biosyn™	40
CL-804	■ Polysorb™	17	CL-917	■ Polysorb™	17	CM-813	■ Biosyn™	40
CL-805	■ Polysorb™	17	CL-918	■ Polysorb™	17	CM-816	■ Biosyn™	36
CL-809	■ Polysorb™	22	CL-919	■ Polysorb™	17	CM-831	■ Biosyn™	39
CL-810	■ Polysorb™	22	CL-922	■ Polysorb™	22	CM-832	■ Biosyn™	39
CL-811	■ Polysorb™	22	CL-923	■ Polysorb™	22	CM-844	■ Biosyn™	40
CL-812	■ Polysorb™	22	CL-924	■ Polysorb™	22	CM-845	■ Biosyn™	40
CL-813	■ Polysorb™	22	CL-925	■ Polysorb™	22	CM-879	■ Biosyn™	36
CL-814	■ Polysorb™	22	CL-926	■ Polysorb™	22	CM-882	■ Biosyn™	39
CL-815	■ Polysorb™	17	CL-927	■ Polysorb™	17	CM-883	■ Biosyn™	39
CL-816	■ Polysorb™	17	CL-928	■ Polysorb™	17	CM-884	■ Biosyn™	39
CL-817	■ Polysorb™	17	CL-929	■ Polysorb™	17	CM-904	■ Biosyn™	40
CL-818	■ Polysorb™	17	CL-931	■ Polysorb™	22	CM-905	■ Biosyn™	40
CL-823	■ Polysorb™	15	CL-932	■ Polysorb™	22	CM-914	■ Biosyn™	40















































ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
CM-922	Biosyn™	40	CV-2275G	Velosorb™ Fast	11	GC-122	Caprosyn™	32
CM-923	Biosyn™	40	CV-2279	Velosorb™ Fast	11	GC-123	Caprosyn™	32
CM-924	Biosyn™	40	CV-2280	Velosorb™ Fast	11	GC-124	Caprosyn™	32
CM-925	Biosyn™	40	CV-2293	Velosorb™ Fast	11	GC-321	Caprosyn™	32
CM-953	Biosyn™	40	CV-3100	Velosorb™ Fast	9	GC-322	Caprosyn™	32
CM-954	Biosyn™	40	CV-3110	Velosorb™ Fast	9	GC-323	Caprosyn™	32
CM-966	Biosyn™	40	CV-3120	Velosorb™ Fast	9	GL-120	Polysorb™	21
CN-723	Monosof™ / Dermalon™	96	CV-322	Velosorb™ Fast	10	GL-121	Polysorb™	21
CN-791	Monosof™ / Dermalon™	95	CV-323	Velosorb™ Fast	10	GL-122	Polysorb™	21
CN-793	Monosof™ / Dermalon™	95	CV-415	Velosorb™ Fast	9	GL-123	Polysorb™	21
CN-819	Monosof™ / Dermalon™	94	CV-416G	Velosorb™ Fast	9	GL-124	Polysorb™	21
CN-822	Monosof™ / Dermalon™	94	CV-417G	Velosorb™ Fast	9	GL-125	Polysorb™	21
CN-825-L	Monosof™ / Dermalon™	96	CV-418	Velosorb™ Fast	9	GL-126	Polysorb™	22
CN-830-L	Monosof™ / Dermalon™	96	CV-4721	Velosorb™ Fast	7	GL-127	Polysorb™	22
CP-411	Surgipro™ II / Surgipro™	59	CV-4731	Velosorb™ Fast	7	GL-128	Polysorb™	22
CP-412	Surgipro™ II / Surgipro™	59	CV-485	Velosorb™ Fast	7	GL-129	Polysorb™	22
CP-414	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-486	Velosorb™ Fast	7	GL-181	Polysorb™	20
CP-415	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-500G	Velosorb™ Fast	11	GL-182	Polysorb™	20
CP-423	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-501G	Velosorb™ Fast	11	GL-183	Polysorb™	20
CP-424	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-55	Velosorb™ Fast	10	GL-191	Polysorb™	20
CP-425	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-56	Velosorb™ Fast	10	GL-192	Polysorb™	20
CP-433	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-57	Velosorb™ Fast	10	GL-222	Polysorb™	21
CP-434	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-604	Velosorb™ Fast	10	GL-223	Polysorb™	21
CP-435	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-605	Velosorb™ Fast	10	GL-224	Polysorb™	21
CP-443	Surgipro™ II / Surgipro™	54	CV-606	Velosorb™ Fast	10	GL-225	Polysorb™	21
CP-455	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-7190	Velosorb™ Fast	11	GL-226	Polysorb™	21
CP-535	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-7191	Velosorb™ Fast	11	GL-282	Polysorb™	20
CP-824	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-8644	Velosorb™ Fast	6	GL-302	Polysorb™	19
CP-824-L	Surgipro™ II / Surgipro™	61	CV-8977	Velosorb™ Fast	6	GL-303	Polysorb™	19
CP-825	Surgipro™ II / Surgipro™	60	CV-8978	Velosorb™ Fast	6	GL-321	Polysorb™	21
CP-834-L	Surgipro™ II / Surgipro™	61	CV-8979	Velosorb™ Fast	6	GL-322	Polysorb™	21
CP-844	Surgipro™ II / Surgipro™	63	CV-8980	Velosorb™ Fast	6	GL-323	Polysorb™	21
CS-423	Sofsilk™	115	CV-9007G	Velosorb™ Fast	6	GL-332	Polysorb™	21
CS-424	Sofsilk™	115	CV-916	Velosorb™ Fast	11	GL-522	Polysorb™	19
CS-575	Sofsilk™	115	CV-917	Velosorb™ Fast	11	GL-523	Polysorb™	19
CS-791	Sofsilk™	114	CV-918	Velosorb™ Fast	11	GL-524	Polysorb™	19
CS-792	Sofsilk™	114	CV-919	Velosorb™ Fast	11	GL-881	Polysorb™	19
CS-793	Sofsilk™	114	CV-931G	Velosorb™ Fast	7	GL-884	Polysorb™	20
CS-794	Sofsilk™	114	CV-932G	Velosorb™ Fast	7	GL-885	Polysorb™	20
CV-0046	Velosorb™ Fast	11	CV-944	Velosorb™ Fast	10	GL-889	Polysorb™	19
CV-1002	Velosorb™ Fast	11	CV-945	Velosorb™ Fast	10	GL-890	Polysorb™	19
CV-1213	Velosorb™ Fast	9	CV-946	Velosorb™ Fast	10	GLS-121	Polysorb™	21
CV-1214	Velosorb™ Fast	9	CV-947	Velosorb™ Fast	10	GLS-122	Polysorb™	21
CV-1215	Velosorb™ Fast	9	CV-9590	Velosorb™ Fast	10	GLS-123	Polysorb™	21
CV-1324	Velosorb™ Fast	10	CV-9591	Velosorb™ Fast	10	GLS-323	Polysorb™	21
CV-1673	Velosorb™ Fast	10	CV-9592	Velosorb™ Fast	10	GLT-69-MG	Polysorb™	25
CV-1674G	Velosorb™ Fast	11	CV-9936G	Velosorb™ Fast	7	GM-121	Biosyn™	39
CV-2003G	Velosorb™ Fast	11	CV-9975G	Velosorb™ Fast	10	GM-122	Biosyn™	39
CV-2216	Velosorb™ Fast	11	EL-415	Polysorb™	24	GM-123	Biosyn™	39
CV-2217	Velosorb™ Fast	11	EL-450	Polysorb™	24	GM-125	Biosyn™	39
CV-2218	Velosorb™ Fast	11	GC-121	Caprosyn™	32	GM-181	Biosyn™	39

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
GM-183	Biosyn™	39	L-1745K	Polysorb™	27	LL-225	Polysorb™	15
GM-222	Biosyn™	39	L-1785K	Polysorb™	27	LL-226	Polysorb™	15
GM-223	Biosyn™	39	L-1787-K	Polysorb™	27	LL-322	Polysorb™	15
GM-281	Biosyn™	39	L-1792-K	Polysorb™	27	M-74	Biosyn™	36
GM-282	Biosyn™	39	L-23	Polysorb™	14	M-75	Biosyn™	36
GM-291	Biosyn™	39	L-23	Polysorb™	14	N-1603G	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-322	Biosyn™	39	L-26	Polysorb™	14	N-2500	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-323	Biosyn™	39	L-26	Polysorb™	14	N-2510	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-324	Biosyn™	39	L-27	Polysorb™	14	N-2512	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-326	Biosyn™	39	L-27	Polysorb™	14	N-2530	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-327	Biosyn™	39	L-2748-K	Polysorb™	27	N-2532	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-332	Biosyn™	39	L-2752K	Polysorb™	27	N-2543	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-421	Biosyn™	39	L-28	Polysorb™	14	N-2546	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-432	Biosyn™	39	L-28	Polysorb™	14	N-2547	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-67-M	Biosyn™	39	L-2800	Polysorb™	24	N-2548	Monosof™ / Dermalon™	97
GM-875	Biosyn™	38	L-3	Polysorb™	14	N-2714-K	Monosof™ / Dermalon™	95
GMM-341L	Maxon™	49	L-3	Polysorb™	14	N-2716-K	Monosof™ / Dermalon™	95
GMM-343L	Maxon™	49	L-33	Polysorb™	14	N-2760-K	Monosof™ / Dermalon™	95
GMM-344L	Maxon™	49	L-33	Polysorb™	14	N-2770-K	Monosof™ / Dermalon™	95
GMM-496L	Maxon™	50	L-36	Polysorb™	14	N-64	Monosof™ / Dermalon™	92
GMM-497L	Maxon™	50	L-36	Polysorb™	14	P-2756K	Surgipro™ II / Surgipro™	56
GMM-632L	Maxon™	49	L-38	Polysorb™	14	S-1173	Sofsilk™	112
GMM-634L	Maxon™	49	L-38	Polysorb™	14	S-1734-K	Sofsilk™	114
GMM-806L	Maxon™	50	L-39	Polysorb™	14	S-1789-K	Sofsilk™	113
GMM-807L	Maxon™	50	L-39	Polysorb™	14	SBS-1883G	Surgilon™	108
GMM-873L	Maxon™	50	L-40	Polysorb™	14	SBS-1884G	Surgilon™	108
GMMT-90L	Maxon™	50	L-40	Polysorb™	14	SBS-1928G	Surgilon™	108
GN-283	Monosof™ / Dermalon™	96	L-403	Polysorb™	14	SC-3625G	Caprosyn™	31
GN-284	Monosof™ / Dermalon™	96	L-403	Polysorb™	14	SC-3626G	Caprosyn™	31
GP-282	Surgipro™ II / Surgipro™	61	L-404	Polysorb™	14	SC-5587G	Caprosyn™	31
GS-451	Sofsilk™	115	L-404	Polysorb™	14	SC-5590G	Caprosyn™	31
GS-452	Sofsilk™	115	L-405	Polysorb™	14	SC-5616G	Caprosyn™	31
GS-62-M	Sofsilk™	115	L-405	Polysorb™	14	SC-5617G	Caprosyn™	31
GS-822	Sofsilk™	115	L-41	Polysorb™	14	SC-5618G	Caprosyn™	31
GS-823	Sofsilk™	115	L-41	Polysorb™	14	SC-5626G	Caprosyn™	31
GS-824	Sofsilk™	115	L-42	Polysorb™	14	SC-5637G	Caprosyn™	31
GS-832	Sofsilk™	115	L-42	Polysorb™	14	SC-5638G	Caprosyn™	31
GS-833	Sofsilk™	115	L-73	Polysorb™	14	SC-5679	Caprosyn™	31
GS-834	Sofsilk™	115	L-73	Polysorb™	14	SC-5686G	Caprosyn™	31
L-11	Polysorb™	14	L-76	Polysorb™	14	SC-5688G	Caprosyn™	31
L-11	Polysorb™	14	L-76	Polysorb™	14	SC-5689G	Caprosyn™	31
L-12	Polysorb™	14	LL-101	Polysorb™	15	SC-5690G	Caprosyn™	31
L-12	Polysorb™	14	LL-112	Polysorb™	15	SC-5779	Caprosyn™	31
L-13	Polysorb™	14	LL-113	Polysorb™	15	SC-5780G	Caprosyn™	31
L-13	Polysorb™	14	LL-114	Polysorb™	15	SC-586	Caprosyn™	30
L-14	Polysorb™	14	LL-115	Polysorb™	15	SC-587	Caprosyn™	30
L-14	Polysorb™	14	LL-116	Polysorb™	15	SC-643	Caprosyn™	30
L-15	Polysorb™	14	LL-221	Polysorb™	15	SC-644	Caprosyn™	30
L-15	Polysorb™	14	LL-222	Polysorb™	15	SC-690G	Caprosyn™	30
L-1669-K	Polysorb™	27	LL-223	Polysorb™	15	SC-691	Caprosyn™	30
L-1742K	Polysorb™	27	LL-224	Polysorb™	15	SC-692	Caprosyn™	30

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
SCD-2864G	 Ti-Cron™ / Surgidac™	69	SL-722	 Polysorb™	16	SN-653	 Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-1615	 Polysorb™	18	SL-822	 Polysorb™	15	SN-658	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-1625	 Polysorb™	18	SL-823	 Polysorb™	15	SN-659	 Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-1653	 Polysorb™	19	SM-3625	 Biosyn™	37	SN-660	 Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-1657	 Polysorb™	19	SM-431	 Biosyn™	38	SN-661	 Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-1689	 Polysorb™	18	SM-432	 Biosyn™	38	SN-661G	 Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-432	 Polysorb™	20	SM-5624	 Biosyn™	37	SN-662	 Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-5626	 Polysorb™	18	SM-5627	 Biosyn™	37	SN-663	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5627	 Polysorb™	18	SM-5628	 Biosyn™	37	SN-663G	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5628	 Polysorb™	18	SM-5637	 Biosyn™	37	SN-664	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5628G	 Polysorb™	18	SM-5638	 Biosyn™	37	SN-664-G	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5633	 Polysorb™	18	SM-5678	 Biosyn™	37	SN-665	 Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-5636	 Polysorb™	18	SM-5679	 Biosyn™	37	SN-666	 Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-5637	 Polysorb™	18	SM-5679G	 Biosyn™	37	SN-667	 Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-5638	 Polysorb™	18	SM-5687	 Biosyn™	37	SN-671	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5640	 Polysorb™	18	SM-5688	 Biosyn™	37	SN-673	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5640G	 Polysorb™	18	SM-5690	 Biosyn™	37	SN-674	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5641	 Polysorb™	18	SM-632	 Biosyn™	36	SN-681	 Monosoft™ / Dermalon™	94
SL-5678	 Polysorb™	18	SM-633	 Biosyn™	36	SN-688	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5679	 Polysorb™	18	SM-643	 Biosyn™	37	SN-689	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5680	 Polysorb™	18	SM-690	 Biosyn™	36	SN-694	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5686	 Polysorb™	18	SM-691	 Biosyn™	36	SN-728	 Monosoft™ / Dermalon™	94
SL-5687	 Polysorb™	18	SM-693	 Biosyn™	36	SN-747	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5687G	 Polysorb™	18	SM-822	 Biosyn™	36	SN-758	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-5688	 Polysorb™	18	SM-823	 Biosyn™	36	SN-762	 Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-5690	 Polysorb™	18	SMM-5043	 Maxon™	46	SN-763	 Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-586	 Polysorb™	16	SMM-5044	 Maxon™	46	SN-764	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-587	 Polysorb™	16	SMM-5431	 Maxon™	46	SN-771	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-607	 Polysorb™	15	SMM-5516	 Maxon™	46	SN-775	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-608	 Polysorb™	15	SMM-5526	 Maxon™	46	SN-776	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-611	 Polysorb™	16	SMM-5536	 Maxon™	46	SN-782	 Monosoft™ / Dermalon™	94
SL-612	 Polysorb™	16	SN-3697	 Monosoft™ / Dermalon™	94	SN-788	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-613	 Polysorb™	16	SN-5663	 Monosoft™ / Dermalon™	95	SN-790	 Monosoft™ / Dermalon™	93
SL-622	 Polysorb™	16	SN-5666	 Monosoft™ / Dermalon™	94	SN-871	 Monosoft™ / Dermalon™	92
SL-630	 Polysorb™	15	SN-5667	 Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-1606	 Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-632	 Polysorb™	16	SN-5668	 Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-1634	 Surgipro™ II / Surgipro™	56
SL-634	 Polysorb™	15	SN-5669	 Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-1635	 Surgipro™ II / Surgipro™	56
SL-635	 Polysorb™	15	SN-568	 Monosoft™ / Dermalon™	95	SP-1644	 Surgipro™ II / Surgipro™	56
SL-636	 Polysorb™	15	SN-5691	 Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-1693G	 Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-637	 Polysorb™	15	SN-5694	 Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-1696	 Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-642	 Polysorb™	17	SN-5696	 Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-1696G	 Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-643	 Polysorb™	17	SN-5697	 Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-1697	 Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-653	 Polysorb™	17	SN-5698	 Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-559G	 Surgipro™ II / Surgipro™	54
SL-690	 Polysorb™	15	SN-5699	 Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-5663	 Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-691	 Polysorb™	15	SN-615	 Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-5680G	 Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-692	 Polysorb™	15	SN-628	 Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-5681	 Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-693	 Polysorb™	15	SN-630	 Monosoft™ / Dermalon™	94	SP-5681G	 Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-694	 Polysorb™	15	SN-641	 Monosoft™ / Dermalon™	92	SP-5682	 Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-696	 Polysorb™	16	SN-644	 Monosoft™ / Dermalon™	92	SP-5682G	 Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-712	 Polysorb™	16	SN-648	 Monosoft™ / Dermalon™	93	SP-5686	 Surgipro™ II / Surgipro™	55
SL-721	 Polysorb™	16	SN-649	 Monosoft™ / Dermalon™	93	SP-5687	 Surgipro™ II / Surgipro™	55

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
SP-5687G	■ Surgipro™ II / Surgipro™	55	SS-675	■ Sofsilik™	112	SV-9911G	■ Velosorb™ Fast	8
SP-5692G	■ Surgipro™ II / Surgipro™	55	SS-678	■ Sofsilik™	112	SV-9913	■ Velosorb™ Fast	8
SP-5695	■ Surgipro™ II / Surgipro™	55	SS-679	■ Sofsilik™	112	SV-9915	■ Velosorb™ Fast	8
SP-5697G	■ Surgipro™ II / Surgipro™	55	SS-680	■ Sofsilik™	112	SV-9926	■ Velosorb™ Fast	7
SP-5698	■ Surgipro™ II / Surgipro™	55	SS-681	■ Sofsilik™	112	SV-9927	■ Velosorb™ Fast	7
SP-5699	■ Surgipro™ II / Surgipro™	55	SS-682	■ Sofsilik™	112	SV-9928	■ Velosorb™ Fast	7
SP-622	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SS-683	■ Sofsilik™	112	SV-9937G	■ Velosorb™ Fast	8
SP-622-BC	■ Surgipro™ II / Surgipro™	55	SS-684	■ Sofsilik™	112	SV-9938G	■ Velosorb™ Fast	8
SP-623	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SS-685	■ Sofsilik™	112	SV-9940G	■ Velosorb™ Fast	7
SP-623-BC	■ Surgipro™ II / Surgipro™	55	SS-689	■ Sofsilik™	112	SV-9941G	■ Velosorb™ Fast	7
SP-629	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SS-694	■ Sofsilik™	112	SV-9943	■ Velosorb™ Fast	9
SP-631	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SS-695	■ Sofsilik™	112	SV-9944G	■ Velosorb™ Fast	9
SP-649	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SS-723	■ Sofsilik™	113	SV-9961G	■ Velosorb™ Fast	7
SP-660	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SS-745	■ Sofsilik™	112	SVP-2251	■ Velosorb™ Fast	8
SP-660G	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SS-785	■ Sofsilik™	112	SVP-2285	■ Velosorb™ Fast	8
SP-661	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2238	■ Velosorb™ Fast	9	SVP-2294	■ Velosorb™ Fast	8
SP-661G	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2239	■ Velosorb™ Fast	9	SVP-2295	■ Velosorb™ Fast	8
SP-665	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2240	■ Velosorb™ Fast	9	SVP-2296	■ Velosorb™ Fast	8
SP-665G	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2252	■ Velosorb™ Fast	6	SVP-494	■ Velosorb™ Fast	8
SP-670	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2253	■ Velosorb™ Fast	6	UC-202	■ Caprosyn™	31
SP-675	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2286	■ Velosorb™ Fast	7	UC-203	■ Caprosyn™	31
SP-683	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2287	■ Velosorb™ Fast	7	UC-204	■ Caprosyn™	31
SP-683G	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2289	■ Velosorb™ Fast	6	UC-403	■ Caprosyn™	31
SP-684	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2294	■ Velosorb™ Fast	6	UC-404	■ Caprosyn™	31
SP-684G	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2296	■ Velosorb™ Fast	6	UC-863	■ Caprosyn™	32
SP-685	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2297	■ Velosorb™ Fast	6	UC-978	■ Caprosyn™	33
SP-689	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2298	■ Velosorb™ Fast	6	UL-046	■ Polysorb™	27
SP-690	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2299	■ Velosorb™ Fast	6	UL-101	■ Polysorb™	20
SP-868	■ Surgipro™ II / Surgipro™	54	SV-2930	■ Velosorb™ Fast	6	UL-102	■ Polysorb™	20
SPB-1233G	■ Novafil™	101	SV-424	■ Velosorb™ Fast	8	UL-201	■ Polysorb™	20
SPB-5143G	■ Novafil™	101	SV-425	■ Velosorb™ Fast	8	UL-202	■ Polysorb™	20
SPB-5433G	■ Novafil™	101	SV-426	■ Velosorb™ Fast	8	UL-203	■ Polysorb™	20
SPB-5633G	■ Novafil™	101	SV-439	■ Velosorb™ Fast	8	UL-204	■ Polysorb™	20
SPB-5843G	■ Novafil™	101	SV-4431	■ Velosorb™ Fast	6	UL-205	■ Polysorb™	20
SS-523	■ Sofsilik™	113	SV-4550	■ Velosorb™ Fast	7	UL-214	■ Polysorb™	20
SS-5639	■ Sofsilik™	113	SV-487G	■ Velosorb™ Fast	9	UL-215	■ Polysorb™	20
SS-5640	■ Sofsilik™	113	SV-488G	■ Velosorb™ Fast	9	UL-245	■ Polysorb™	24
SS-623	■ Sofsilik™	113	SV-4893	■ Velosorb™ Fast	8	UL-246	■ Polysorb™	24
SS-624	■ Sofsilik™	113	SV-493	■ Velosorb™ Fast	8	UL-876	■ Polysorb™	24
SS-629	■ Sofsilik™	112	SV-494	■ Velosorb™ Fast	8	UL-877	■ Polysorb™	24
SS-632	■ Sofsilik™	113	SV-496G	■ Velosorb™ Fast	8	UL-878	■ Polysorb™	24
SS-633	■ Sofsilik™	113	SV-497G	■ Velosorb™ Fast	8	UL-879	■ Polysorb™	24
SS-645	■ Sofsilik™	112	SV-6830	■ Velosorb™ Fast	8	UM-201	■ Biosyn™	38
SS-646	■ Sofsilik™	112	SV-6840	■ Velosorb™ Fast	8	UM-202	■ Biosyn™	38
SS-647	■ Sofsilik™	112	SV-834G	■ Velosorb™ Fast	9	UM-203	■ Biosyn™	38
SS-648	■ Sofsilik™	112	SV-835G	■ Velosorb™ Fast	9	UM-204	■ Biosyn™	38
SS-651	■ Sofsilik™	112	SV-844G	■ Velosorb™ Fast	9	UM-213	■ Biosyn™	38
SS-652	■ Sofsilik™	112	SV-845G	■ Velosorb™ Fast	9	UM-214	■ Biosyn™	38
SS-654	■ Sofsilik™	112	SV-935	■ Velosorb™ Fast	8	UM-215	■ Biosyn™	38
SS-656	■ Sofsilik™	112	SV-9909G	■ Velosorb™ Fast	9	UM-243	■ Biosyn™	41
SS-673	■ Sofsilik™	112	SV-9910G	■ Velosorb™ Fast	8	UM-245	■ Biosyn™	41

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
UM-345	Biosyn™	41	VLOCL0803	V-Loc™ 180	123	VLOCN0814	V-Loc™ PBT	126
UM-403	Biosyn™	38	VLOCL0804	V-Loc™ 180	123	VLOCN1126	V-Loc™ PBT	126
UM-877	Biosyn™	41	VLOCL0813	V-Loc™ 180	123	VP-151	Surgipro™ II / Surgipro™	59
UM-878	Biosyn™	41	VLOCL0814	V-Loc™ 180	123	VP-204-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
UM-879	Biosyn™	41	VLOCL0824	V-Loc™ 180	123	VP-205-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
UM-886	Biosyn™	38	VLOCL0844	V-Loc™ 180	123	VP-331-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
UM-977	Biosyn™	41	VLOCL1544	V-Loc™ 180	123	VP-421-X	Surgipro™ II / Surgipro™	59
UM-978	Biosyn™	41	VLOCL2145	V-Loc™ 180	123	VP-510-X	Surgipro™ II / Surgipro™	59
UM-986	Biosyn™	38	VLOCL2744	V-Loc™ 180	123	VP-511-X	Surgipro™ II / Surgipro™	59
UV-1382	Velosorb™ Fast	10	VLOCM0003	V-Loc™ 90	118	VP-520-X	Surgipro™ II / Surgipro™	59
VCD2030556MFE	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	VLOCM0004	V-Loc™ 90	118	VP-521-X	Surgipro™ II / Surgipro™	59
VCD2030556MSE	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	VLOCM0005	V-Loc™ 90	118	VP-522-X	Surgipro™ II / Surgipro™	59
VCD20305FE	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	VLOCM0013	V-Loc™ 90	118	VP-523	Surgipro™ II / Surgipro™	59
VCD20305MFE	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	VLOCM0014	V-Loc™ 90	118	VP-532-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VCD20305MSE	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	VLOCM0023	V-Loc™ 90	118	VP-533	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VCD20305SE	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	VLOCM0024	V-Loc™ 90	118	VP-542-X	Surgipro™ II / Surgipro™	59
VCD20316FE	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	VLOCM0033	V-Loc™ 90	118	VP-543	Surgipro™ II / Surgipro™	59
VCD20316MFE	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	VLOCM0034	V-Loc™ 90	118	VP-555-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VCD20316MSE	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	VLOCM0114	V-Loc™ 90	118	VP-556-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VCD20316SE	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	VLOCM0123	V-Loc™ 90	118	VP-556-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VCD2031MFE	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	VLOCM0124	V-Loc™ 90	118	VP-557-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VCD2031MSE	Ti-Cron™ / Surgidac™	75	VLOCM0125	V-Loc™ 90	118	VP-558-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VCD20331FE	Ti-Cron™ / Surgidac™	71	VLOCM0134	V-Loc™ 90	118	VP-566-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VCD2036305FE	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	VLOCM0135	V-Loc™ 90	118	VP-580-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0004	V-Loc™ 180	122	VLOCM0305	V-Loc™ 90	119	VP-581-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0014	V-Loc™ 180	122	VLOCM0315	V-Loc™ 90	119	VP-582-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0023	V-Loc™ 180	122	VLOCM0345	V-Loc™ 90	119	VP-585-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0024	V-Loc™ 180	122	VLOCM0603	V-Loc™ 90	119	VP-630-X	Surgipro™ II / Surgipro™	62
VLOCL0025	V-Loc™ 180	122	VLOCM0604	V-Loc™ 90	119	VP-631-X	Surgipro™ II / Surgipro™	62
VLOCL0033	V-Loc™ 180	122	VLOCM0614	V-Loc™ 90	119	VP-660-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VLOCL0034	V-Loc™ 180	122	VLOCM0624	V-Loc™ 90	119	VP-702-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	56
VLOCL0114	V-Loc™ 180	122	VLOCM0625	V-Loc™ 90	119	VP-702-X	Surgipro™ II / Surgipro™	56
VLOCL0124	V-Loc™ 180	122	VLOCM0644	V-Loc™ 90	119	VP-703-X	Surgipro™ II / Surgipro™	56
VLOCL0134	V-Loc™ 180	122	VLOCM0804	V-Loc™ 90	119	VP-704-X	Surgipro™ II / Surgipro™	62
VLOCL0135	V-Loc™ 180	122	VLOCM0814	V-Loc™ 90	119	VP-705-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0315	V-Loc™ 180	123	VLOCM0844	V-Loc™ 90	119	VP-705-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0316	V-Loc™ 180	123	VLOCM1203	V-Loc™ 90	119	VP-706-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0316	V-Loc™ 180	123	VLOCM1204	V-Loc™ 90	119	VP-708-X	Surgipro™ II / Surgipro™	62
VLOCL0325	V-Loc™ 180	123	VLOCM1544	V-Loc™ 90	119	VP-709-X	Surgipro™ II / Surgipro™	56
VLOCL0326	V-Loc™ 180	123	VLOCM1545	V-Loc™ 90	119	VP-70-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0335	V-Loc™ 180	123	VLOCM1704	V-Loc™ 90	119	VP-710-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VLOCL0336	V-Loc™ 180	123	VLOCM1744	V-Loc™ 90	119	VP-711-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VLOCL0426	V-Loc™ 180	123	VLOCM1824	V-Loc™ 90	118	VP-712-X	Surgipro™ II / Surgipro™	62
VLOCL0436	V-Loc™ 180	123	VLOCM2105	V-Loc™ 90	119	VP-713-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	56
VLOCL0604	V-Loc™ 180	123	VLOCM2115	V-Loc™ 90	119	VP-713-X	Surgipro™ II / Surgipro™	56
VLOCL0613	V-Loc™ 180	123	VLOCM2145	V-Loc™ 90	119	VP-715-X	Surgipro™ II / Surgipro™	58
VLOCL0614	V-Loc™ 180	123	VLOCN0325	V-Loc™ PBT	126	VP-720-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0615	V-Loc™ 180	123	VLOCN0326	V-Loc™ PBT	126	VP-725-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0624	V-Loc™ 180	123	VLOCN0327	V-Loc™ PBT	126	VP-726-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0625	V-Loc™ 180	123	VLOCN0615	V-Loc™ PBT	126	VP-726-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57
VLOCL0644	V-Loc™ 180	123	VLOCN0644	V-Loc™ PBT	126	VP-727-X	Surgipro™ II / Surgipro™	57

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
VP-728-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62	VP-934-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62
VP-72-MX	■ Surgipro™ II / Surgipro™	56	VP-935-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62
VP-72-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	56	VP-936-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62
VP-733-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	58	VP-945	■ Surgipro™ II / Surgipro™	60
VP-735-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61	VP-956	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62
VP-737-MX	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61	VP-973-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61
VP-738-MX	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62	VP-975-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	63
VP-738-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62	VP-976-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	63
VP-73-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	56	VP-977	■ Surgipro™ II / Surgipro™	63
VP-744-MX	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61	VP-978	■ Surgipro™ II / Surgipro™	63
VP-744-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61	VPF-522-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59
VP-745-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61	VPF-543	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59
VP-746-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	56	VPF-557-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	58
VP-747-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61	VPF-702-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	56
VP-74-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57	VPF-706-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57
VP-754-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	58	VPF-709-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	56
VP-755-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	58	VPF-711-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	58
VP-757-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	58	VPF-713-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	56
VP-75-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57	VPF-735-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61
VP-760-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59	VS-809	■ Sofsilik™	114
VP-761-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59	VS-844	■ Sofsilik™	115
VP-762-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59	VS-845	■ Sofsilik™	115
VP-763-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62	VS-846	■ Sofsilik™	115
VP-76-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57	VS-871	■ Sofsilik™	115
VP-771-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59	VS-872	■ Sofsilik™	115
VP-776-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57	VS-881	■ Sofsilik™	114
VP-813-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57	VS-882	■ Sofsilik™	114
VP-831-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59	VS-889	■ Sofsilik™	114
VP-832-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59	VS-890	■ Sofsilik™	114
VP-833	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59	XC-823	■ Caprosyn™	33
VP-834	■ Surgipro™ II / Surgipro™	59	XC-834	■ Caprosyn™	33
VP-841-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57	XC-844	■ Caprosyn™	33
VP-842-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	60	XC-845	■ Caprosyn™	33
VP-843	■ Surgipro™ II / Surgipro™	60	XM-822	■ Biosyn™	38
VP-851-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57	XM-823	■ Biosyn™	38
VP-853	■ Surgipro™ II / Surgipro™	60	XM-845	■ Biosyn™	38
VP-870-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	58	XNF-1964	■ Novafi™	102
VP-871-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	58	XNF-1965	■ Novafi™	102
VP-872-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	58	XNF-1966	■ Novafi™	102
VP-875-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62	XNF-1993	■ Novafi™	102
VP-881-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57	XNF-1994	■ Novafi™	102
VP-889-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57	XNF-1995	■ Novafi™	102
VP-890-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	57			
VP-900-MX	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61			
VP-900-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61			
VP-902-MX	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61			
VP-902-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61			
VP-904-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	61			
VP-914-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62			
VP-925-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62			
VP-926-X	■ Surgipro™ II / Surgipro™	62			

© 2017 Medtronic. Все права защищены. Medtronic, логотип Medtronic и слоган Further, Together являются торговыми марками компании Медтроник. Все бренды, обозначенные ™, являются собственностью компании Медтроник.

Medtronic

www.medtronic.com
ООО "Медтроник"
123112, Москва,
Пресненская набережная, д. 10
Тел.: +7(495)580-73-77
Факс: +7(495)580-73-78
E-mail: info.russia@medtronic.ru