


Центральный венозный катетер Secalon-T

- Центральный венозный катетер **Secalon-T** предназначен для катетеризации центральных вен по методике «катетер на игле».
- **Замок FloSwitch** – минимизирует риск воздушной эмболии и обратного тока крови. Стальной шарик замка надежно перекрывает поток жидкости, обеспечивая безопасное и четкое открытие и закрытие просвета катетера.

FloSwitch открыт

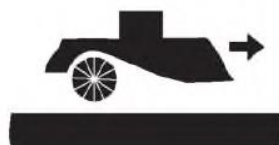

FloSwitch закрыт



Размер, Gauge	Длина, мм	Наружный диаметр, мм	Цветовая кодировка	Скорость потока, мл/мин	Каталожный номер
18G	90	1.2	Зеленый	55	681000
16G	130	1.7	Серый	139	681002
16G	160	1.7	Серый	128	681004
14G	160	2.0	Оранжевый	206	681006



В состав комплекта входят ланцет для прокола кожи и стабилизирующие крылышки.